

**CerTest** Rapid Test

**CerTest**  
BIOTEC

**CerTest**

***C. difficile* GDH+Toxin A+B + Lactoferrin**

ONE STEP *C. difficile* antigen GDH, Toxin A,  
Toxin B and Lactoferrin COMBO CARD TEST

CE 

The test should be used by professional trained in IVD devices

These instructions for use apply to the following references:

**LX862001VF; LX862001VFC; LX862001VFCC**

Estas instrucciones de uso aplican para las siguientes referencias:

**LX862001VF; LX862001VFC; LX862001VFCC**

Initial part of the Instructions for use is common for all the references/

La parte inicial de las instrucciones de uso es común para todas las referencias.

Specific parts for each of the references are described in the corresponding annexes (see tables below)/

Las partes específicas de cada referencia se describen en los correspondientes anexos (ver tablas siguientes).

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN (SEE ANNEX 1) /  
KIT DE 20 CARCASAS DE C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN (VER ANEXO 1)**

PRODUCT / PRODUCTO	REFERENCE / REFERENCIAS
CerTest C. <i>difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin Combo Card (20 tests kit with stool vials)	LX862001VF

Table A 1. Reference for kit 20 combo card of CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin/ Referencia para kit de 20 carcassas de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN WITH POSITIVE CONTROL (SEE ANNEX 2) /  
KIT DE 20 CARCASAS DE C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN CON CONTROL POSITIVO (VER ANEXO 2)**

PRODUCT / PRODUCTO	REFERENCE / REFERENCIAS
CerTest C. <i>difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin Combo Card (20 tests kit with stool vials + PC)	LX862001VFC

Table A 2. Reference for kit 20 combo card of CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin with positive control / Referencia para kit de 20 carcassas de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin con control positivo.

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN WITH POSITIVE AND NEGATIVE CONTROL (SEE ANNEX 3) /  
KIT DE 20 CARCASAS DE C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO (VER ANEXO 3)**

PRODUCT / PRODUCTO	REFERENCE / REFERENCIAS
CerTest C. <i>difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin Combo Card (20 tests kit with stool vials + PC + NC)	LX862001VFCC

Table A 3. Reference for Kit 20 combo card of CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin with positive and negative control / Referencia para kit de 20 carcassas de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin con controles positivo y negativo.

# 1. Quick Guide/Guía rápida

## Quick Guide

CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin

CerTest  
BIOTEC

**1**

Ref. LX862001VF

(x20) (x20) (x20)

Ref. LX862001VFC

C+ (x4) (x4) (x3) (x1)

88:88:88

+

Ref. LX862001VFCC

C- (x2) C+ (x4) (x6) (x4) (x2)

**2a** Procedure for GDH, Toxin A and Toxin B.

x4

**2b** Procedure for Lactoferrin

x4

**3a**

x3

**3b**

x3

**4** 88:88:88  
10'

C T C T  
- +

**5**

# Content/ Contenido

## ENGLISH/ESPAÑOL

1. Quick Guide/Guía rápida .....	3
----------------------------------	---

## ENGLISH

2. Intended use .....	8
3. Summary and Explanation .....	8
4. Test principle .....	9
5. Storage and Stability .....	10
6. Precautions for users .....	10
7. Specimen collection and preparation .....	11
8. Limitations of the test .....	13
9. Expected values .....	14
10. Performance characteristics .....	14
A. Analytical sensitivity (detection limit) .....	14
B. Clinical sensitivity and specificity .....	14
C. Hook Effect .....	18
D. Cross Reactivity .....	18
E. Interferences .....	20
F. Repeatability and Reproducibility .....	25
ANNEX 1 .....	26
I. Materials .....	26
II. Test procedures (samples) .....	26
III. Interpretation of results .....	28
IV. Quality control .....	31
ANNEX 2 .....	32
I. Materials .....	32
II. Test procedures (samples) .....	33
III. Interpretation of results .....	34
IV. Quality control .....	37
<b>A. External positive controls .....</b>	<b>38</b>
<b>1. CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control .....</b>	<b>38</b>
1.1. Positive control procedure .....	38

<b>2. CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b> .....	<b>39</b>
2.1. Positive control procedure .....	39
<b>3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> .....	<b>40</b>
4.1. Positive control procedure .....	40
<b>4. CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .....	<b>41</b>
4.1. Positive control procedure .....	41
A.1 Interpretation positive control procedure .....	42
ANNEX 3.....	45
I. Materials.....	45
II. Test procedures (samples) .....	46
III. Interpretation of results .....	47
IV. Quality control.....	50
<b>A. External positive controls</b> .....	<b>51</b>
<b>1. CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b> .....	<b>51</b>
1.1. Positive control procedure .....	51
<b>2. CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b> .....	<b>52</b>
2.1. Positive control procedure .....	52
<b>3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> .....	<b>53</b>
4.1. Positive control procedure .....	53
<b>4. CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .....	<b>54</b>
4.1. Positive control procedure.....	54
A.1 Interpretation positive control procedure .....	55
<b>B. External negative control. CerTest Negative Control</b> .....	<b>57</b>
B.1 Negative control procedure.....	57
B.1.1 Interpretation negative control procedure.....	60
<b>ESPAÑOL</b>	
2. Uso previsto.....	61
3. Introducción y explicación .....	61
4. Fundamento del test .....	62
5. Condiciones de almacenamiento.....	64
6. Precauciones para el usuario. ....	64
7. Recogida de muestras y preparación.....	65
8. Limitaciones del test.....	66

9.	Valores esperados.....	67
10.	Características del test .....	68
A.	Sensibilidad analítica (límite de detección) .....	68
B.	Sensibilidad y especificidad clínica .....	68
C.	Efecto Hook .....	72
D.	Reacciones cruzadas .....	72
E.	Interferencias .....	74
F.	Repetibilidad y Reproducibilidad.....	79
	ANEXO 1.....	80
I.	Materiales .....	80
II.	Procedimiento (muestras) .....	80
III.	Interpretación de los resultados .....	82
IV.	Control de Calidad.....	86
	ANEXO 2.....	87
I.	Materiales .....	87
II.	Procedimiento (muestras) .....	88
III.	Interpretación de los resultados .....	89
IV.	Control de Calidad.....	93
<b>A.</b>	<b>Controles positivos externos .....</b>	<b>93</b>
<b>1.</b>	<b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control .....</b>	<b>93</b>
1.1.	Procedimiento de uso de Control Positivo .....	93
<b>2.</b>	<b>CerTest C.<i>difficile</i> Toxin A Positive Control.....</b>	<b>94</b>
2.1.	Procedimiento de uso de Control Positivo .....	94
<b>3.</b>	<b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control .....</b>	<b>95</b>
3.1.	Procedimiento de uso de Control Positivo .....	96
<b>4.</b>	<b>CerTest Lactoferrin Positive Control .....</b>	<b>96</b>
4.1.	Procedimiento de uso de Control Positivo .....	97
A.1	Interpretación del procedimiento del control positivo .....	98
	ANEXO 3.....	100
I.	Materiales .....	100
II.	Procedimiento (muestras) .....	101
III.	Interpretación de los resultados .....	102
IV.	Control de Calidad.....	106

<b>A. Controles positivos externos .....</b>	<b>106</b>
<b>1. CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control .....</b>	<b>106</b>
1.1. Procedimiento de uso de Control Positivo .....	107
<b>2. CerTest C.difficile Toxin A Positive Control.....</b>	<b>107</b>
2.1. Procedimiento de uso de Control Positivo .....	108
<b>3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control .....</b>	<b>108</b>
3.1. Procedimiento de uso de Control Positivo .....	109
<b>4. CerTest Lactoferrin Positive Control .....</b>	<b>109</b>
4.1. Procedimiento de uso de Control Positivo .....	110
A.1 Interpretación del procedimiento del control positivo .....	111
<b>B. Control negativo externo. CerTest Negative Control .....</b>	<b>112</b>
B.1 Procedimiento de uso del Control Negativo .....	112
B.1.1 Interpretación del procedimiento del control negativo .....	116

## ENGLISH/ESPAÑOL

11. Reference/Bibliografía.....	117
12. Symbols for IVD components and reagents/Símbolos para reactivos y productos para diagnóstico in vitro	117

---

**ENGLISH**

---

## 2. Intended use

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** one step combo card test is a coloured chromatographic immunoassay for the simultaneous qualitative detection of *Clostridium difficile* Glutamate Dehydrogenase (GDH), Toxin A and Toxin B in stool samples and for the semi-quantitative detection of human lactoferrin (hLf) in stool samples.

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** combo card test offers a simple and highly sensitive screening assay to make a presumptive diagnosis of *Clostridium difficile* infection and intestinal inflammation presence.

## 3. Summary and Explanation

*Clostridium difficile* (*C. difficile*), a Gram-positive spore bearing anaerobic bacterium is the major aetiological agent of diarrhoea and colitis associated with antibiotics (1).

*C. difficile* is the most common cause of health care-associated diarrhoea in developed countries and is a major source of nosocomial morbidity and mortality worldwide. Although traditionally considered an infection affecting patients in health care facilities, in the last 10-20 years *C. difficile* infection is increasingly identified in the community among people with no recent hospitalizations and without prior antibiotic exposure (2-4).

Disease due to *C. difficile* develops when the bacteria is allowed to proliferate in the colon, most commonly after antibiotic use has resulted in sufficient disturbance of the intestinal microflora. Overall, the use of antibiotics is associated with a three-fold increased risk of community-associated *C. difficile* infection (CA-CDI). However, the risk of CA-CDI is largely dependent on the class of antibiotic use (1,3).

*C. difficile* can release two high-molecular-weight toxins, Toxin A and Toxin B, which are responsible for the clinical manifestations, which range from mild, self-limited watery diarrhoea to fulminant pseudomembranous colitis, toxic megacolon, and death. *Clostridium difficile* Glutamate Dehydrogenase (GDH) is an enzyme produced in large quantities by all toxigenic and non-toxigenic strains, making it an excellent marker for the microorganism (2,5).

The use of a direct faecal GDH screen, together with a faecal Toxin AB test, could improve the diagnosis of *Clostridium difficile* infection. Patients with a positive faecal GDH but negative toxin can be monitored closely while awaiting the result of a toxigenic culture (TC), that is used as the gold standard technique to determine *Clostridium difficile* infection (5).

Preventing *C. difficile* infection offers a potentially significant improvement in patient's outcomes, as well as a reduction in hospital costs and resource expenditures. Careful use of antibiotics remains a prominent public health strategy to reduce *C. difficile* infection cases (1,3).

Lactoferrin is a glycoprotein component of neutrophil secondary granules, a primary component of the acute inflammatory response and is released from faecal leukocytes. This protein is resistant to proteolysis in the



faeces and may serve as a marker of inflammation in the intestine. The major cause of faecal neutrophils in patients with chronic diarrhoea is chronic inflammatory bowel disease of the colon (i.e., Crohn's Disease and ulcerative colitis). Lactoferrin has been also studied as a predictor of infection with invasive enteropathogens in children with diarrhoea. Bacterial inflammatory diarrhoea may be caused by *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter* and *Clostridium difficile* (6,7).

## 4. Test principle

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** is based on the principle of a qualitative immunochromatographic assay for the qualitative detection of *Clostridium difficile* Glutamate Dehydrogenase (GDH), Toxin A, Toxin B and Lactoferrin in human stool samples from patients suspected of *Clostridium difficile* infection and intestinal inflammation presence.

**Strip A** consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against GDH and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-GDH) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

**Strip B** consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against Toxin A and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-Toxin A) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

**Strip C** consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against Toxin B and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-Toxin B) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

**Strip D** consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against human lactoferrin and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-human lactoferrin) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

If the sample is GDH positive, the antigen of the diluted sample reacts with the red-coloured conjugates complex (anti-GDH monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip A, if the sample is Toxin A positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugates complex (anti-Toxin A monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip B, if the sample is Toxin B positive, the

antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugated complex (anti-Toxin B monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in strip C and if the sample is human lactoferrin positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugated complex (anti-human lactoferrin monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in strip D, which were previously pre-dried on the absorbent pad. The mixture then moves upward on the membrane by capillary action. As the sample flows through the test membrane, the binding conjugate complexes migrate. The anti-GDH antibodies present on the membrane of strip A (test line), the anti-Toxin A antibodies present on the membrane of strip B (test line), the anti-Toxin B antibodies present on the membrane of strip C (test line) and the anti-human lactoferrin antibodies present on the membrane of strip D (test line) capture the coloured conjugate and the red lines will be visible in the three strips. These bands are used to interpret the result.

If the sample is negative, there is no GDH, Toxin A, Toxin B and human lactoferrin presence and yet, the antigens may be present in a concentration lower than the detection limit value, for which the reaction will not take place with any red-coloured conjugate complex. The anti-GDH, the anti-Toxin A, the anti-Toxin B and the anti-human lactoferrin antibodies present on the membranes (test lines) will not capture the antigen-red-coloured conjugate complex (not formed), for which the red lines will not appear.

Whether the sample is positive or not, in the three strips, the mixture continues to move across the membranes to the immobilized specific antibodies placed in the control lines. The anti-specific protein antibodies present on three membranes will capture control green-conjugate complex and three control lines will always appear. The presence of these green lines serve as: 1) verification that sufficient volume is added, 2) that proper flow is obtained and 3) an internal control for the reagents.

## 5. Storage and Stability

The kits should be stored at 2-30°C, in these conditions can be used until the expiration date which is stated on the kit label. All the kit components are for only one use and should remain in its primary packaging until use. Do not freeze.

## 6. Precautions for users

- **For professional *in vitro* diagnostic use only.**
- Read the instructions for use carefully before use the kit.
- Do not use after expiration date.
- Do not use the kit if the label that seals the outer box is broken.
- Do not use product if the protective external box or the protective aluminium pouches are opened or damaged upon arrival.
- Do not use the test (and positive/negative controls if the final reference contains them) if desiccant material is not present or broken inside the aluminium pouch.

- Components provided in the kit are approved for use in the **CerTest C.difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**. Do not mix or use with components from other product kit or lots. Do not use with other commercial kit components (from another supplier).
- All the components of the kits are for single use. Do not reuse.
- Follow Good Laboratory Practices, wear protective clothing, use disposal gloves or other personal protective equipment such as goggles and mask that will be considered necessary. Do not eat, drink or smoke in the working area.
- All the specimens should be considered potentially hazardous, as well as all the materials that have been exposed to the samples and they must be handled according to the local or national safety regulations. Must be handled in the same manner as an infectious agent. Use proper infection control practices. These practices should include, but are not limited to, personal protective equipment (PPE), such as laboratory coat, surgical or appropriate mask, or face shield, disposable gloves, and eye protection. Take necessary precautions during the collection, transport, storage, handling, and disposal of the samples. Each sample must be correctly and unequivocally identified in order to guarantee the correct traceability of the samples.
- A new test must be used for each sample to avoid contaminations errors.
- Clean up spills thoroughly using an appropriate disinfectant.
- Reagents contain preservatives (<0.1% sodium azide). Avoid any contact with skin or mucous membrane. In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), **CerTest C.difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** do not contain substances and/or mixtures which meet the hazard classification criteria available in Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) or which are in concentrations higher than the value established in the mentioned regulation for their declaration. Material Safety Data Sheet are not included with this device, nevertheless it could be consulted upon requested to CerTest Biotec.
- The certificate of analysis is not included with the device, however, it could be requested to CerTest Biotec in case of need.
- The presence of yellow lines in the results window (control line zone and test line zone), before using the test, is completely normal and does not imply failure of the test functionality.
- Visual interpretation of the results by coloured lines, interpretation of the results must be done by professional user without problems in colour interpretation.
- The tests (vials, devices, positive/negative control if any) should be discarded in a proper biohazard container after testing. These containers should be discarded in accordance with local or national laws or regulations.

## 7. Specimen collection and preparation

Samples should be collected in a clean container and processed as soon as possible after collection. Follow proper infection control practices.

Samples can be preserved at room temperature if they are going to be analysed into the same day after taking them. The recommendation is processed the sample immediately after collection.

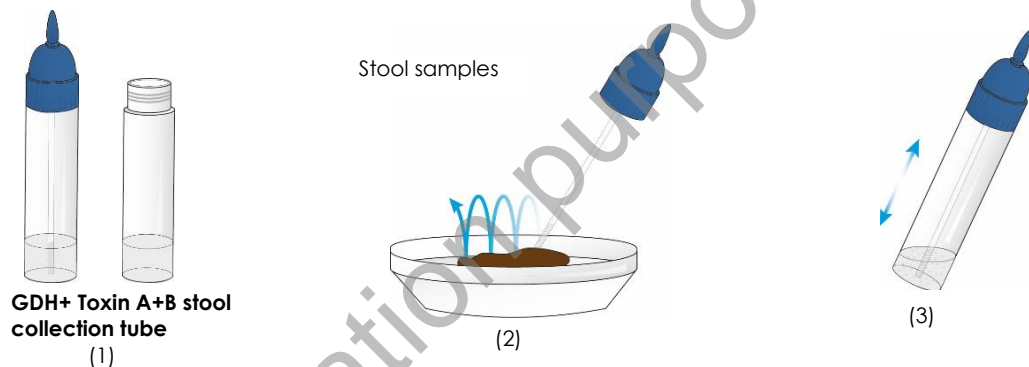
If this is not possible, stool samples could be stored in the refrigerator (2-8°C) for a maximum of 24 hours. For longer storage, maximum 1 year, the specimen must be kept frozen (-20°C). In this case, the sample will be totally thawed and brought to room temperature before testing. Ensure only the amount needed is thawed because of freezing and defrosting cycles are not recommended. Homogenise stool samples as thoroughly as possible prior to preparation.

**Please take note that there are two different stool collection tubes:**

**a. GDH+Toxin A+B stool collection tubes**

**Specimen preparation (see illustration):**

1. Take out the cap of the **GDH+Toxin A+B stool collection tube** (1) and use the stick to pick up sufficient sample quantity. Then, introduce the stick once into 4 different parts of the stool sample (2), to collect faecal sample (approx. 50 mg) and add it to the **GDH+Toxin A+B stool collection tube**. For liquid samples, add approx. 125 µL in the **GDH+Toxin A+B stool collection tube** using a micropipette.
2. Close the **GDH+Toxin A+B stool collection tube**. Shake the tube in order to assure good sample dispersion (3).




Continue immediately with the test procedure. See Annexes. Each sample vial (containing the sample) and cassette with which will be tested that sample should be perfectly recognizable including patient's identification.

**b. Lactoferrin stool collection tubes**

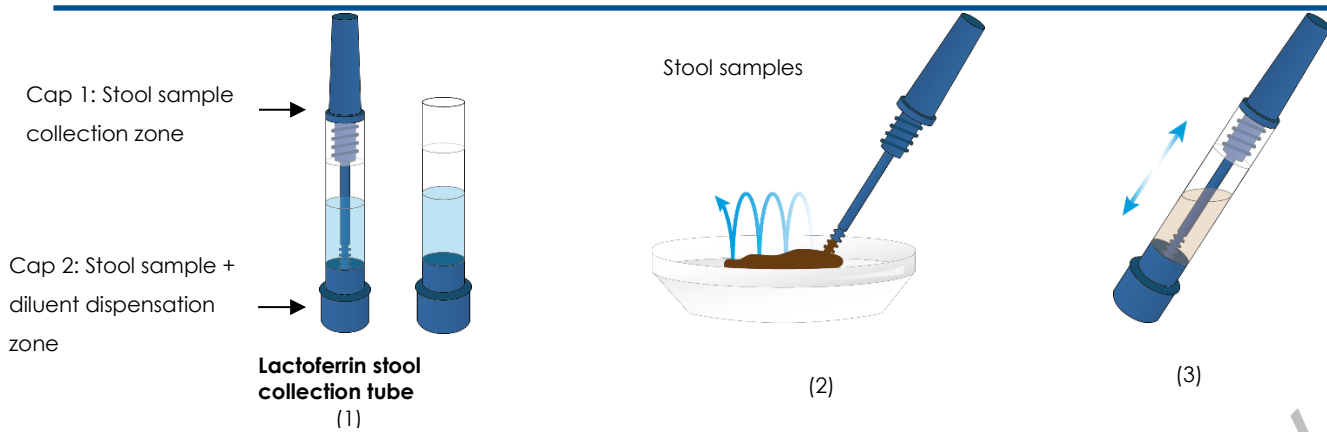**Specimen preparation (see illustration):**

1. Take out the cap 1 of the **Lactoferrin stool collection tube** (1) and use the stick to pick up sufficient sample quantity. Then, introduce the stick once into 4 different parts of the stool sample (2), to collect faecal sample (approx. 20 mg) and add it to the **Lactoferrin stool collection tube**. For liquid samples, add approx. 20 µL in the **Lactoferrin stool collection tube** using a micropipette.
2. Close the **Lactoferrin stool collection tube**. Shake the tube in order to assure good sample dispersion (3).



Continue immediately with the test procedure. See Annexes. Each sample vial (containing the sample) and cassette with which will be tested that sample should be perfectly recognizable including patient's identification.

## 8. Limitations of the test

- 1) The test must be carried out within 2 hours after opening the sealed bag.
- 2) An excess of sample could cause wrong results (brown bands appear). Dilute the sample with the diluent and repeat the test.
- 3) The intensity of test line may vary from very strong at high antigens concentration to faint when the antigens concentration is close to the detection limit value of the test.
- 4) **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** should be used only with samples from human faeces. The use of other samples has not been established. The quality of the test depends on the quality of the sample; proper faecal specimens must be obtained.
- 5) Positive results determine the presence of GDH, Toxin A, Toxin B of *Clostridium difficile* and human lactoferrin in faecal samples. A positive result should be followed up with additional laboratory techniques (toxigenic culture) to determine the strain of *Clostridium difficile*. A confirmed infection should only be made by a physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated and must be based in the correlation of the results with further clinical observations.
- 6) A negative result is not meaningful because of it is possible GDH, Toxin A, Toxin B of *Clostridium difficile* and/or human lactoferrin concentration in the stool sample is lower than the detection limit value or cut-off value. If the symptoms or situation persist, a *Clostridium difficile* determination should be carried out, on a sample from an enrichment culture.
- 7) Lactoferrin is a component of breast milk; the test will be positive in breast fed children and should not be used to evaluate neonates receiving breast milk.
- 8) Stool from patients with active inflammatory bowel diseases that usually involve significant neutrophilic inflammation of the intestine, such as Crohn's disease and ulcerative colitis, would be positive for faecal lactoferrin.

- 9) Bloody stool samples can contain components that may cause non-specific reactions in the test. Every bloody stool samples whose result is positive should be followed up with other techniques of diagnosis to confirm the result.
- 10) Mucous stool samples may cause non-specific reactions in the test. Every mucous stool sample whose result is positive should be followed up with other techniques of diagnosis to confirm the result.

## 9. Expected values

*Clostridium difficile* is associated with 95-100% cases of pseudomembranous colitis, 60-75% cases of antibiotic-associated colitis and 35% of cases of antibiotic-associated diarrhoea cases. In addition, nearly 223.900 people in the United States required hospital care for *C. difficile* and at least 12.800 people died in 2017. Although U.S. outpatient antibiotic prescription rate decreased from 2011 to 2016, at least 30% of outpatient antibiotic prescription are estimated to be unnecessary, which highlights the need to improve outpatient prescribing (4,5,8).

While the development of new treatments is one of these key actions, such investments must be coupled with dedicated efforts toward preventing infections in the first place, slowing the development of resistance through better antibiotic use, and stopping the spread of resistance (8).

Some studies established equal or higher 10 µg hLf/g faeces as cut-off value to allow to detect adult patients with gastrointestinal inflammatory pathology that will require to diagnosis additional diagnostic invasive procedures(6).

## 10. Performance characteristics

### A. Analytical sensitivity (detection limit)

Detection limit value (LoD) of **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** is 0.39 ng/mL of *Clostridium difficile* antigen GDH, 2 ng/mL of *Clostridium difficile* Toxin A, 3.12 ng/mL of *Clostridium difficile* Toxin B and 100 ng/mL (10 µg hLf/ g faeces) of human lactoferrin.

There is not any external standard approved as a general and reference standard. The internal standard used for validation of this CerTest products are purified *Clostridium difficile* Glutamate dehydrogenase recombinant protein and purified *Clostridium difficile* Toxin A and Toxin B, and human lactoferrin.

### B. Clinical sensitivity and specificity

#### B.1 Clinical sensitivity and specificity -GDH+Toxin A+Toxin B

An external retrospective evaluation (Hospital Clinico Lozano Blesa, Zaragoza) with frozen stool samples was performed using **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** versus another immunochromatographic (IC) test. Discordant results between the IC tests were analyzed by qPCR. This is the evaluation criteria. The results were as follows:

**For Strip A: *Clostridium difficile* antigen GDH**

		Evaluation criteria (GDH)		
		+	-	Total
IC test: CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH)				
	+	86	1	87
	-	3	160	163
	Total	89	161	250

Table 1 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH) performance versus evaluation criteria.

CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH) vs Evaluation criteria		
	Mean Value	95% confidence interval
Sensitivity	96.6%	90.5-99.3%
Specificity	99.4%	96.6-100.0%
PPV	98.9%	93.8-100.0%
NPV	98.2%	94.7-99.6%

Table 2 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH) clinical results.**For Strip B: *Clostridium difficile* Toxin A**

		Evaluation criteria (Toxin A)		
		+	-	Total
IC test: CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin A)				
	+	51	0	51
	-	1	198	199
	Total	52	198	250

Table 3 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin A) performance versus evaluation criteria.

CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin A) vs Evaluation criteria		
	Mean Value	95% confidence interval
Sensitivity	98.1%	89.7-100.0%
Specificity	100.0%	98.2-100.0%
PPV	100.0%	93.0-100.0%
NPV	99.5%	97.2-100.0%

Table 4 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin A) clinical results.**For Strip C: *Clostridium difficile* Toxin B**

		Evaluation criteria (Toxin B)		
		+	-	Total
IC test: CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin B)				
	+	40	0	40
	-	4	206	210
	Total	44	206	250

Table 5 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin B) performance versus evaluation criteria.



CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin B) vs Evaluation criteria		
	Mean Value	95% confidence interval
Sensitivity	90.9%	78.3-97.5%
Specificity	100.0%	98.2-100.0%
PPV	100.0%	91.2-100.0%
NPV	98.1%	95.2-99.5%

Table 6 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin B) clinical results.

## B.2 Clinical sensitivity and specificity -Lactoferrin

An internal retrospective evaluation (Hospital Clinico Lozano Blesa, Zaragoza) with frozen stool samples was performed using **CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** versus ELISA test. The ELISA technique has been considered the gold standard. This is the evaluation criteria. The results were as follows:

### For Strip D: Lactoferrin

#### Data for cut-off value 10µg hLf/g:

IC test: CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin)	Evaluation criteria (Toxin B)		
		+	-
+	27	13	40
-	3	47	50
Total	30	60	90

Table 7 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin) performance versus evaluation criteria.

CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin) vs Evaluation criteria		
	Mean Value	95% confidence interval
Sensitivity	90.0%	73.5-97.9%
Specificity	78.3%	65.8-87.9%
PPV	67.5%	50.9-81.4%
NPV	94.0%	83.5-98.7%

Table 8 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin) clinical results.

Specificity for a cut-off value of 2.5 µg hLf/g: 100.0% (mean value); 83.9-100.0% (95% confidence interval).

The most recent external retrospective evaluation performed to the test (with frozen stool samples) showed the following results:

- ***Clostridium difficile* antigen GDH:** sensitivity 96.6% (95% confidence interval: 90.5-99.3%) and specificity 99.4% (95% confidence interval: 96.6-100.0%).
- **Toxin A:** Sensitivity 98.1%, (95% confidence interval: 89.7-100.0%) and specificity 100.0% (95% confidence interval: 98.2-100.0%).



- **Toxin B:** Sensitivity 90.9%, (95% confidence interval: 78.3-97.5%) and specificity 100.0% (95% confidence interval: 98.2-100.0%).
- **Human Lactoferrin:** Sensitivity 90.0%, (95% confidence interval: 73.5-97.9%) and specificity 78.3% (95% confidence interval: 65.8-87.9%).

The results showed a high sensitivity and specificity to detect *Clostridium difficile* antigen GDH, Toxin A, Toxin B and/or human lactoferrin using **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**.

#### **For Strip A: Clostridium difficile antigen GDH**

N°	Site	Sample type	Reference	Target
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-May 2021	Human stool samples	Code (17.1.1)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-June 2017	Human stool samples	Code (17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
3	Louvain, (France) January- December 2016	Human stool samples	Code (17.1.3)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
4	ECCMID April 2016, Amsterdam	Human stool samples	Code (17.1.4)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH

Table 9 Resume of Clinical evaluations. Site, sample type, target.

N°	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (%)	Spec. (%) CI (%)	PPV (%) CI (%)	NPV (%) CI (%)
1	86	1	3	160	250	<b>96.6</b> (90.5-99.3)	<b>99.4</b> (96.6-100.0)	<b>98.9</b> (93.8-100.0)	<b>98.2</b> (94.7-99.6)
2	51	0	0	75	126	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>100.0</b> (95.2-100.0)	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>100.0</b> (95.2-100.0)
3	130	8	8	332	478	<b>94.2</b> (88.9-97.5)	<b>97.6</b> (95.4-99.0)	<b>94.2</b> (88.9-97.5)	<b>97.6</b> (95.4-99.0)
4	27	8	6	117	158	<b>81.8</b> (64.5-93.0)	<b>93.6</b> (87.8-97.2)	<b>77.1</b> (59.9-89.6)	<b>95.1</b> (89.7-98.2)
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>684</b>	<b>1012</b>	<b>94.5</b> (91.4-96.8)	<b>97.6</b> (96.1-98.6)	<b>94.5</b> (91.4-96.8)	<b>97.6</b> (96.1-98.6)

Table 10 Clinical evaluations and global results. True positive (TP), false positive (FP), false negative (FN), true negative values (TN), and total samples (N). Sensitivity (Sens), specificity (Spec), Predictive Positive Values (PPV), Predictive Negative Values (NPV), 95% interval of confidence (CI) for CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH).

#### **For Strip B: Clostridium difficile Toxin A**

Ref.	Location	Sample type	Reference	Target
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-June 2017	Human stool samples	Code (17.1.1)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain)	Human stool samples	Code (17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A

	April-May 2021			
--	----------------	--	--	--

Table 11 Resume of Clinical evaluations. Location, sample type, target.

Ref.	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (%)	Spec. (%) CI (%)	PPV (%) CI (%)	NPV (%) CI (%)
1	28	0	1	97	126	<b>96.9</b> (92.2-99.9)	<b>100.0</b> (96.2-100.0)	<b>100.0</b> (87.7-100.0)	<b>99.0</b> (94.4-100.0)
2	51	0	1	198	250	<b>98.1</b> (89.7-100.0)	<b>100.0</b> (98.2-100.0)	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>99.5</b> (97.2-100.0)
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>295</b>	<b>376</b>	<b>97.5</b> (91.4-99.7)	<b>100.0</b> (98.8-100.0)	<b>100.0</b> (95.4-100.0)	<b>99.3</b> (97.6-99.9)

Table 12 Clinical evaluations and global results. True positive (TP), false positive (FP), false negative (FN), true negative values (TN), and total samples (N). Sensitivity (Sens), specificity (Spec), Predictive Positive Values (PPV), Predictive Negative Values (NPV), 95% interval of confidence (CI) for CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin A).

**For Strip C: Clostridium difficile Toxin B**

Ref.	Location	Sample type	Reference	Target
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-June 2017	Human stool samples	Code (17.1.1.)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-May 2021	Human stool samples	Code (17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B

Table 13 Resume of Clinical evaluations. Location, sample type, target.

Ref.	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (95%)	Spec. (%) CI (%)	PPV (%) CI (%)	NPV (%) CI (%)
1	36	1	0	89	126	<b>100.0</b> (90.3-100.0)	<b>98.9</b> (94.0-100.0)	<b>97.3</b> (85.8-99.9)	<b>100.0</b> (95.9-100.0)
2	40	0	4	206	250	<b>90.9</b> (78.3-97.5)	<b>100.0</b> (98.2-100.0)	<b>100.0</b> (91.2-100.0)	<b>98.1</b> (95.2-99.5)
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>295</b>	<b>376</b>	<b>95.0</b> (87.7-98.6)	<b>99.7</b> (98.1-100.0)	<b>98.7</b> (93.0-100.0)	<b>98.7</b> (96.6-99.6)

Table 14 Clinical evaluations and global results. True positive (TP), false positive (FP), false negative (FN), true negative values (TN), and total samples (N). Sensitivity (Sens), specificity (Spec), Predictive Positive Values (PPV), Predictive Negative Values (NPV), 95% interval of confidence (CI) for CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxin B).

**C. Hook Effect**

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** does not show inhibitory hook effect at concentration higher than 10<sup>5</sup>xLoD for *Clostridium difficile* antigen GDH, higher than 10<sup>2</sup>xLoD for *C. difficile* Toxin A, higher than 10<sup>4</sup>xLoD for *C. difficile* Toxin B and higher than 10<sup>3</sup>xLoD for human lactoferrin.

**D. Cross Reactivity**

An evaluation was performed to determine the cross reactivity of **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**, no cross reactivity against organism, pathogens, substances that could cause infections:

**For Strip A: Clostridium difficile antigen GDH**

Cross reactivity										
<b>Virus</b>	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
<b>Bacteria</b>	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Clostridium Haemolyticum</i>	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Clostridium Novyi</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica O:3</i>	-
	<i>Clostridium difficile Toxin A</i>	-	<i>Clostridium Tetani</i>	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica O:9</i>	-
	<i>Clostridium difficile Toxin B</i>	-	<i>Clostridium Septicum</i>	-	<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-		-
	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Escherichia coli O:157</i>	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-		-
	<i>Clostridium bifementans</i>	-	<i>Escherichia coli O:026</i>	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-		-
	<i>Clostridium Butyricum</i>	-	<i>Escherichia coli O:111</i>	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-		-
<b>Parasites</b>	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-				
<b>Others</b>	Pig haemoglobin	-	Bovine haemoglobin	-	Bovine Lactoferrin	-	Bovine Transferrin	-		

Table 15 Cross reactivity results (GDH).

A specificity assay was performed for **CerTest Clostridium difficile antigen GDH**. This concluded that the test, could detect the following antigens: *C. sporogenes* (CECT 485) and *C. botulinum* (CECT 551).

In this specificity assay, *Clostridium sordellii* (ATCC 9714) was evaluated and no cross reactivity was found. In few intercomparison studies **CerTest Clostridium difficile antigen GDH** have a positive signal with this pathogen, but the nature of this positive result could not be established.

#### **For Strip B: Clostridium difficile Toxin A**

Cross reactivity										
<b>Virus</b>	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
<b>Bacteria</b>	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Escherichia coli O:157</i>	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Escherichia coli O:026</i>	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	<i>Clostridium difficile antigen GDH</i>	-	<i>Escherichia coli O:111</i>	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica O:3</i>	-
	<i>Clostridium difficile Toxin B</i>	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica O:9</i>	-
	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-		-
<b>Parasites</b>	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Entamoeba dispar</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-		
<b>Others</b>	Pig haemoglobin	-	Bovine haemoglobin	-						

Table 16 Cross reactivity results (Toxin A).

**For Strip C: Clostridium difficile Toxin B**

Cross reactivity										
<b>Virus</b>	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
<b>Bacteria</b>	Campylobacter coli	-	Escherichia coli O:157	-	Listeria monocytogenes	-	Shigella boydii	-	Streptococcus pneumococcal	-
	Campylobacter jejuni	-	Escherichia coli O:026	-	Salmonella enteritidis	-	Shigella dysenteriae	-	Streptococcus pyogenes	-
	Clostridium difficile antigen GDH	-	Escherichia coli O:111	-	Salmonella paratyphi	-	Shigella flexneri	-	Yersinia enterocolitica O:3	-
	Clostridium difficile Toxin A	-	Helicobacter pylori	-	Salmonella typhi	-	Shigella sonnei	-	Yersinia enterocolitica O:9	-
	Clostridium perfringens	-	Legionella pneumophila	-	Salmonella typhimurium	-	Staphylococcus aureus	-		
<b>Parasites</b>	Cryptosporidium Parvum	-	Entamoeba histolytica	-	Entamoeba dispar	-	Giardia lamblia	-		
<b>Others</b>	Pig haemoglobin	-	Bovine haemoglobin	-						

Table 17 Cross reactivity results (Toxin B).

**For Strip D: Human Lactoferrin**

Cross reactivity										
<b>Virus</b>	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
<b>Bacteria</b>	Campylobacter coli	-	Clostridium perfringens	-	Legionella pneumophila	-	Salmonella typhimurium	-	Staphylococcus aureus	-
	Campylobacter jejuni	-	Escherichia coli O:157	-	Listeria monocytogenes	-	Shigella boydii	-	Streptococcus pneumococcal	-
	Clostridium difficile antigen GDH	-	Escherichia coli O:026	-	Salmonella enteritidis	-	Shigella dysenteriae	-	Streptococcus pyogenes	-
	Clostridium difficile Toxin A	-	Escherichia coli O:111	-	Salmonella paratyphi	-	Shigella flexneri	-	Yersinia enterocolitica O:3	-
	Clostridium difficile Toxin B	-	Helicobacter pylori	-	Salmonella typhi	-	Shigella sonnei	-	Yersinia enterocolitica O:9	-
<b>Parasites</b>	Cryptosporidium Parvum	-	Entamoeba histolytica	-	Entamoeba dispar	-	Giardia lamblia	-		
<b>Others</b>	Pig haemoglobin	-	Bovine haemoglobin	-	Bovine lactoferrin	-	Bovine transferrin	-		

Table 18 Cross reactivity results (Lactoferrin).

**E. Interferences**

An evaluation was performed to determine the possible interferences of **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**; no interferences against the substances tested were detected:

**For Strip A: Clostridium difficile antigen GDH**

	Potencial interfering substance	Concentration	Results	Potencial interfering substance	Concentration	Results
<b>Exogenous</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interference	Loperamide hydrochloride (Fortasec)	0.15 mg/mL	No interference
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interference	Heparin (Hibor)	350.0 IU/mL	No interference
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interference	Almagato (Almax)	3.0 mg/mL	No interference
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interference	Fosfamycin (Monurol)	3.0 · 10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interference	Acetylcysteine (Fluimucil)	3.0 mg/mL	No interference
	Codeine (Toseina)	0.2 mg/mL	No interference	Dexketoprofen trometamol (Enantyum)	0.3 mg/mL	No interference
	Benzocaine (Angileptol)	0.3 mg/mL	No interference	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interference
	Cloperastine (Flutox)	0.3 mg/mL	No interference	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interference
	Carbocisteine (Iniston mucolítico)	3.0 mg/mL	No interference	Rifampicin (Rifaldin)	0.3 mg/mL	No interference
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interference	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interference
	Dexchlorpheniramine (Polaramine)	0.3 mg/mL	No interference	Ambroxol hydrochloride (Mucosan)	0.3 mg/mL	No interference
	Ebastine (Ebastel)	3.0 mg/mL	No interference	Macrogol 3350 (Movicol)	3.0 mg/mL	No interference
	Acetyl Salicylic (Adiro)	0.3 mg/mL	No interference	Lysine Carbocysteinate (Pectox)	3.0 · 10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference
	Ibuprofen (Espidifen)	3.0 mg/mL	No interference	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interference
	Paracetamol (Dolocatil)	5.0 mg/mL	No interference	Lorazepam	3.0 · 10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Metamizole (Nolotil)	5.0 mg/mL	No interference	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interference
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interference	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interference
	Omeprazole	2.0 · 10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference	Biotine	0.10 mg/mL	No interference
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interference	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interference
	CVS Nasal Spray (Cromolyn)	4 mg/mL	No interference	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interference
Afrin (Oxymetazoline)	5.0 · 10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	Mupirocin	2.5 · 10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
CVS Nasal Drops (Phenylephrine)	10.0 mg/mL	No interference	Fluticasone Propionate	5.0 · 10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
ZICAM	1.0 mg/mL	No interference	Homeopathic	DIL 1/10	No interference	
Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interference				
<b>Endogenous</b>	Human haemoglobin	5.0 µg/mL	No interference	Human lactoferrin	5.0 µg/mL	No interference
	Human transferrin	0.5 µg/mL	No interference	Mucine	0.5 %	No interference
	Human calprotectin	5.0 µg/mL	No interference	Human blood	5.0 %	No interference

Table 19 Clostridium difficile antigen GDH interferences results.

**For Strip B: Clostridium difficile Toxin A**

	Potencial interfering substance	Concentration	Results	Potencial interfering substance	Concentration	Results
<b>Exogenous</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interference	Loperamide hydrochloride ( <i>Fortasec</i> )	0.15 mg/mL	No interference
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interference	Heparin ( <i>Hibor</i> )	350.0 IU/mL	No interference
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interference	Almagato ( <i>Almax</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interference	Fosfamycin ( <i>Monurol</i> )	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interference	Acetylcysteine ( <i>Fluimucil</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Codeine ( <i>Toseina</i> )	0.2 mg/mL	No interference	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interference
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interference
	Carbocisteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interference	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interference
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Acetyl Salicylic ( <i>Adiro</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	3.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interference
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Lorazepam	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interference
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interference	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interference
	Omeprazole	2.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference	Biotine	0.10 mg/mL	No interference
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interference	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interference
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interference	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interference
Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	Mupirocin	2.5·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
CVS Nasal Drops ( <i>Phenylephrine</i> )	10.0 mg/mL	No interference	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
ZICAM	1.0 mg/mL	No interference	Homeopathic	DIL 1/10	No interference	
Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interference				
<b>Endogenous</b>	Human haemoglobin	5.0 µg/mL	No interference	Human lactoferrin	5.0 µg/mL	No interference
	Human transferrin	0.5 µg/mL	No interference	Mucine	0.5 %	No interference
	Human calprotectin	5.0 µg/mL	No interference	Human blood	5.0 %	No interference

Table 20 Clostridium difficile toxin A interferences results.

**For Strip C: Clostridium difficile Toxin B**

	Potencial interfering substance	Concentration	Results	Potencial interfering substance	Concentration	Results
<b>Exogenous</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interference	Loperamide hydrochloride ( <i>Fortasec</i> )	0.15 mg/mL	No interference
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interference	Heparin ( <i>Hibor</i> )	350.0 IU/mL	No interference
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interference	Almagato ( <i>Almax</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interference	Fosfamycin ( <i>Monurol</i> )	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interference	Acetylcysteine ( <i>Fluimucil</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Codeine ( <i>Toseina</i> )	0.2 mg/mL	No interference	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interference
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interference
	Carbocisteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interference	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interference
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Acetyl Salicylic ( <i>Adiro</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	3.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interference
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Lorazepam	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interference
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interference	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interference
	Omeprazole	2.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference	Biotine	0.10 mg/mL	No interference
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interference	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interference
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interference	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interference
Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	Mupirocin	2.5·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
CVS Nasal Drops ( <i>Phenylephrine</i> )	10.0 mg/mL	No interference	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
ZICAM	1.0 mg/mL	No interference	Homeopathic	DIL 1/10	No interference	
Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interference				
<b>Endogenous</b>	Human haemoglobin	5.0 µg/mL	No interference	Human lactoferrin	5.0 µg/mL	No interference
	Human transferrin	0.5 µg/mL	No interference	Mucine	0.5 %	No interference
	Human calprotectin	5.0 µg/mL	No interference	Human blood	5.0 %	No interference

Table 21 Clostridium difficile toxin B interferences results.

**For Strip D: Human Lactoferrin**

	Potencial interfering substance	Concentration	Results	Potencial interfering substance	Concentration	Results
<b>Exogenous</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interference	Loperamide hydrochloride ( <i>Fortasec</i> )	0.15 mg/mL	No interference
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interference	Heparin ( <i>Hibor</i> )	350.0 IU/mL	No interference
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interference	Almagato ( <i>Almax</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interference	Fosfamycin ( <i>Monurol</i> )	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interference	Acetylcysteine ( <i>Fluimucil</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Codeine ( <i>Toseina</i> )	0.2 mg/mL	No interference	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interference
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interference
	Carbocisteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interference	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interference
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interference
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interference
	Acetyl Salicylic ( <i>Adiro</i> )	0.3 mg/mL	No interference	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	3.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interference	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interference
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Lorazepam	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interference	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interference
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interference	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interference
	Omeprazole	2.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interference	Biotine	0.10 mg/mL	No interference
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interference	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interference
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interference	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interference
Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	Mupirocin	2.5·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
CVS Nasal Drops ( <i>Phenylephrine</i> )	10.0 mg/mL	No interference	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interference	
ZICAM	1.0 mg/mL	No interference	Homeopathic	DIL 1/10	No interference	
Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interference				
<b>Endogenous</b>	Human haemoglobin	5.0 µg/mL	No interference	Human lactoferrin	5.0 µg/mL	No interference
	Human transferrin	0.5 µg/mL	No interference	Mucine	0.5 %	No interference
	Human calprotectin	5.0 µg/mL	No interference	Human blood	5.0 %	No interference

Table 22 Human Lactoferrin interferences results.



---

**F. Repeatability and Reproducibility**

Following the study of repeatability and reproducibility of **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**, performed using different internal samples, negative and positive, no significative differences have been observed within the evaluations.

For information purposes only

## ANNEX 1

## KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN. Catalogue reference: LX862001VF

Annex for the following reference:

PRODUCT	REFERENCE
<b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials)	LX862001VF

Table A 1. Reference for kit 20 combo card of CerTest C.difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

### I. Materials

MATERIALS PROVIDED	MATERIALS REQUIRED BUT NO PROVIDED
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (combo card test format)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>- 1x IFU Instructions for use (including Quick guide use).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposable gloves (other personal protective equipment that will be considered necessary)</li> <li>- Timer</li> <li>- Specimen collection container</li> </ul>

Table A 1.1 Materials necessities for test performance.

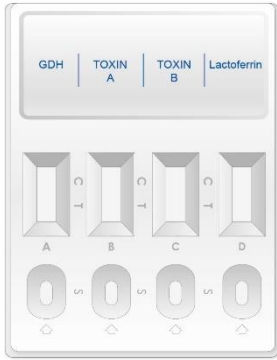
### II. Test procedures (samples)

Follow proper infection control practices. Allow tests and samples to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.


1. Proceed to shake the **stool collection tubes** (both types) in order to assure good sample dispersion.
2. Remove **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) from its sealed bag just before using it.
3. Take the **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cut the end of the cap (1) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter A (2), 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter B (3) and 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter C (4). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. Take the **Lactoferrin stool collection tube**, open the cap 2 (5) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter D (6). Avoid adding solid particles with the liquid.

5. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.


If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.



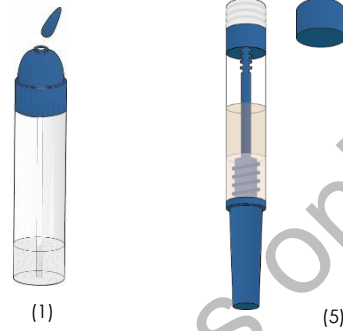
Results window  
 ← Control Line (C)  
 ← Test Line (T)  
 Sample (S) circular window



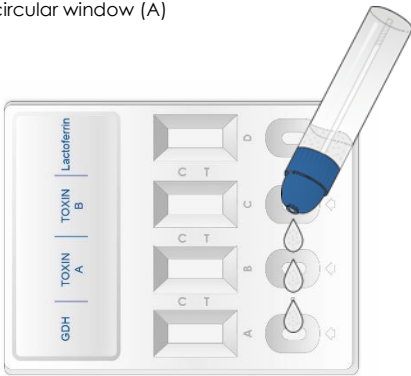
(2) Add 3 drops in the circular window (A)



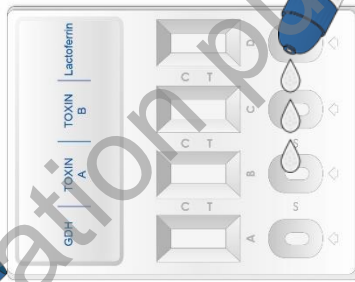
(3) Add 3 drops in the circular window (B)



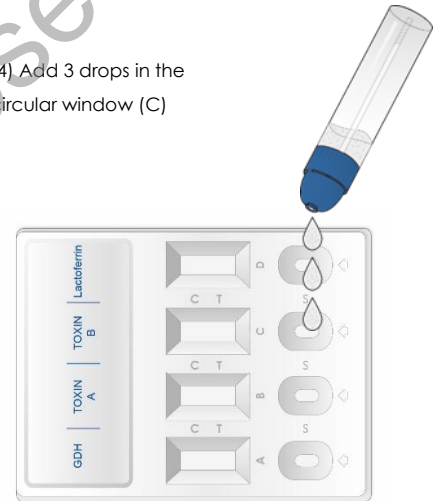(4) Add 3 drops in the circular window (C)







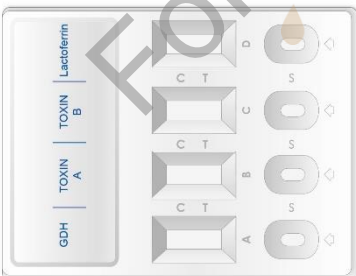
(6) Add 3 drops in the circular window (D)









**Wait 10 minutes**

### III. Interpretation of results

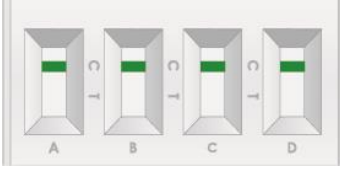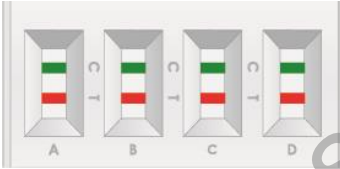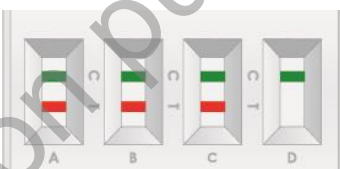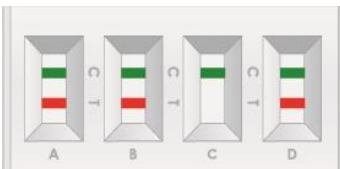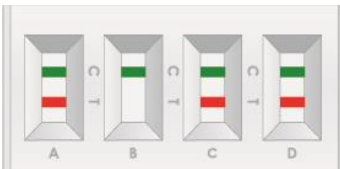(please, refer to the illustration below)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There are no GDH, Toxin A or Toxin B of <i>C. difficile</i> presence and neither human lactoferrin. No infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>A negative result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN		
2.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There are GDH, Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED		
3.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH, Toxin A and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		
4.	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is GDH, Toxin A and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		
5.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is GDH, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		

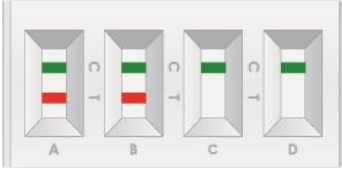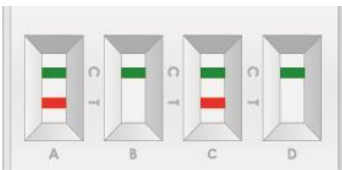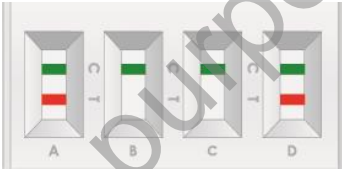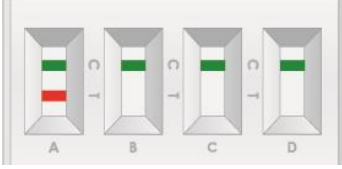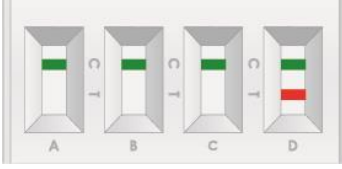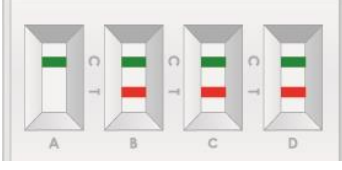	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
6.	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin A presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN		
7.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
8.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is GDH and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN-RED		
9.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN		
10.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is Lactoferrin presence. Possible intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		
11.	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		

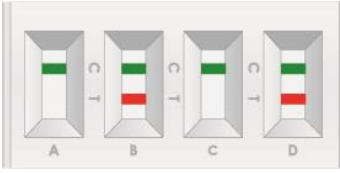
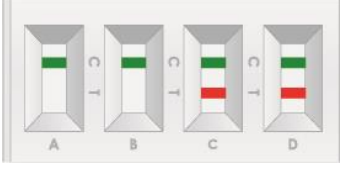
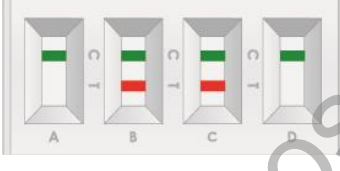
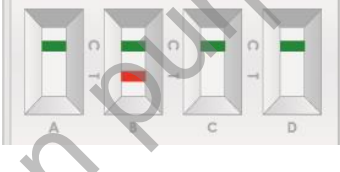
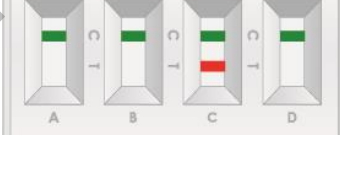
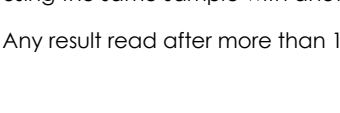
	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
12.	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>		There is Toxin A and Lactoferrin presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		
13.	<b>NEGATIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>POSITIVE</b>		There is Toxin B and Lactoferrin presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		
14.	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>		There is Toxin A and Toxin B presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.
	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		
15.	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>		There is Toxin A presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN		
16.	<b>NEGATIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>	<b>POSITIVE</b>	<b>NEGATIVE</b>		There is Toxin B presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
17.	<b>INVALID</b>					Invalid result either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.  Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.
	Any other results					

Table A 1.2. CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin performance interpretation of the results.

**Whatever results detailed between 11 and 16, are not very common. A very low percentage of specimens might result negative for GDH but positive for toxins.**

**NEGATIVE:** Only one GREEN line appears across the results window in the site marked with the letter C (control line).

**POSITIVE:** In addition to the GREEN control line, a RED line also appears in the site marked with the letter T (test line) in the results window.

The result would be considered as positive independent on the intensity of the RED test line.

---

**INVALID:** Total absence of the control coloured line (GREEN) regardless the appearance or not of the test line (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.

#### **NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS**

The intensity of the red coloured band in the test line (T) in the results window will vary depending on the concentration of antigen presents in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigen can be determined by this qualitative test.

## **IV. Quality control**

#### INTERNAL CONTROL: control line

Internal procedural control is included in the test. A green line appearing in the control line (C) in the results window is an internal control, which confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

For information purposes only

## ANNEX 2

## KIT 20 CARD C. *DIFFICILE* GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN. Catalogue reference: LX862001VFC

Annex for the following reference:

PRODUCT	REFERENCE
<b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials + PC)	LX862001VFC

Table A 2. Reference for kit 20 combo card of CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin with positive control.

### I. Materials

MATERIALS PROVIDED	MATERIALS REQUIRED BUT NO PROVIDED
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (combo card test format)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b></li> <li>-4x <b>Testing tube</b></li> <li>-4x <b>Disposable pipette</b></li> <li>-3x <b>Red cap reagent tube</b></li> <li>-1x <b>Double cap reagent tube</b></li> <li>-1x IFU Instructions for use (including Quick guide use).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposable gloves (other personal protective equipment that will be considered necessary)</li> <li>- Timer</li> <li>- Specimen collection container</li> </ul>

Table A 2.1 Materials necessities for test performance.

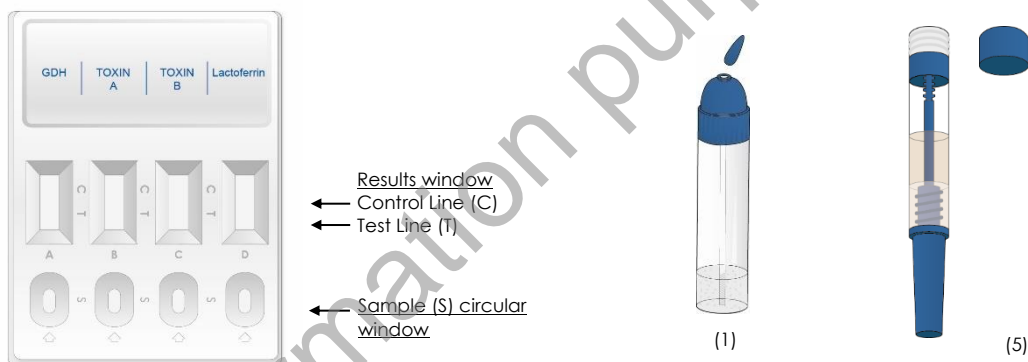


## II. Test procedures (samples)


Follow proper infection control practices. Allow tests and samples to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.

1. Proceed to shake the **stool collection tube** (both types) in order to assure good sample dispersion.
2. Remove **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) from its sealed bag just before using it.
3. Take the **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cut the end of the cap (1) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter A (2), 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter B (3) and 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter C (4). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. Take the **Lactoferrin stool collection tube**, open the cap 2 (5) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter D (6). Avoid adding solid particles with the liquid.
5. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.


If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.



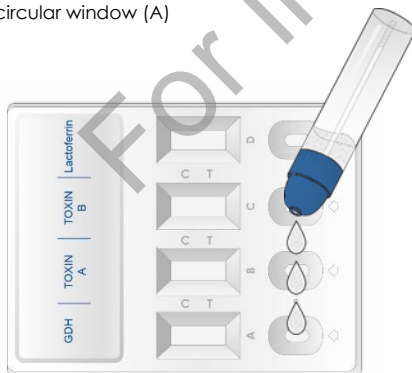
(2) Add 3 drops in the circular window (A)




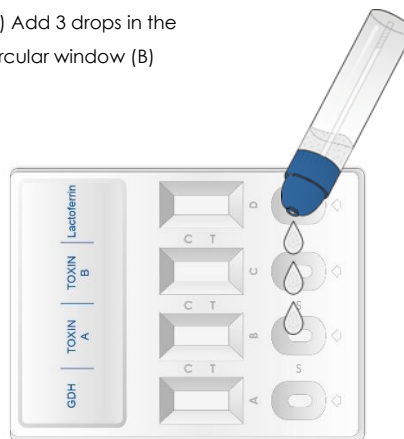(3) Add 3 drops in the circular window (B)



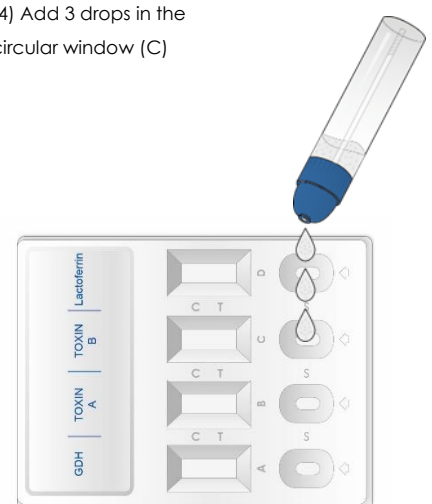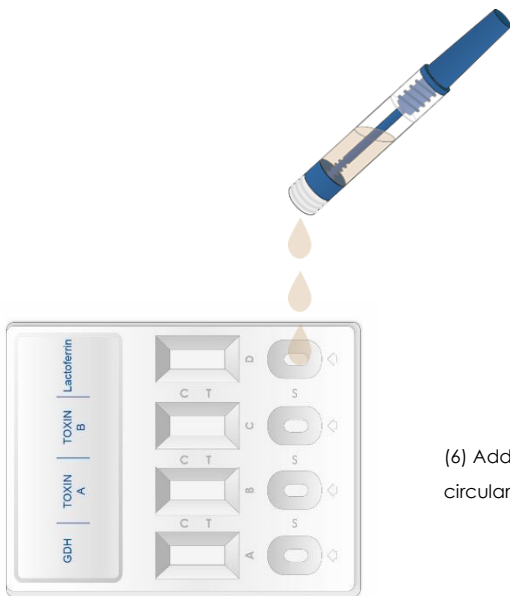(4) Add 3 drops in the circular window (C)





(6) Add 3 drops in the circular window (D)

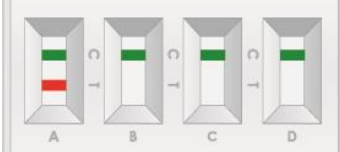
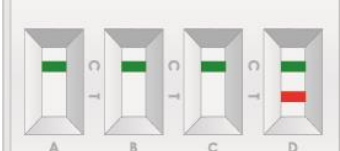
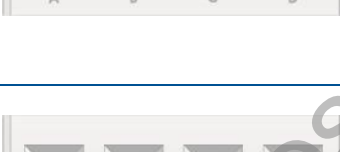
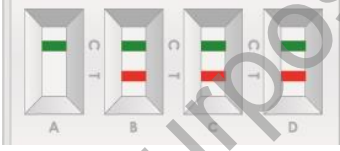



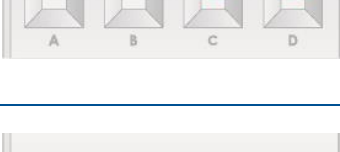
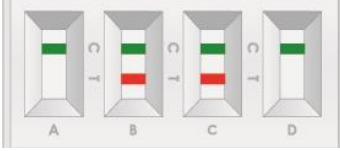
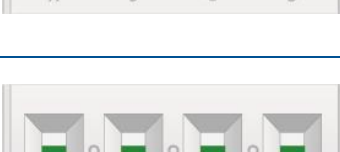



Wait 10 minutes

### III. Interpretation of results

(please, refer to the illustration below)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There are no GDH, Toxin A or Toxin B of <i>C. difficile</i> presence and neither human lactoferrin. No infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>A negative result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN		
2.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There are GDH, Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED		
3.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH, Toxin A and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
4.	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is GDH, Toxin A and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		
5.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is GDH, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		
6.	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin A presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN		
7.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
8.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is GDH and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN-RED		
9.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN		<p>There is GDH presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
10.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is Lactoferrin presence. Possible intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		<p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
11.	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		
12.	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		
13.	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin B and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		
14.	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin A and Toxin B presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		
15.	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin A presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN		

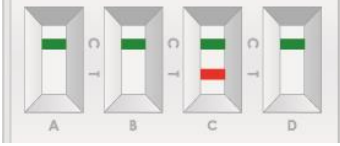
	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
16.	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin B presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
17.	INVALID				<p>Invalid result either A, B, C or D we recommend repeating the assay using the same sample with another test.</p> <p>Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.</p>	
	Any other results					

Table A 2.2 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin performance interpretation of the results.

Whatever results detailed between 11 and 16, are not very common. A very low percentage of specimens might result negative for GDH but positive for toxins.

**NEGATIVE:** Only one GREEN line appears across the results window in the site marked with the letter C (control line).

**POSITIVE:** In addition to the GREEN control line, a RED line also appears in the site marked with the letter T (test line) in the results window.

The result would be considered as positive independent on the intensity of the RED test line.

**INVALID:** Total absence of the control coloured line (GREEN) regardless the appearance or not of the test line (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.

#### NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS

The intensity of the red coloured band in the test line (T) in the results window will vary depending on the concentration of antigen presents in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigen can be determined by this qualitative test.

## IV. Quality control

**CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) presents five controls:

INTERNAL CONTROL: control line

**Internal control:** internal procedural control is included in the test. A green line appearing in the control line (C) in the results window is an internal control, which confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

EXTERNAL CONTROL: POSITIVE CONTROL SWABS

**External control: CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control, CerTest C. difficile Toxin A Positive Control, CerTest C. difficile Toxin B Positive Control and CerTest Lactoferrin Positive Control** (positive control swabs).

#### A. External positive controls

It is recommended to use the same device for both external positive controls.

##### 1. CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control

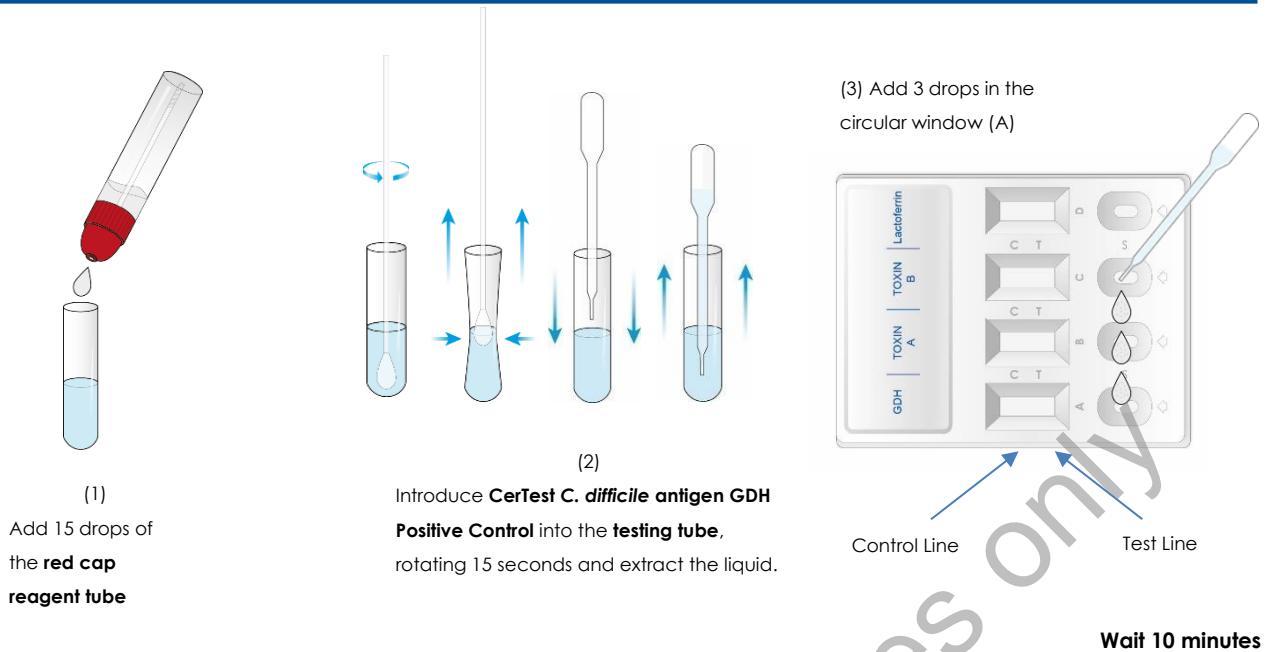
**CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip A). Use **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

##### 1.1. Positive control procedure

**Allow tests and CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from the **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter A (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



## 2. CerTest C. difficile Toxin A Positive Control

**CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip B). Use **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

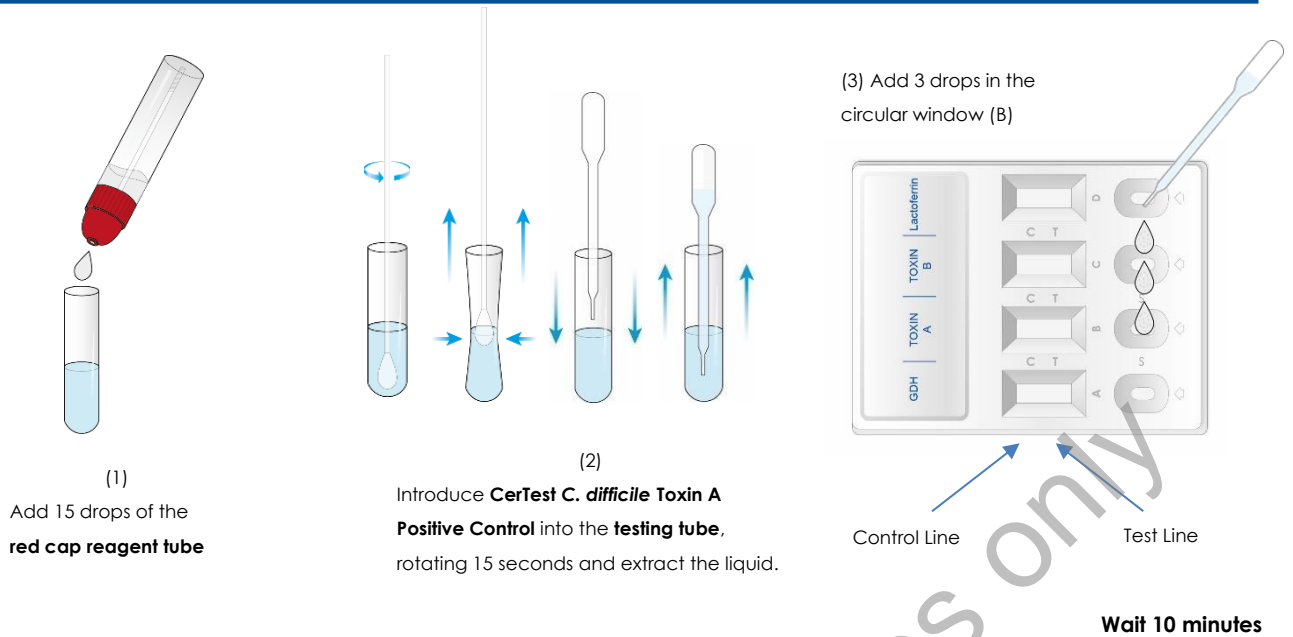
Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

### 2.1. Positive control procedure

**Allow tests and CerTest C. difficile Toxin A Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter B (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.





### 3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control

**CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip C). Use **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

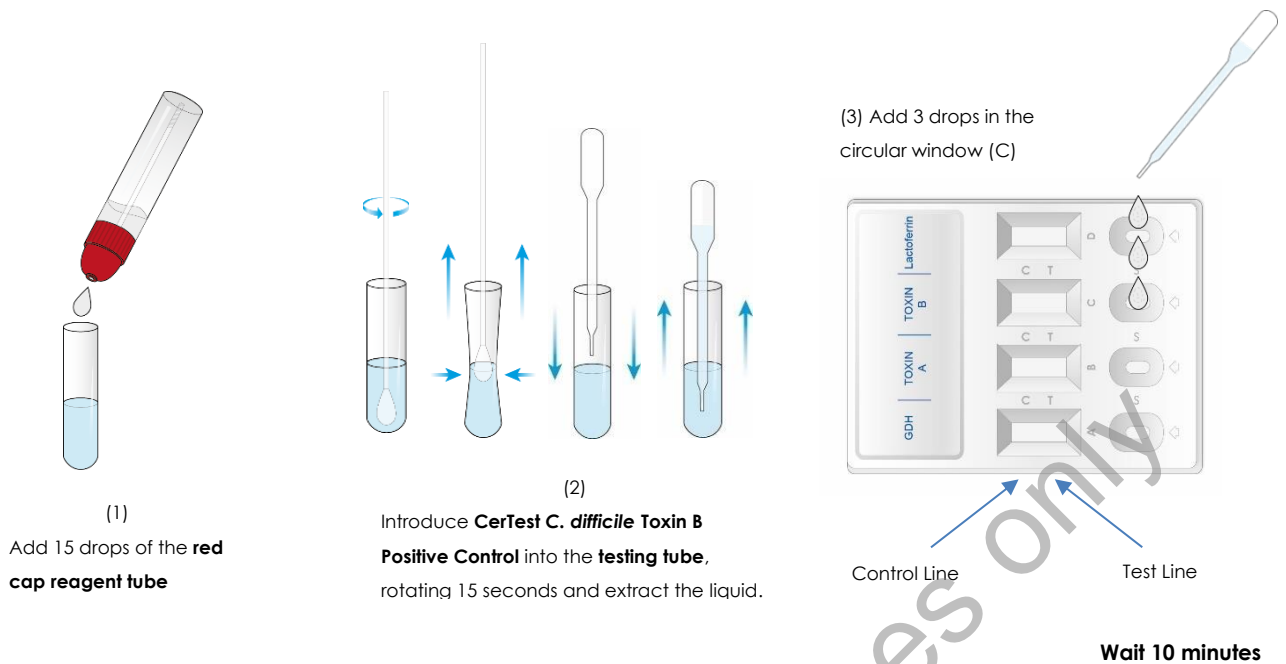
Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

#### 4.1. Positive control procedure

Allow tests and **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from the **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** forcefully against the side of the **Testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter C (3).
6. **Read the results at 10 minutes**. Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.





Positive controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

#### 4. CerTest Lactoferrin Positive Control

**CerTest Lactoferrin Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Strip D)**. Use **CerTest Lactoferrin Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

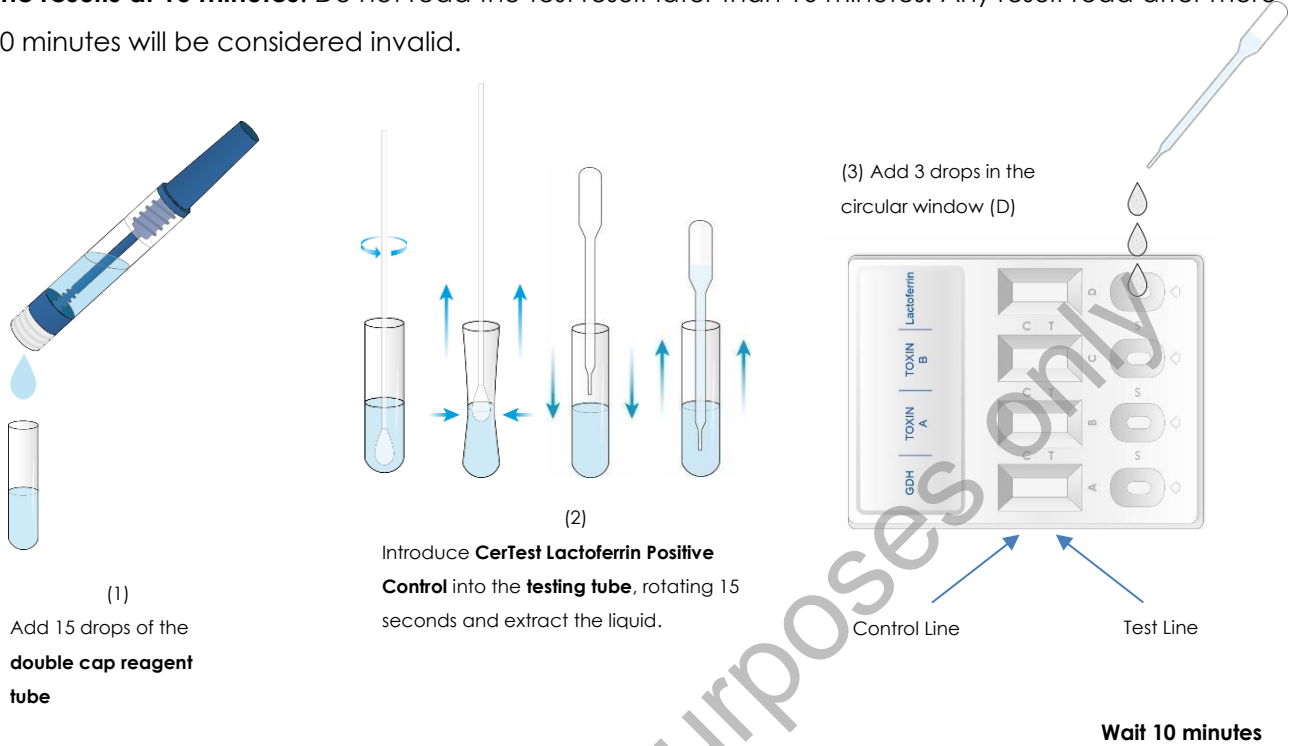
Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest Lactoferrin Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest Lactoferrin Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

##### 4.1. Positive control procedure

**Allow tests and CerTest Lactoferrin Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **double cap reagent tube**, open the cap 2.
2. Add 15 drops (1), from the **double cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce the **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating the **CerTest Lactoferrin Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest Lactoferrin Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as the **CerTest Lactoferrin Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.

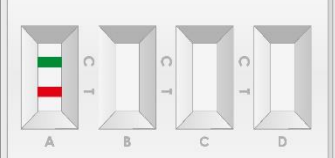
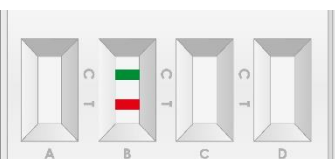

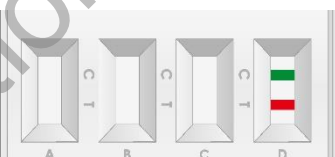
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter D (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



Positive controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

### A.1 Interpretation positive control procedure

	CerTest <i>C. difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest <i>C. difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest <i>C. difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control	Interpretation of the results	
1.	<b>POSITIVE</b> (One device for four positive controls)				A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) in the four strips, in the results window, appear at the same time due to presence of antigens in <b>CerTest <i>C. difficile</i> antigen GDH Positive Control</b> , in strip A, in the <b>CerTest <i>C. difficile</i> Toxin A Positive Control</b> , in strip B, in <b>CerTest <i>C. difficile</i> Toxin B Positive Control</b> , in strip C, and in <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> , in strip D.	
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED		

	CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control	CerTest C. difficile Toxin A Positive Control	CerTest C. difficile Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control		Interpretation of the results
2.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip A due to presence of antigen GDH in <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b> .
	GREEN-RED	-	-	-		
3.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile Toxin A Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip B due to presence of Toxin A in <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b> .
	-	GREEN-RED	-	-		
4.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile Toxin B Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip C due to presence of Toxin A in <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> .
	-	-	GREEN-RED	-		
5.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest Lactoferrin Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip D due to presence of lactoferrin in <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .
	-	-	-	GREEN-RED		
6.	<b>INVALID</b>				<p>Invalid result either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.</p>	<p>Total absence of the control-coloured line (GREEN), regardless the appearance or not of the test line (RED), or only the control (C) coloured line (GREEN). Incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the control with a new test and a new <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b>, <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b>, <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> and <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b>.</p> <p>If the situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.</p>
	Any other result					

CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control		Interpretation of the results
					Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.

Table A 2.3 CerTest C.*difficile* antigen GDH, Toxin A, Toxin B and Lactoferrin Positive Control performance e interpretation of the results.

For information purposes only

## ANNEX 3

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN. Catalogue****reference: LX862001VFCC**

Annex for the following reference:

PRODUCT	REFERENCE
<b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials +PC +NC)	LX862001VFCC

Table A 3. Reference for kit 20 combo card of CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin with positive and negative control.**I. Materials**

MATERIALS PROVIDED	MATERIALS REQUIRED BUT NO PROVIDED
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (combo card test format)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> with diluent</li> <li>- 1x <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest Negative Control</b></li> <li>- 6x <b>Testing tube</b></li> <li>- 6x <b>Disposable pipette</b></li> <li>- 4x <b>Red cap reagent tube</b></li> <li>- 2x <b>Double cap reagent tube</b></li> <li>- 1x IFU Instructions for use (including Quick guide use).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposable gloves (other personal protective equipment that will be considered necessary)</li> <li>- Timer</li> <li>- Specimen collection container</li> </ul>


Table A 3.1 Materials necessities for test performance.

## II. Test procedures (samples)


Follow proper infection control practices. Allow tests and samples to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.

1. Proceed to shake the **stool collection tube** (both types) in order to assure good sample dispersion.
2. Remove **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) from its sealed bag just before using it.
3. Take the **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cut the end of the cap (1) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter A (2), 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter B (3) and 3 drops, using the same tube, in the circular window marked with letter C (4). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. Take the **Lactoferrin stool collection tube**, open the cap 2 (5) and dispense 3 drops in the circular window marked with the letter D (6). Avoid adding solid particles with the liquid.
5. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.

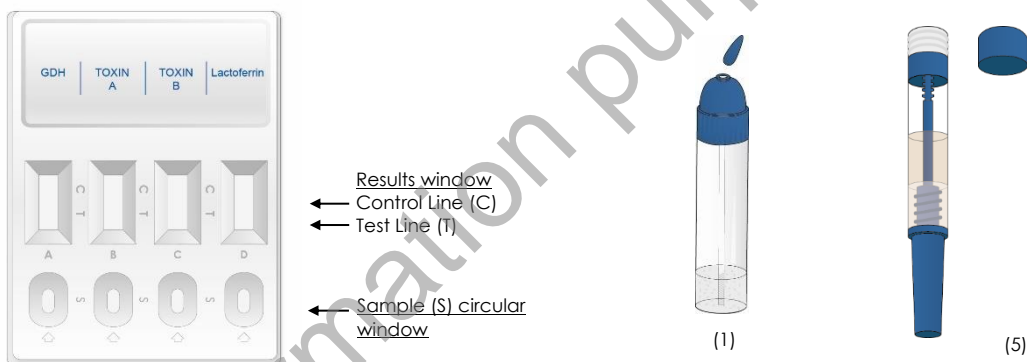
If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.



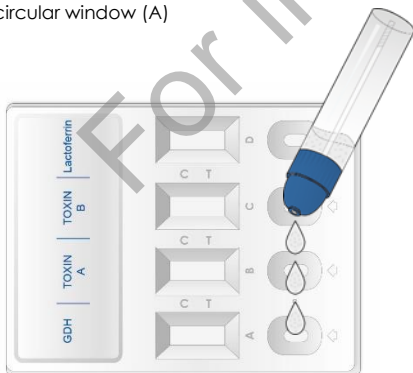
(2) Add 3 drops in the circular window (A)




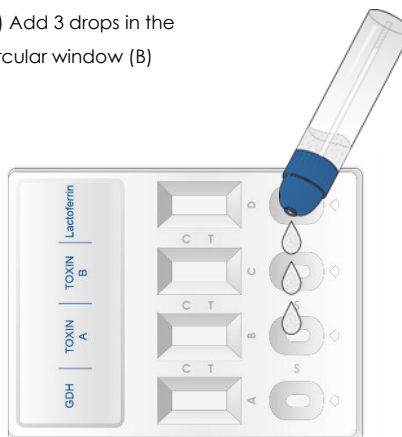(3) Add 3 drops in the circular window (B)



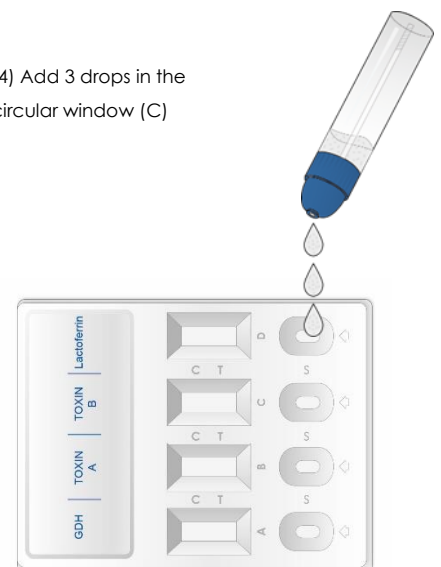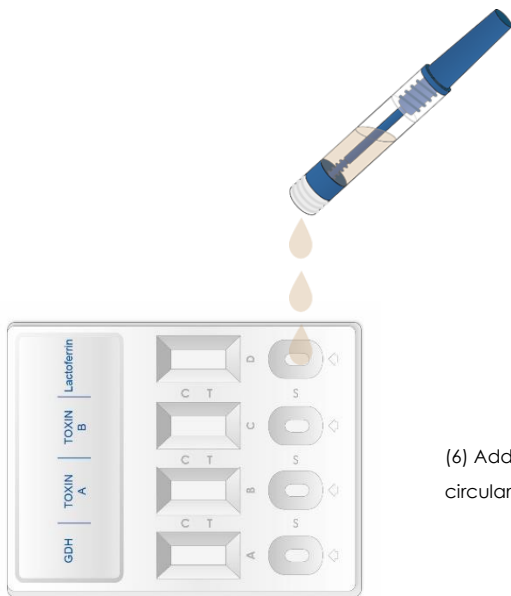(4) Add 3 drops in the circular window (C)










(6) Add 3 drops in the circular window (D)

Wait 10 minutes








### III. Interpretation of results

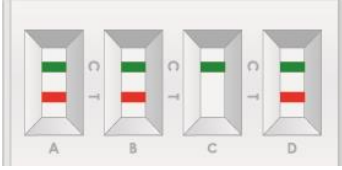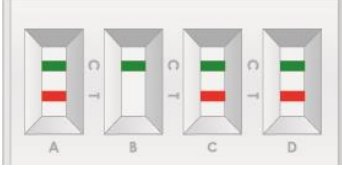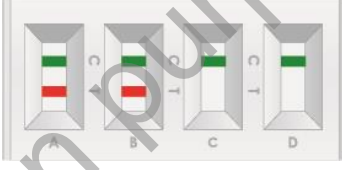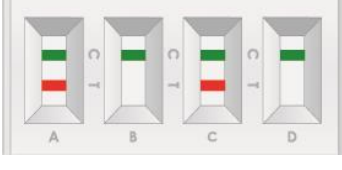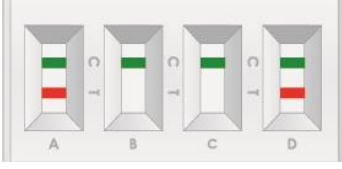(please, refer to the illustration below)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There are no GDH, Toxin A or Toxin B of <i>C. difficile</i> presence and neither human lactoferrin. No infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>A negative result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN		
2.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There are GDH, Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED		
3.	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH, Toxin A and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		
	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
4.	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		<p>There is GDH, Toxin A and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
5.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is GDH, Toxin B and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>, and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		
6.	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin A presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN	GREEN		
7.	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is GDH and Toxin B presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
8.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is GDH and Lactoferrin presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i> and there is an intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN-RED		
9.	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		

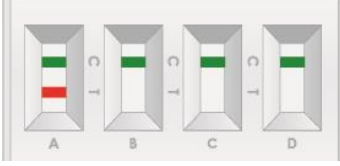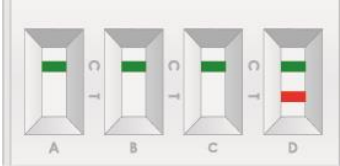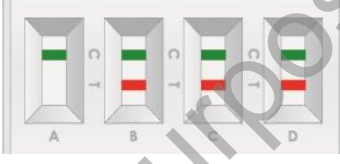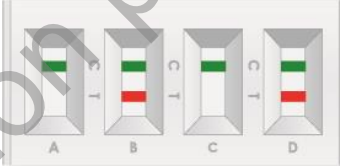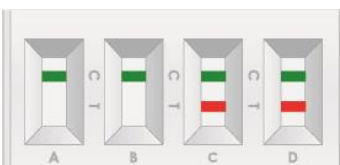

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
	GREEN-RED	GREEN	GREEN	GREEN		<p>There is GDH presence. Possible infection caused by <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
10.	NEGATIVE	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is Lactoferrin presence. Possible intestinal inflammation.</p> <p>The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result.</p> <p>A positive result should be followed up with additional laboratory techniques to confirm the results.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		<p>There is Toxin A, Toxin B and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
11.	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN-RED		<p>There is Toxin A and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
12.	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN-RED		<p>There is Toxin B and Lactoferrin presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
13.	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE		<p>There is Toxin A and Toxin B presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED		<p>There is Toxin A and Toxin B presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
14.	NEGATIVE	POSITIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin A presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN		<p>There is Toxin A presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
15.	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin A presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN-RED	GREEN	GREEN		<p>There is Toxin A presence.</p> <p>If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>

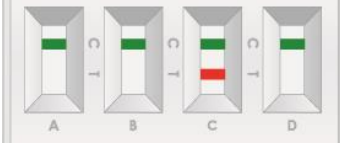
	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
16.	NEGATIVE	NEGATIVE	POSITIVE	NEGATIVE		<p>There is Toxin B presence. If this result appears it must be repeat the test using a fresh sample. If results are again positive for Toxin A and B and negative for GDH, the sample should be considered positive for Toxin A and B.</p>
	GREEN	GREEN	GREEN-RED	GREEN		
17.	INVALID				<p>Invalid result either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.</p> <p>Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.</p>	
	Any other results					

Table A 3.2 CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin performance interpretation of the results.

Whatever results detailed between 11 and 16, are not very common. A very low percentage of specimens might result negative for GDH but positive for toxins.

**NEGATIVE:** Only one GREEN line appears across the results window in the site marked with the letter C (control line).

**POSITIVE:** In addition to the GREEN control line, a RED line also appears in the site marked with the letter T (test line) in the results window.

The result would be considered as positive independent on the intensity of the RED test line.

**INVALID:** Total absence of the control coloured line (GREEN) regardless the appearance or not of the test line (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.

#### NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS

The intensity of the red coloured band in the test line (T) in the results window will vary depending on the concentration of antigen presents in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigen can be determined by this qualitative test.

## IV. Quality control

**CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) presents six controls:

INTERNAL CONTROL: control line

**Internal control:** internal procedural control is included in the test. A green line appearing in the control line (C) in the results window is an internal control, which confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

**EXTERNAL CONTROL: POSITIVE CONTROL SWABS AND NEGATIVE CONTROL SWAB**

**External control: CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control, CerTest C. difficile Toxin A Positive Control, CerTest C. difficile Toxin B Positive Control and CerTest Lactoferrin Positive Control** (positive control swabs).

**External negative control: CerTest Negative Control** (negative control swab)

**A. External positive controls**

It is recommended to use the same device for both external positive controls.

**1. CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**

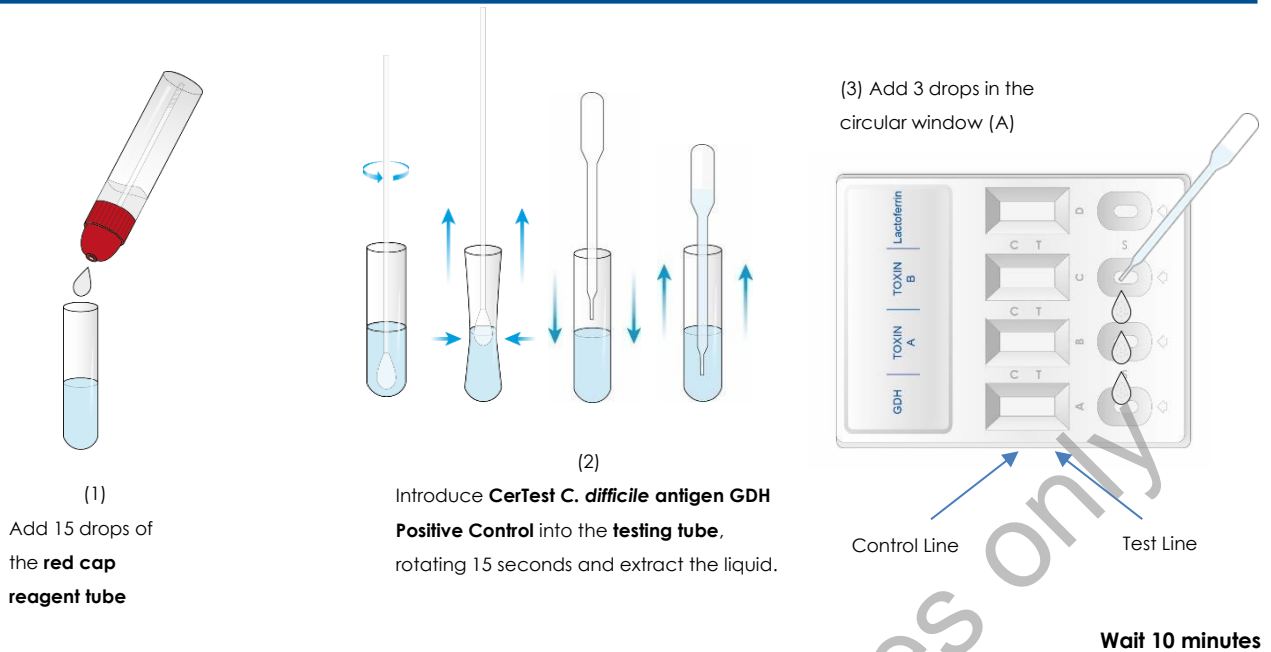
**CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip A). Use **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

**1.1. Positive control procedure**

**Allow tests and CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from the **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter A (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



## 2. CerTest C. difficile Toxin A Positive Control

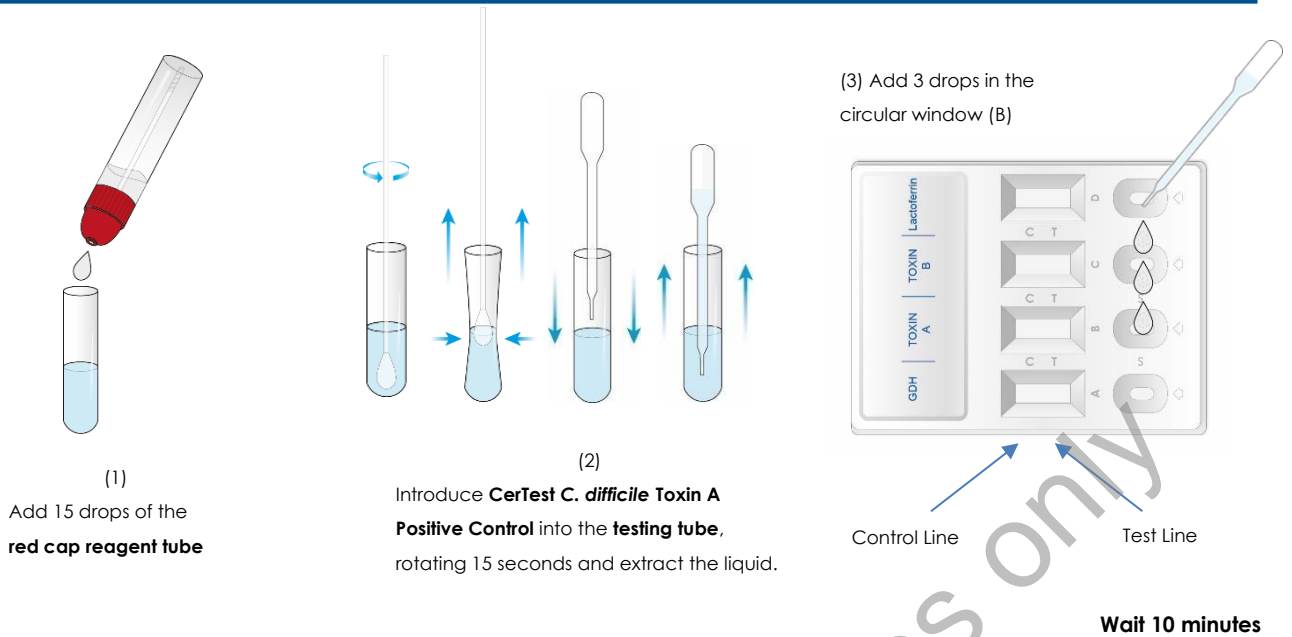
**CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip B). Use **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

### 2.1. Positive control procedure

**Allow tests and CerTest C. difficile Toxin A Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter B (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



### 3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control

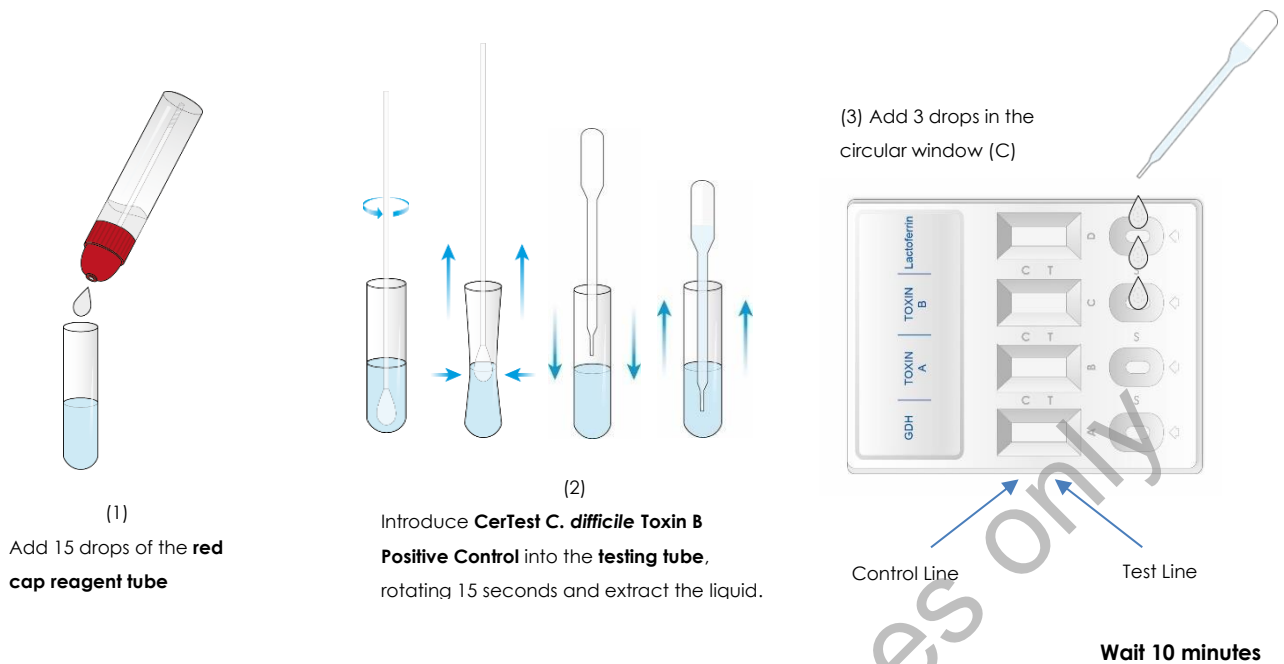
**CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip C). Use **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

#### 4.1. Positive control procedure

Allow tests and **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.

1. Take the **red cap reagent tube**, cut the end of the cap.
2. Add 15 drops (1) from the **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as the **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter C (3).
6. **Read the results at 10 minutes**. Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



Positive controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

#### 4. CerTest Lactoferrin Positive Control

**CerTest Lactoferrin Positive Control** is an external quality control for **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Strip D)**. Use **CerTest Lactoferrin Positive Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

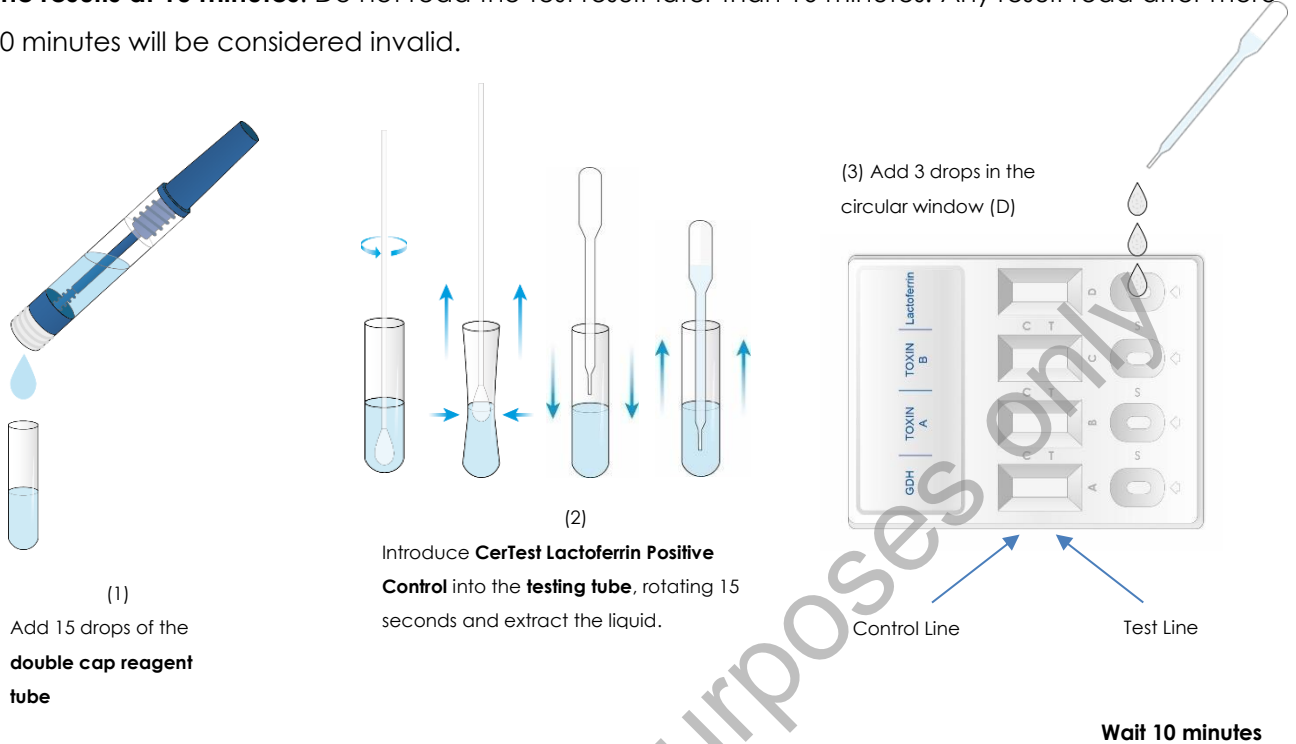
Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest Lactoferrin Positive Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest Lactoferrin Positive Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

##### 4.1. Positive control procedure

**Allow tests and CerTest Lactoferrin Positive Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**

1. Take the **double cap reagent tube**, open the cap 2.
2. Add 15 drops (1), from the **double cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately introduce the **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
3. Mix the solution by rotating the **CerTest Lactoferrin Positive Control** forcefully against the side of the **Testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest Lactoferrin Positive Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as the **CerTest Lactoferrin Positive Control** is withdrawn (2). Discard **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
4. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.

5. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** in the circular window marked with the letter D (3).
6. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.

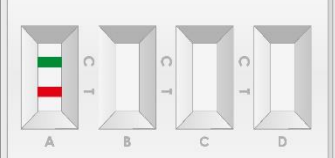
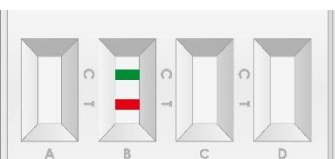

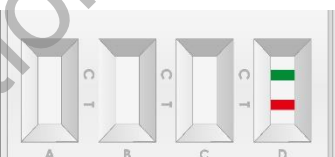
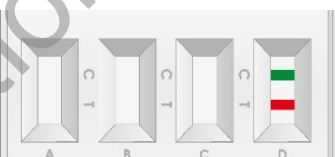


Positive controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

### A.1 Interpretation positive control procedure

	CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control	CerTest C. difficile Toxin A Positive Control	CerTest C. difficile Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control	Interpretation of the results	
1.	<b>POSITIVE</b> (One device for four positive controls)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) in the four strips, in the results window, appear at the same time due to presence of antigens in <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b> , in strip A, in the <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b> , in strip B, in <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> , in strip C, and in <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> , in strip D.
	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED	GREEN-RED		



	CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control	CerTest C. difficile Toxin A Positive Control	CerTest C. difficile Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control		Interpretation of the results
2.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip A due to presence of antigen GDH in <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b> .
	GREEN-RED	-	-	-		
3.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile Toxin A Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip B due to presence of Toxin A in <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b> .
	-	GREEN-RED	-	-		
4.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest C. difficile Toxin B Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip C due to presence of Toxin B in <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b> .
	-	-	GREEN-RED	-		
5.	<b>POSITIVE</b> (One device for CerTest Lactoferrin Positive Control)					A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) appear across the results window in strip D due to presence of lactoferrin in <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .
	-	-	-	GREEN-RED		
6.	<b>INVALID</b>					Total absence of the control-coloured line (GREEN), regardless the appearance or not of the test line (RED), or only the control (C) coloured line (GREEN). Incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the control with a new test and a new <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control, CerTest C. difficile Toxin A Positive Control, CerTest C. difficile Toxin B Positive Control and CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .
	Any other result					



CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control	Interpretation of the results
				Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.

Table A 2.3 CerTest C.*difficile* antigen GDH, Toxin A, Toxin B and Lactoferrin Positive Control performance e interpretation of the results.

## B. External negative control. CerTest Negative Control

**CerTest Negative Control** is an external quality control for **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Strip A, B, C and D). Use **CerTest Negative Control** to check that the extraction reagents and the test are working properly.

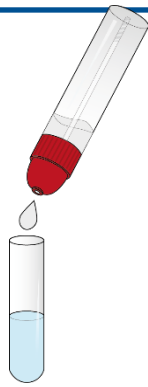
Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C, **CerTest Negative Control** is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. **CerTest Negative Control** must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

### B.1 Negative control procedure

**Allow tests and CerTest Negative Control to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.**


**For GDH, Toxin A and Toxin B:**

1. Add 15 drops (1) of diluent from the **red cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately put **CerTest Negative Control**.
2. Mix the solution by rotating **CerTest Negative Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest Negative Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest Negative Control** is withdrawn (2). Discard the **CerTest Negative Control**.
3. Remove the **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
4. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** into the circular window marked with letter A (3) dispense 3 drops from the **testing tube** into the circular window marked with letter B (4), and dispense 3 drops from the **testing tube** into the circular window marked with letter C (5).
5. **Read the result at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



(1)

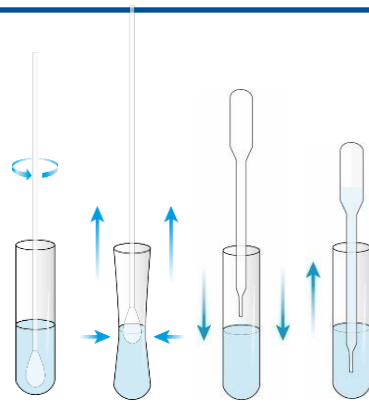
Add 15 drops of **red cap reagent tube**



(2)

Introduce the **CerTest Negative Control** into the **testing tube**, rotating 15 seconds and extract the liquid

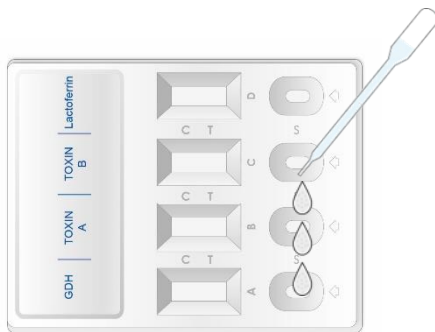
(3) Add 3 drops in the circular window (A)



Control Line

Test Line

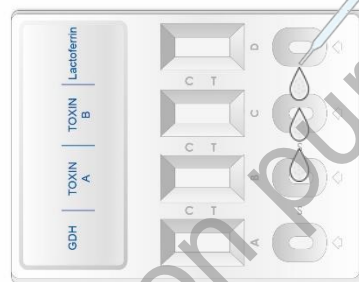
(4) Add 3 drops in the circular window (B)



Control Line

Test Line

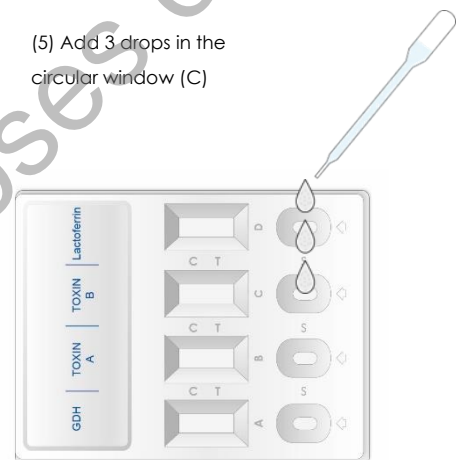(5) Add 3 drops in the circular window (C)



Control Line

Test Line

Wait 10 minutes

### For Lactoferrin:

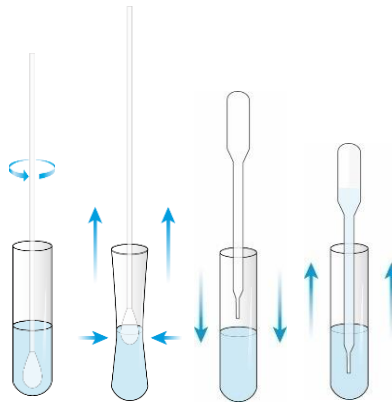
1. Add 15 drops (1) of diluent from the **double cap reagent tube** into the **testing tube** and immediately put **CerTest Negative Control**.
2. Mix the solution by rotating **CerTest Negative Control** forcefully against the side of the **testing tube** at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the **CerTest Negative Control**, squeezing the sides of the **testing tube** as **CerTest Negative Control** is withdrawn (2). Discard the **CerTest Negative Control**.
3. Remove the **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card format) from its sealed bag just before using it.
4. Use a separate **disposable pipette** and test for each control. Dispense 3 drops from the **testing tube** into the circular window marked with letter D (3).

5. **Read the result at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes. Any result read after more than 10 minutes will be considered invalid.



(1)


Add 15 drops of **double cap reagent tube**



(2)

Introduce the **CerTest Negative Control** into the **testing tube**, rotating 15 seconds and extract the liquid

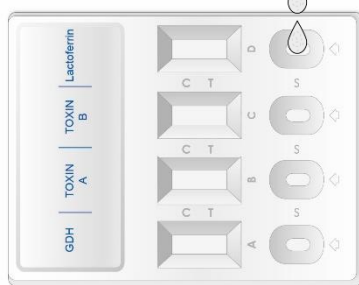(3) Add 3 drops in the circular window (D)



Control Line

Test Line

**Wait 10 minutes**

Negative controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

**B.1.1 Interpretation negative control procedure**

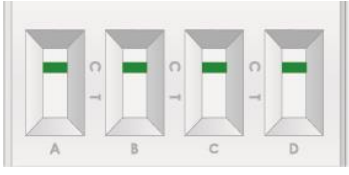
Negative Control			Interpretation of the results
1.	<b>VALID RESULT</b>		Only A GREEN line (control line (C)) appear across the results window during the test performance.
	GREEN (only control band appear)		
2.	<b>INVALID</b>	Invalid result either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.	<p>Total absence of the control-coloured line (GREEN), regardless the appearance or not of the test line (RED), or present of both lines (RED test and GREEN control lines). Incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the control with a new test device and a new <b>CerTest Negative Control</b>.</p> <p>If the situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.</p>
	Any other result		

Table A 3.4 CerTest Negative Control performance interpretation of the results.

For information purposes only

## 2. Uso previsto

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** combo card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de *Clostridium difficile* Glutamato Deshidrogenasa (GDH), Toxina A y Toxina B en muestras humanas de heces, y para la detección semi-cuantitativa de lactoferrina humana (hLf) en muestras de heces.

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Clostridium difficile* y para determinar la actividad inflamatoria intestinal.

## 3. Introducción y explicación

*Clostridium difficile* (*C. difficile*), bacteria anaerobia, Gram-positiva, formadora de esporas, es el principal agente etiológico de la diarrea y de la colitis relacionada con el uso de antibióticos (1).

*C. difficile* es la principal causa de diarrea relacionada con la atención de la salud en países desarrollados y es una fuente importante de morbilidad y mortalidad de enfermedad nosocomial en todo el mundo. Aunque tradicionalmente se consideraba una infección que afectaba a pacientes en centros de salud, en los últimos 10-20 años, la infección por *C. difficile* se identifica cada vez más en la comunidad entre personas sin hospitalizaciones recientes y sin exposición previa a antibióticos (2-4).

La enfermedad causada por *C. difficile* se origina cuando se permite que la bacteria prolifere en el colon, mayoritariamente a causa de una alteración de la microflora intestinal tras un tratamiento con antibióticos. En general, el uso de antibióticos se asocia con un riesgo tres veces mayor de infección por *C. difficile* asociada a la comunidad (CA-CDI). Sin embargo, el riesgo de CA-CDI depende en gran medida de la clase de uso de antibióticos (1,3).

Tras esta colonización, *C. difficile* puede liberar dos toxinas de alto peso molecular, la Toxina A y la Toxina B, siendo ambas responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, que van desde una diarrea acuosa auto-limitante, no grave, hasta una colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico hasta llegar a causar la muerte. *Clostridium difficile* Glutamato Deshidrogenasa (GDH) es una enzima producida en grandes cantidades por cepas toxigénicas y no toxigénicas, lo que la convierte en un excelente marcador para determinar la presencia del microorganismo (2,5).

El uso de un ensayo directo de GDH fecal, junto con una prueba de toxina AB fecal, podría mejorar el diagnóstico de infección por *Clostridium difficile*. Los pacientes con GDH fecal positiva, pero toxina negativa pueden ser monitoreados mientras se espera el resultado de un cultivo toxigénico (CT), que se utiliza como técnica de referencia para determinar la infección por *Clostridium difficile* (5).

La prevención de la infección por *C. difficile* ofrece una mejora potencialmente significativa en los resultados del paciente, así como una reducción de los costes hospitalarios y los gastos de recursos. El uso controlado de antibióticos sigue siendo una importante estrategia de salud pública para reducir los casos de infección por *C. difficile* (1,3).

La lactoferrina es un componente glicoproteico de los gránulos neutrofílicos secundarios, componente primario de la respuesta aguda inflamatoria y es liberada a partir de los leucocitos fecales. Esta proteína es resistente a la proteólisis en las heces y puede servir como marcador de inflamación en el intestino. La causa más frecuente de la presencia de neutrófilos en heces en pacientes con diarrea crónica es la enfermedad crónica inflamatoria intestinal localizada en el colon (como la Enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa).

Se ha estudiado la lactoferrina como marcador de infección por enteropatógenos invasivos en niños con diarrea. La diarrea inflamatoria bacteriana puede ser causada por *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter* y *Clostridium difficile* (6,7).

## 4. Fundamento del test

**CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la detección cualitativa de *Clostridium difficile* Glutamato Deshidrogenasa (GDH), Toxina A, Toxina B y Lactoferrina en muestras humanas de heces procedentes de pacientes sospechosos de infección por *Clostridium difficile*, y de inflamación intestinal.

**Tira A** consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a GDH en la línea de test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a GDH) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

**Tira B** consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Toxina A en la línea de test (T), de la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a Toxina A) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

**Tira C** consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Toxina B en la línea de test (T), de la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de

ratón frente a Toxina B) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

**Tira D** consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a lactoferrina humana en la línea de test (T), de la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a lactoferrina humana) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Si la muestra es GDH positiva, el antígeno de la muestra diluida reacciona con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-GDH-microesferas rojas de látex) en la tira A, si la muestra es Toxina A positiva, los antígenos de la muestra diluida de heces reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-Toxina A-microesferas rojas de látex) en la tira B, si la muestra es Toxina B positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-Toxina B-microesferas rojas de látex) en la tira C, y si la muestra es Lactoferrina positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-lactoferrina humana-microesferas rojas de látex) en la tira D, los cuales fueron secados previamente en el material absorbente. Esta mezcla avanza por capilaridad a través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los anticuerpos anti-GDH presentes en la membrana de la tira A (línea de test), los anticuerpos anti-Toxina A presentes en la membrana de la tira B (línea de test), los anticuerpos anti-Toxina B y los anticuerpos anti-lactoferrina humana presentes en la membrana de la tira C (línea de test) capturarán el complejo coloreado del test y la línea roja aparecerá en las tres tiras. Estas líneas se usarán para interpretación del resultado.

Si la muestra es negativa, no hay presencia de GDH, ni de Toxina A ni de Toxina B ni de lactoferrina humana o los antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y no se produce reacción con ningún complejo coloreado rojo. Los anticuerpos anti-GDH, anti-Toxina A, anti-Toxina B y anti-lactoferrina humana presentes en las membranas (líneas de test) no capturarán el antígeno-complejo coloreado rojo (no formado) y no aparecerán las líneas rojas.

Independientemente de que la muestra sea positiva o no, en las tres tiras, la mezcla continuará moviéndose a través de las membranas hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica localizados en las líneas de control. Estos anticuerpos anti-proteína específica presentes en las tres membranas capturarán el complejo conjugado de control y las líneas de control verdes siempre aparecerán. La aparición de estas líneas se utiliza: 1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como control interno de los reactivos.

## 5. Condiciones de almacenamiento

Los kits deben almacenarse a 2-30°C, en estas condiciones pueden ser usados hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta de kit. Todos los componentes del kit son de un solo uso y deben permanecer en su envase primario hasta ser usados. No congelar.

## 6. Precauciones para el usuario.

- **Solo para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.**
- Leer las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar el kit
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar el kit si la etiqueta que cierra el estuche está dañada o rota.
- No utilizar el producto si el estuche o los sobres de aluminio están abiertos o dañados en el momento que se recibe.
- No utilizar los test (ni controles positivos/negativos si la referencia final los contiene) si el material desecante que se incluye en cada sobre de aluminio no está o está dañado.
- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**. No mezclar o utilizar componentes de otros kits o lotes. No se deben usar con componentes de otros kits comercializados (de otros proveedores).
- Todos los componentes del kit son de un solo uso. No reutilizar.
- Seguir Buenas Prácticas de Laboratorio, llevar ropa de protección adecuada, usar guantes desechables u otros equipos de protección individual como gafas y mascarilla que se consideren necesarios. No comer, ni beber o fumar en la zona de trabajo.
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas, así como los materiales que han estado en contacto con las muestras y deben ser manipuladas de acuerdo con las normas locales o nacionales de seguridad. Deben tratarse de la misma forma que un agente infeccioso. Utilice prácticas adecuadas de control de infecciones al recolectar y manipular las muestras. Estas prácticas deben incluir, pero no se limitan a, equipo de protección personal (EPP), bata de laboratorio, mascarilla quirúrgica u otro tipo de máscara que se considere apropiada, guantes desechables y protección para los ojos. Tome las precauciones necesarias durante la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de muestras. Cada una de las muestras deben de ser correcta e inequívocamente identificadas con el fin de garantizar la correcta trazabilidad de las mismas.
- Un nuevo test deberá utilizarse para cada una de las muestras para evitar errores de contaminación.
- Limpiar los posibles derrames con un desinfectante adecuado.
- Los reactivos contienen conservantes (<0.1% azida de sodio). Debe evitarse cualquier contacto con la piel o las mucosas. De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**. no contiene sustancias y/o mezclas que reúnan los criterios de clasificación de peligrosidad dispuestos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) o que se encuentren en una concentración superior al valor establecido en dicho reglamento para su



declaración. La hoja de datos de seguridad no se incluye con este producto, sin embargo, puede ser consultada bajo petición a CerTest Biotec.

- El certificado de análisis no se incluye con este producto, sin embargo, se puede solicitar a CerTest Biotec en caso de necesidad.
- La presencia de líneas amarillentas en la ventana de resultados (zona línea de control y zona línea de test), antes de utilizar el test, es completamente normal y no supone fallo de funcionalidad del test.
- Interpretación visual de los resultados utilizando líneas de colores, interpretación de resultados debe ser realizada por un usuario profesional sin problemas en la interpretación de colores.
- Los tests (viales, pruebas, control positivo/negativo si los contiene el kit final) deben ser desechados en un contenedor adecuado de bioseguridad después de ser usados. Estos contenedores deben desecharse de acuerdo con las leyes o regulaciones locales o nacionales.

## 7. Recogida de muestras y preparación.

Las muestras deben recogerse en un recipiente limpio y ser procesadas lo antes posible tras su recolección. Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones.

Las muestras pueden conservarse a temperatura ambiente si se van a analizar en el mismo día en el que han sido tomadas. La recomendación es procesarlas inmediatamente tras su recolección.

Si esto no fuera posible, las muestras de heces pueden almacenarse en nevera (2-8°C) como máximo 24 horas. Para la conservación de muestras un tiempo prolongado, como máximo 1 año, deben mantenerse congeladas (-20°C). En este caso, la muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la temperatura ambiente para poder utilizarla en la prueba. Ciclos de congelación y descongelación no son recomendables, por lo que se debe descongelar únicamente la cantidad necesaria de muestra para hacer la prueba. Homogeneizar la muestra vigorosamente antes de su preparación.

**Por favor, observe que hay dos stool collection tubes:**

### a. GDH+Toxin A+Toxin B stool collection tubes

**Preparación de la muestra (ver dibujo):**

1. Abrir el **GDH+Toxin A+B stool collection tube** (1) y con ayuda del palito tomar suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello, se introducirá el palito una sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (2), asegurándose de que, en cada inserción, la hélice del palito se cubra con la muestra para tomar la cantidad adecuada de heces (aprox. 50 mg) y finalmente se introducirá la muestra en el **GDH+Toxin A+B stool collection tube**. Para muestras líquidas, añada aprox. 125 µL en el **GDH+Toxin A+B stool collection tube** utilizando una micropipeta.
2. Cerrar el **GDH+Toxin A+B stool collection tube** con diluyente. Agitarlo para facilitar la dispersión de la muestra (3).

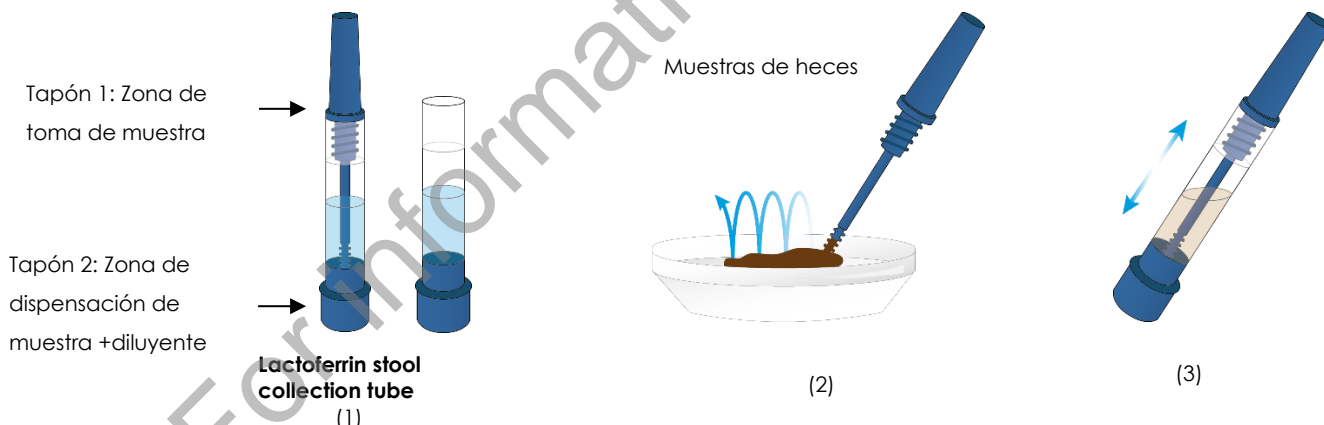


Continuar inmediatamente con el procedimiento del test. Véase en Anexos.

Cada vial de muestra (que contiene la muestra) y carcasa con la que se analizará esa muestra, deben ser perfectamente reconocibles incluyendo la identificación del paciente.

#### b. Lactoferrin stool collection tubes

1. Abrir el tapón (1) del **Lactoferrin stool collection tube** (1) y con ayuda del palito tomar suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello, se introducirá el palito una sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (2), asegurándose de que, en cada inserción, la hélice del palito se cubra con la muestra para tomar la cantidad adecuada de heces (aprox. 20 mg) y finalmente se introducirá la muestra en el **Lactoferrin stool collection tube**. Para muestras líquidas, añada aprox. 20  $\mu$ L en el **Lactoferrin stool collection tube** utilizando una micropipeta.
2. Cerrar el **Lactoferrin stool collection tube** con diluyente. Agitarlo para facilitar la dispersión de la muestra (3).



Continuar inmediatamente con el procedimiento del test. Véase en Anexos.

Cada vial de muestra (que contiene la muestra) y carcasa con la que se analizará esa muestra, deben ser perfectamente reconocibles incluyendo la identificación del paciente.

## 8. Limitaciones del test

- 1) Una vez abierto, el test no debe usarse después de 2 horas.

- 2) Un exceso de muestra de heces puede dar resultados erróneos, dando líneas no muy definidas de color pardo, que no tienen ningún valor diagnóstico. Diluir la muestra con el diluyente y repetir el test.
- 3) La intensidad de la línea del test puede variar desde muy fuerte a alta concentración de antígenos a débil cuando la concentración de antígenos está cerca del valor del límite de detección del test.
- 4) **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** debería utilizarse sólo con muestras de heces humanas. El uso de otras muestras no ha sido determinado. La calidad del test depende de la calidad de la muestra; por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestras fecales.
- 5) Los resultados positivos determinan la presencia de GDH, Toxina A y Toxina B de *Clostridium difficile* y lactoferrina humana en muestras fecales. Un resultado positivo debe ser objeto de seguimiento con técnicas de laboratorio adicionales (cultivo toxigénico) para determinar la cepa. La confirmación de una infección sólo debe ser realizada por un médico después de que todos los hallazgos clínicos y de laboratorio hayan sido evaluados y debe basarse en la correlación de los resultados con otras observaciones clínicas.
- 6) Un resultado negativo no se puede considerar como concluyente, puede darse que la concentración de GDH, Toxina A, Toxina B de *Clostridium difficile* y/o lactoferrina humana en muestras fecales sea inferior al valor del límite de detección. Si los síntomas o la situación persisten, para la determinación de *Clostridium difficile* se debería repetir la prueba con la muestra previamente sometida a enriquecimiento.
- 7) La lactoferrina es un componente de la leche materna, este test dará positivo en lactantes y no debería utilizarse para evaluar neonatos lactantes.
- 8) Las muestras de heces de pacientes que presentan la enfermedad inflamatoria intestinal que normalmente lleva asociada una inflamación neutrofílica del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, deberían dar resultados positivos para lactoferrina fecal.
- 9) Las muestras de heces sanguinolentas contienen componentes que podrían causar reacciones inespecíficas en el test. Toda muestra sanguinolenta cuyo resultado es positivo debe confirmarse con otras técnicas.
- 10) Muestra de heces mucosas podrían provocar reacciones inespecíficas en el test. Toda muestra de heces mucosas cuyo resultado sea positivo debería ser contrastado con otras técnicas diagnósticas para confirmar el resultado.

## 9. Valores esperados

*Clostridium difficile* está asociado con el 95-100% de los casos de colitis pseudomembranosa, con el 60-75% de los casos de colitis asociada a uso de antibióticos y con el 35% de los casos de diarrea asociada a uso de antibióticos. Además, casi 223.900 personas en Estados Unidos requirieron atención hospitalaria por *C. difficile* y al menos 12.800 personas murieron en 2017. Aunque la tasa de prescripción de antibióticos en los Estados Unidos disminuyó de 2011 a 2016, se estima que al menos el 30% de las prescripciones de antibióticos en pacientes externos son innecesarias, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la prescripción en pacientes externos (4,5,8).

Si bien el desarrollo de nuevos tratamientos es una de estas acciones clave, estas inversiones deben ir acompañadas de esfuerzos dedicados a prevenir las infecciones en primer lugar, frenar el desarrollo de la resistencia mediante un mejor uso de los antibióticos y detener la propagación de la resistencia (8).

Algunos estudios establecieron igual o superior a 10 µg hLf/g heces como valor de corte para permitir detectar pacientes adultos con patología inflamatoria gastrointestinal que requerirán para su diagnóstico procedimientos diagnósticos invasivos adicionales(6).

## 10. Características del test

### A. Sensibilidad analítica (límite de detección)

El límite de detección de **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B** es 0.39 ng/mL del antígeno de *Clostridium difficile* GDH, 2 ng/mL de Toxina A de *Clostridium difficile*, 3.12 ng/mL de Toxina B de *Clostridium difficile* y 100 ng/mL (10 µg hLf/ g heces) de lactoferrina humana.

No existe ningún estándar externo aprobado como estándar general y de referencia. El estándar interno utilizado para la validación de este producto CerTest es una proteína recombinante purificada de *Clostridium difficile* GDH y Toxina A y Toxina B purificada de *Clostridium difficile*, y de lactoferrina humana.

### B. Sensibilidad y especificidad clínica

#### B.1 Sensibilidad y especificidad clínica- GDH+Toxin A+Toxin B

Una evaluación retrospectiva externa (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza) con muestras de heces congeladas se llevó a cabo comparando **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** frente a otro test inmunocromatográfico. Resultados discordantes entre los test fueron analizados mediante qPCR. Este es el criterio de evaluación. Los resultados se muestran a continuación:

#### Para tira A: Clostridium difficile antigen GDH

		Criterio de evaluación (GDH)		
		+	-	Total
IC test: CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH)	+	86	1	87
	-	3	160	163
	Total	89	161	250

Tabla 1 Desempeño de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH) frente al criterio de evaluación.

CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH) vs criterio de evaluación		
	Valor medio	95% intervalo de confianza
Sensibilidad	96.6%	90.5-99.3%
Especificidad	99.4%	96.6-100.0%
VPP	98.9%	93.8-100.0%
VPN	98.2%	94.7-99.6%

Tabla 2 Resultados clínicos de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH).

**Para tira B: Clostridium difficile Toxina A**

IC test:	Criterio de evaluación (Toxina A)			Total
		+	-	
CerTest C. difficile				
GDH+Toxin	+	51	0	51
A+B+Lactoferrin	-	1	198	199
(Toxina A)	Total	52	198	250

Tabla 3 Desempeño de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina A) frente al criterio de evaluación.

CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina A) vs Criterio de evaluación		
	Valor medio	95% intervalo de confianza
Sensibilidad	98.1%	89.7-100.0%
Especificidad	100.0%	98.2-100.0%
VPP	100.0%	93.0-100.0%
VPN	99.5%	97.2-100.0%

Tabla 4 Resultados clínicos de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B (Toxina A).

**Para tira C: Clostridium difficile Toxin B**

IC test:	Criterio de evaluación (Toxina B)			Total
		+	-	
CerTest C. difficile				
GDH+Toxin	+	40	0	40
A+B+Lactoferrin	-	4	206	210
(Toxina B)	Total	44	206	250

Tabla 5 Desempeño de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina B) frente al criterio de evaluación.

CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina B) vs Criterio de evaluación		
	Valor medio	95% intervalo de confianza
Sensibilidad	90.9%	78.3-97.5%
Especificidad	100.0%	98.2-100.0%
VPP	100.0%	91.2-100.0%
VPN	98.1%	95.2-99.5%

Tabla 6 Resultados clínicos de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina B).

**B.2 Sensibilidad y especificidad clínica- Lactoferrin**

Una evaluación retrospectiva externa (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza) con muestras de heces congeladas se llevó a cabo comparando **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** frente a un test ELISA. La técnica ELISA se considera la técnica gold-standard. Este es el criterio de evaluación. Los resultados se muestran a continuación:

**Para tira D: Lactoferrin****Datos para el valor de cut-off 10µg hLf/g**

		Evaluation criteria (Toxin B)		
IC test:		+	-	Total
CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin)	+	27	13	40
	-	3	47	50
	Total	30	60	90

Table 7 Desempeño de *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin) frente al criterio de evaluación.

CerTest <i>C. difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin) vs Evaluation criteria		
	Mean Value	95% confidence interval
Sensitivity	90.0%	73.5-97.9%
Specificity	78.3%	65.8-87.9%
PPV	67.5%	50.9-81.4%
NPV	94.0%	83.5-98.7%

Table 8 Resultados clínicos de CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Lactoferrin).

Especificidad para un valor de cut-off de 2.5 µg hLf/g: 100.0% (valor medio); 83.9-100.0% (95% intervalo de confianza).

Esta evaluación retrospectiva externa más reciente (con muestras de heces congeladas) mostró los siguientes resultados:

- ***Clostridium difficile* antigen GDH:** Sensibilidad 96.6%, (95% intervalo de confianza: 90.5-99.3%) y especificidad 99.4% (95% intervalo de confianza: 96.6-100.0%).
- **Toxina A:** Sensibilidad 98.1%, (95% intervalo de confianza: 89.7-100.0%) y especificidad 100.0% (95% intervalo de confianza: 98.2-100.0%).
- **Toxina B:** Sensibilidad 90.9%, (95% intervalo de confianza: 78.3-97.5%) y especificidad 100.0% (95% intervalo de confianza: 98.2-100.0%).
- **Lactoferrina humana:** Sensibilidad 90.0%, (95% intervalo de confianza: 73.5-97.9%) y especificidad 78.3% (95% intervalo de confianza: 65.8-87.9%).

Los resultados mostraron una alta sensibilidad y especificidad para detectar *Clostridium difficile* antigen GDH, Toxina A, Toxina B y/o lactoferrina humana utilizando **CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**.

#### **Para tira A: *Clostridium difficile* antigen GDH**

Ref.	Localización	Tipo de muestra	Referencia	Diana
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) Abril-Mayo 2021	Muestras de heces humanas	(17.1.1)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) Abril-Junio 2017	Muestras de heces humanas	(17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
3	Louvain, (France) Enero- Diciembre 2016	Muestras de heces humanas	(17.1.3)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH
4	ECCMID Abril 2016, Amsterdam	Muestras de heces humanas	(17.1.4)	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH

Tabla 9 Resumen evaluaciones clínicas. Localización, tipo de muestra, diana.

No	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (%)	Spec. (%) CI (%)	VPP (%) CI (%)	VPN (%) CI (%)
1	86	1	3	160	250	<b>96.6</b> (90.5-99.3)	<b>99.4</b> (96.6-100.0)	<b>98.9</b> (93.8-100.0)	<b>98.2</b> (94.7-99.6)
2	51	0	0	75	126	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>100.0</b> (95.2-100.0)	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>100.0</b> (95.2-100.0)
3	130	8	8	332	478	<b>94.2</b> (88.9-97.5)	<b>97.6</b> (95.4-99.0)	<b>94.2</b> (88.9-97.5)	<b>97.6</b> (95.4-99.0)
4	27	8	6	117	158	<b>81.8</b> (64.5-93.0)	<b>93.6</b> (87.8-97.2)	<b>77.1</b> (59.9-89.6)	<b>95.1</b> (89.7-98.2)
<b>Total</b>	294	17	17	684	<b>1012</b>	<b>94.5</b> (91.4-96.8)	<b>97.6</b> (96.1-98.6)	<b>94.5</b> (91.4-96.8)	<b>97.6</b> (96.1-98.6)

Tabla 10 Evaluaciones clínicas y resultados globales. Valores de verdadero positivo (TP), de falso positivo (FP), falso negativo (FN) y número total de muestras (N). Sensibilidad (Sens), especificidad (Spec), valor predictivo positivo (PPV), valor predictivo negativo (NPV), 95% intervalo de confianza (CI) de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (GDH).

### Para tira B: *Clostridium difficile* Toxina A

Ref.	Localización	Tipo de muestra	Referencia	Diana
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-June 2017	Muestras de heces humanas	(17.1.1)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) April-May 2021	Muestras de heces humanas	(17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A

Tabla 11 Resumen evaluaciones clínicas. Localización, tipo de muestra, diana.

Ref.	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (%)	Spec. (%) CI (%)	PPV (%) CI (%)	NPV (%) CI (%)
1	28	0	1	97	126	<b>96.9</b> (92.2-99.9)	<b>100.0</b> (96.2-100.0)	<b>100.0</b> (87.7-100.0)	<b>99.0</b> (94.4-100.0)
2	51	0	1	198	250	<b>98.1</b> (89.7-100.0)	<b>100.0</b> (98.2-100.0)	<b>100.0</b> (93.0-100.0)	<b>99.5</b> (97.2-100.0)
<b>Total</b>	79	0	2	295	<b>376</b>	<b>97.5</b> (91.4-99.7)	<b>100.0</b> (98.8-100.0)	<b>100.0</b> (95.4-100.0)	<b>99.3</b> (97.6-99.9)

Tabla 12 Evaluaciones clínicas y resultados globales. Valores de verdadero positivo (TP), de falso positivo (FP), falso negativo (FN) y número total de muestras (N). Sensibilidad (Sens), especificidad (Spec), valor predictivo positivo (PPV), valor predictivo negativo (NPV), 95% intervalo de confianza (CI) de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina A).

### Para tira C: *Clostridium difficile* Toxina B

Ref.	Localización	Tipo de muestra	Referencia	Diana
1	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) Abril-Junio 2017	Muestras de heces humanas	(17.1.1)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B
2	Hospital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza, Spain) Abril-Mayo 2021	Muestras de heces humanas	(17.1.2)	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B

Tabla 13 Resumen evaluaciones clínicas. Localización, tipo de muestra, diana.

Ref.	TP	FP	FN	TN	N	Sens. (%) CI (95%)	Spec. (%) CI (%)	PPV (%) CI (%)	NPV (%) CI (%)
1	36	1	0	89	126	100.0 (90.3-100.0)	98.9 (94.0-100.0)	97.3 (85.8-99.9)	100.0 (95.9-100.0)
2	40	0	4	206	250	90.9 (78.3-97.5)	100.0 (98.2-100.0)	100.0 (91.2-100.0)	98.1 (95.2-99.5)
<b>Total</b>	76	1	4	295	<b>376</b>	<b>95.0</b> (87.7-98.6)	<b>99.7</b> (98.1-100.0)	<b>98.7</b> (93.0-100.0)	<b>98.7</b> (96.6-99.6)

Tabla 14 Evaluaciones clínicas y resultados globales. Valores de verdadero positivo (TP), de falso positivo (FP), falso negativo (FN) y número total de muestras (N). Sensibilidad (Sens), especificidad (Spec), valor predictivo positivo (PPV), valor predictivo negativo (NPV), 95% intervalo de confianza (CI) de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin (Toxina B).

### C. Efecto Hook

**CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** test no mostró efecto Hook inhibitorio a concentraciones mayores de 10<sup>5</sup>xLoD para *Clostridium difficile* antigen GDH, ni a concentraciones mayores a 10<sup>2</sup>xLoD para *C.difficile* Toxina A, ni a concentraciones mayores a 10<sup>4</sup>xLoD para *C.difficile* Toxina B, ni a concentraciones mayores a 10<sup>3</sup>xLoD para lactoferrina humana.

### D. Reacciones cruzadas

Se llevó a cabo una evaluación para determinar posibles reacciones cruzadas de **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**; no se detectó reacción cruzada con organismos, patógenos, sustancias que podrían causar infecciones:

#### Para tira A: *Clostridium difficile* antigen GDH

Reacciones cruzadas										
Virus	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
Bacteria	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Clostridium Haemolyticum</i>	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Clostridium Novyi</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:3	-
	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A	-	<i>Clostridium Tetani</i>	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:9	-
	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B	-	<i>Clostridium Septicum</i>	-	<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-		
	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:157	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-		
	<i>Clostridium bifermentans</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:026	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-		
	<i>Clostridium Butyricum</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:111	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-		
Parásitos	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-				
Others	Hemoglobina porcina	-	Hemoglobina bovina	-	Lactoferrina bovina	-	Transferrina bovina	-		

Tabla 15. Resultados reacciones cruzadas (GDH).

Una prueba de especificidad para **CerTest *Clostridium difficile* antigen GDH**, concluyó que el test podría detectar los siguientes antígenos: *C. sporogenes* (CECT 485) y *C. botulinum* (CECT 551).



En este ensayo de especificidad, se evaluó *Clostridium sordellii* (ATCC 9714) y no se encontró reactividad cruzada. En algunos estudios de intercomparaciones, **CerTest Clostridium difficile antigen GDH** tiene una señal positiva con este patógeno, pero no se pudo establecer la naturaleza de este resultado positivo.

### Para tira B: Clostridium difficile Toxin A

Reacciones cruzadas										
Virus	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
Bacteria	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:157	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:026	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	Clostridium difficile antigen GDH	-	<i>Escherichia coli</i> O:111	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:3	-
	Clostridium difficile Toxin B	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:9	-
	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-		
Parásitos	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Entamoeba dispar</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-		
Otros	Hemoglobina porcina	-	Hemoglobina bovina	-		-		-		

Tabla 16. Resultados reacciones cruzadas (Toxina A).

### Para tira C: Clostridium difficile Toxin B

Reacciones cruzadas										
Virus	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
Bacteria	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:157	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:026	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	Clostridium difficile antigen GDH	-	<i>Escherichia coli</i> O:111	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:3	-
	Clostridium difficile Toxin A	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:9	-
	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-		
Parásitos	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Entamoeba dispar</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-		
Otros	Hemoglobina porcina	-	Hemoglobina bovina	-		-		-		

Tabla 17. Resultados reacciones cruzadas (Toxina B).

**Para tira D: Lactoferrina humana**

Reacciones cruzadas										
Virus	Adenovirus	-	Coronavirus	-	Influenza B	-	Norovirus GII	-	Rotavirus	-
	Astrovirus	-	Influenza A	-	Norovirus GI	-	Respiratory Syncytial Virus	-		
Bacteria	<i>Campylobacter coli</i>	-	<i>Clostridium perfringens</i>	-	<i>Legionella pneumophila</i>	-	<i>Salmonella typhimurium</i>	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	-
	<i>Campylobacter jejuni</i>	-	<i>Escherichia coli</i> O:157	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	-	<i>Shigella boydii</i>	-	<i>Streptococcus pneumococcal</i>	-
	<i>Clostridium difficile</i> antigen GDH	-	<i>Escherichia coli</i> O:026	-	<i>Salmonella enteritidis</i>	-	<i>Shigella dysenteriae</i>	-	<i>Streptococcus pyogenes</i>	-
	<i>Clostridium difficile</i> Toxin A	-	<i>Escherichia coli</i> O:111	-	<i>Salmonella paratyphi</i>	-	<i>Shigella flexneri</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:3	-
	<i>Clostridium difficile</i> Toxin B	-	<i>Helicobacter pylori</i>	-	<i>Salmonella typhi</i>	-	<i>Shigella sonnei</i>	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> O:9	-
Parásitos	<i>Cryptosporidium Parvum</i>	-	<i>Entamoeba histolytica</i>	-	<i>Entamoeba dispar</i>	-	<i>Giardia lamblia</i>	-		
Otros	Hemoglobina porcina	-	Hemoglobina bovina	-	Lactoferrina bovina	-	Transferrina bovina	-		

Table 18 Resultados reacciones cruzadas (Lactoferrina).

**E. Interferencias**

Se llevó a cabo una evaluación para determinar posibles interferencias de **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin**; no se detectó interferencia con ninguna de las sustancias probadas:

**Para la tira A: Clostridium difficile antigen GDH**

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
Exógenos	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interferencia	Loperamide hydrochloride (Fortasec)	0.15 mg/mL	No interferencia
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interferencia	Heparin (Hibor)	350.0 IU/mL	No interferencia
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interferencia	Almagato (Almax)	3.0 mg/mL	No interferencia
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Fosfamicin (Monurol)	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interferencia	Acetylcysteine (Fluimucil)	3.0 mg/mL	No interferencia
	Codeine (Toseina)	0.2 mg/mL	No interferencia	Dexketoprofen trometamol (Enantyum)	0.3 mg/mL	No interferencia
	Benzocaine (Angileptol)	0.3 mg/mL	No interferencia	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Cloperastine (Flutox)	0.3 mg/mL	No interferencia	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interferencia
	Carbocisteine (Iniston mucolítico)	3.0 mg/mL	No interferencia	Rifampicin (Rifaldin)	0.3 mg/mL	No interferencia
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interferencia

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
	Dexchloropheniramine (Polaramine)	0.3 mg/mL	No interferencia	Ambroxol hydrochloride (Mucosan)	0.3 mg/mL	No interferencia
	Ebastine (Ebastel)	3.0 mg/mL	No interferencia	Macrogol 3350 (Movicol)	3.0 mg/mL	No interferencia
	Acetyl Salicylic (Adiro)	0.3 mg/mL	No interferencia	Lysine Carbocysteinate (Pectox)	3.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	Ibuprofen (Espidifen)	3.0 mg/mL	No interferencia	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interferencia
	Paracetamol (Dolocatil)	5.0 mg/mL	No interferencia	Lorazepam	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia
	Metamizole (Nolotil)	5.0 mg/mL	No interferencia	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interferencia	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interferencia
	Omeprazole	2.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia	Biotine	0.10 mg/mL	No interferencia
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interferencia	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Spray (Cromolyn)	4 mg/mL	No interferencia	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interferencia
	Afrin (Oxymetazoline)	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia	Mupirocin	2.5·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Drops (Phenylephrine)	10.0 mg/mL	No interferencia	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	ZICAM	1.0 mg/mL	No interferencia	Homeopathic	DIL 1/10	No interferencia
	Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interferencia			
<b>Endógenos</b>	Hemoglobina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Lactoferrin humana	5.0 µg/mL	No interferencia
	Transferrina humana	0.5 µg/mL	No interferencia	Mucina	0.5 %	No interferencia
	Calprotectina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Sangre humana	5.0 %	No interferencia

Tabla 19 Resultados de interferencias de *Clostridium difficile* antigen GDH.**Para la tira B: *Clostridium difficile* Toxina A**

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
<b>Exógenos</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interferencia	Loperamide hydrochloride (Fortasec)	0.15 mg/mL	No interferencia
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interferencia	Heparin (Hibor)	350.0 IU/mL	No interferencia
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interferencia	Almagato (Almax)	3.0 mg/mL	No interferencia
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Fosfamicin (Monurol)	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interferencia	Acetylcysteine (Fluimucil)	3.0 mg/mL	No interferencia

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
	Codeine (Toseina)	0.2 mg/mL	No interferencia	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ciprofloxacina	0.3 mg/mL	No interferencia
	Carbocisteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interferencia
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Acetyl Salicylic ( <i>Adiro</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	3.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interferencia
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Lorazepam	3.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interferencia	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interferencia
	Omeprazole	2.0·10 <sup>-3</sup> mg/mL	No interferencia	Biotine	0.10 mg/mL	No interferencia
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interferencia	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interferencia	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interferencia
	Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia	Mupirocin	2.5·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Drops ( <i>Phenylephrine</i> )	10.0 mg/mL	No interferencia	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	ZICAM	1.0 mg/mL	No interferencia	Homeopathic	DIL 1/10	No interferencia
	Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interferencia			
<b>Endógenos</b>	Hemoglobina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Lactoferrin humana	5.0 µg/mL	No interferencia
	Transferrina humana	0.5 µg/mL	No interferencia	Mucina	0.5 %	No interferencia
	Calprotectina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Sangre humana	5.0 %	No interferencia

Tabla 20 Resultados de interferencias de *Clostridium difficile* Toxina A.**For Strip C: *Clostridium difficile* Toxin B**

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
<b>Exógenos</b>	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interferencia	Loperamide hydrochloride ( <i>Fortasec</i> )	0.15 mg/mL	No interferencia
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interferencia	Heparin ( <i>Hibor</i> )	350.0 IU/mL	No interferencia
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interferencia	Almagato ( <i>Almax</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Fosfamycin ( <i>Monurof</i> )	$3.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interferencia	Acetylcysteine ( <i>Fluimucil</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Codeine ( <i>Toseina</i> )	0.2 mg/mL	No interferencia	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interferencia
	Carbocysteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interferencia
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Acetyl Salicylic ( <i>Adiro</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	$3.0 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interferencia
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Lorazepam	$3.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interferencia	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interferencia
	Omeprazole	$2.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia	Biotine	0.10 mg/mL	No interferencia
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interferencia	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interferencia	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interferencia
Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	$5.0 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia	Mupirocin	$2.5 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia	
CVS Nasal Drops ( <i>Phenylephrine</i> )	10.0 mg/mL	No interferencia	Fluticasone Propionate	$5.0 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia	
ZICAM	1.0 mg/mL	No interferencia	Homeopathic	DIL 1/10	No interferencia	
Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interferencia				
<b>Endógenos</b>	Hemoglobina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Lactoferrin humana	5.0 µg/mL	No interferencia

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
	Transferrina humana	0.5 µg/mL	No interferencia	Mucina	0.5 %	No interferencia
	Calprotectina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Sangre humana	5.0 %	No interferencia

Tabla 21 Resultados de interferencias de *Clostridium difficile* Toxina B.**Para tira D: Lactoferrina humana**

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
Exógenos	Metronidazole	3.0 mg/mL	No interferencia	Loperamide hydrochloride ( <i>Fortasec</i> )	0.15 mg/mL	No interferencia
	Ampicillin	3.0 mg/mL	No interferencia	Heparin ( <i>Hibor</i> )	350.0 IU/mL	No interferencia
	Oseltamivir	0.3 mg/mL	No interferencia	Almagato ( <i>Almax</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Amantadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Fosfamicin ( <i>Monurol</i> )	$3.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia
	Ribavirin	3.0 mg/mL	No interferencia	Acetylcysteine ( <i>Fluimucil</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Codeine ( <i>Toseina</i> )	0.2 mg/mL	No interferencia	Dexketoprofen trometamol ( <i>Enantyum</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Benzocaine ( <i>Angileptol</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Levofloxacin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Cloperastine ( <i>Flutox</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ciprofloxacin	0.3 mg/mL	No interferencia
	Carbocisteine ( <i>Iniston mucolítico</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Rifampicin ( <i>Rifaldin</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Loratadine	0.3 mg/mL	No interferencia	Phenoxymethylpenicillin potassium	3.0 mg/mL	No interferencia
	Dexchlorpheniramine ( <i>Polaramine</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Ambroxol hydrochloride ( <i>Mucosan</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia
	Ebastine ( <i>Ebastel</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Macrogol 3350 ( <i>Movicol</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia
	Acetyl Salicylic ( <i>Adira</i> )	0.3 mg/mL	No interferencia	Lysine Carbocysteinate ( <i>Pectox</i> )	$3.0 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia
	Ibuprofen ( <i>Espidifen</i> )	3.0 mg/mL	No interferencia	Hydroxyzine dihydrochloride	0.3 mg/mL	No interferencia
	Paracetamol ( <i>Dolocatil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Lorazepam	$3.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia
	Metamizole ( <i>Nolotil</i> )	5.0 mg/mL	No interferencia	Amoxicillin	3.0 mg/mL	No interferencia
	Prednisone	0.3 mg/mL	No interferencia	Mercaptopurine	0.3 mg/mL	No interferencia
	Omeprazole	$2.0 \cdot 10^{-3}$ mg/mL	No interferencia	Biotine	0.10 mg/mL	No interferencia
	Naso GEL	0.9 mg/mL	No interferencia	Sore Throat Phenol spray	0.5 mg/mL	No interferencia
	CVS Nasal Spray ( <i>Cromolyn</i> )	4.0 mg/mL	No interferencia	Tobramycin	0.3 mg/mL	No interferencia
Afrin ( <i>Oxymetazoline</i> )	$5.0 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia	Mupirocin	$2.5 \cdot 10^{-2}$ mg/mL	No interferencia	

	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado	Potencial sustancia interferente	Concentración	Resultado
	CVS Nasal Drops (Phenylephrine)	10.0 mg/mL	No interferencia	Fluticasone Propionate	5.0·10 <sup>-2</sup> mg/mL	No interferencia
	ZICAM	1.0 mg/mL	No interferencia	Homeopathic	DIL 1/10	No interferencia
	Phenylpropanolamine	0.3 mg/mL	No interferencia			
<b>Endógenos</b>	Hemoglobina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Lactoferrin humana	5.0 µg/mL	No interferencia
	Transferrina humana	0.5 µg/mL	No interferencia	Mucina	0.5 %	No interferencia
	Calprotectina humana	5.0 µg/mL	No interferencia	Sangre humana	5.0 %	No interferencia

Table 22 Human Lactoferrin interferences results.

### F. Repetibilidad y Reproducibilidad

Tras el estudio de la repetibilidad y reproducibilidad de **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** realizado con diversas muestras internas, negativas y positivas, no se han observado diferencias dentro de las evaluaciones.

## ANEXO 1

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN.****Referencia: LX862001VF**

Anexo para la siguiente referencia:

PRODUCTO	REFERENCIA
<b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials)	LX862001VF

Tabla A 1. Referencia para kit de 20 carcacas de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

**I. Materiales**

MATERIALES SUMINISTRADOS	MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (formato combo card test)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>- 1x IFU: Instrucciones de uso (incluyendo 1x Quick guide, guía rápida de uso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guantes desechables (otros equipos de protección personal que se consideren necesarios).</li> <li>- Cronómetro.</li> <li>- Recipiente para recogida de muestra.</li> </ul>

Tabla A 1.1 Materiales necesarios para la realización del test.

**II. Procedimiento (muestras)**

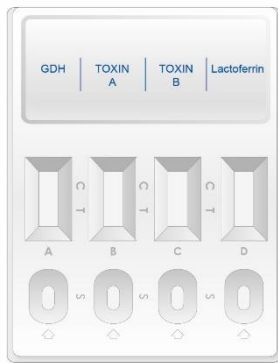
**Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones. Previamente los tests y las muestras se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.**

1. Agitar el **stool collection tube** (both types) para asegurar una buena dispersión.
2. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (formato combo card) de su envase antes de utilizarlo.
3. Tomar el **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cortar la punta del tapón (1) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra A (2), con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra B (3) y, con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra C (4), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
4. Tomar el **Lactoferrin stool collection tube**, abrir el tapón 2 (5) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra D (6), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.




5. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.


Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas sólidas, agitar con el palito la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.



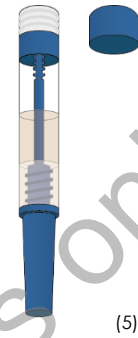
Ventana de resultados  
 ← Línea Control (C)  
 ← Línea Test (T)  
 ← Ventana circular de muestra



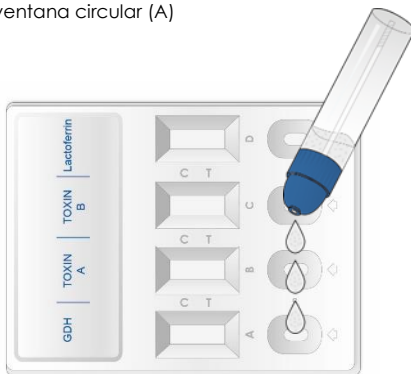(2) Añadir 3 gotas en la ventana circular (A)



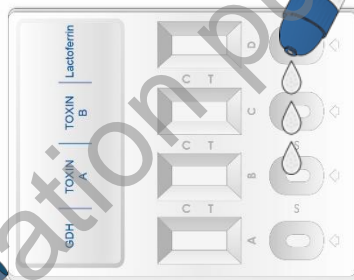
(3) Añadir 3 gotas en la ventana circular (B)



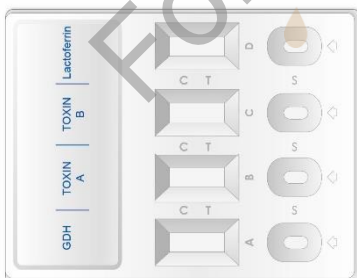(4) Añadir 3 gotas en la ventana circular (C)



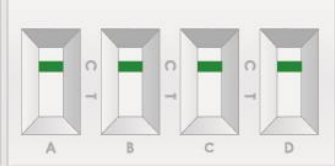

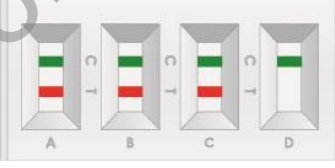
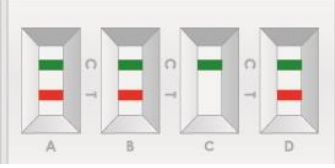
(6) Añadir 3 gotas en la ventana circular (D)

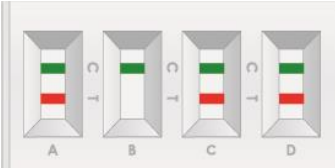
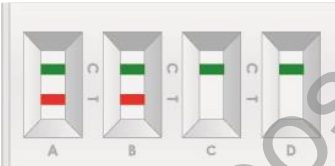
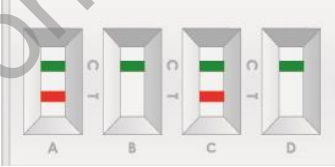
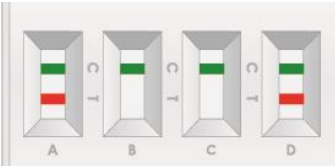


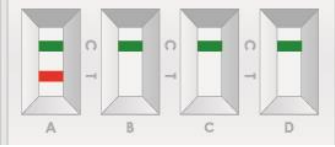
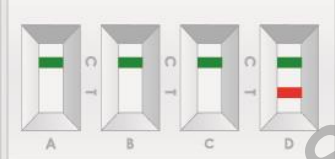

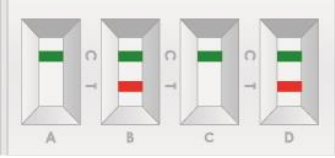
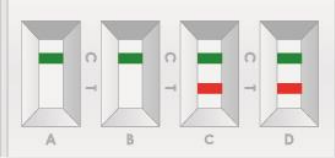
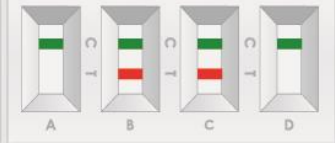
**Esperar 10 minutos**

### III. Interpretación de los resultados

(por favor, fíjese en el siguiente dibujo)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>No hay presencia de GDH, Toxina A, Toxina B ni de lactoferrina humana. No hay infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>Un resultado negativo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		
2.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
3.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		
4.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		
	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
5.	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
6.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina A. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
7.	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		
8.	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
9.	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE		<p>Hay presencia de GDH. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
10.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de lactoferrina humana. Posible inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
11.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A, Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
12.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		
13.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
14.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		

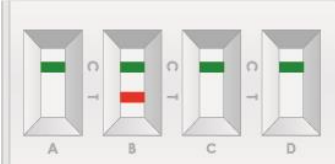
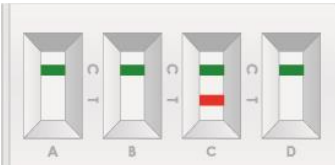
	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						debe considerar positiva para Toxina A y B.
15.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
16.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		
17.	<b>INVALIDO</b>				<p>Resultado inválido:</p> <p>resultado A, B, C o D, recomendamos repetir el ensayo utilizando la misma muestra con otra prueba.</p> <p>Cualquier resultado leído después de más de 10 minutos se considerará inválido.</p>	

Tabla A 1.2 Interpretación de los resultados de CeTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

**Pese a que cualquier resultado detallado entre 11 y 16 no sea muy común. Existe la posibilidad de que un porcentaje muy bajo de muestras den negativo para GDH y positivo para toxinas.**

**NEGATIVO:** Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana de resultados del test, en la zona marcada con la letra C (línea de control).

**POSITIVO:** Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea ROJA en la zona marcada con la letra T (línea de test) en la ventana de resultados. El resultado se considerará positivo independientemente de la intensidad de la línea ROJA de test

**INVÁLIDO:** Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

#### OBSERVACIONES

---

La intensidad de la línea de color rojo en la línea de test (T) en la ventana de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

## IV. Control de Calidad

### CONTROL INTERNO: línea de control

El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde que aparece en la zona de la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control interno del proceso, lo que confirma que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

For information purposes only

## ANEXO 2

**KIT 20 CARD C. DIFFICILE GDH+TOXIN A+B+LACTOFERRIN.****Referencia: LX862001VFC**

Anexo para la siguiente referencia:

PRODUCTO	REFERENCIA
<b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials + PC)	LX862001VFC

Tabla A 2. Referencia para kit de 20 carcacas de CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin con control positivo.

**I. Materiales**

MATERIALES SUMINISTRADOS	MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (formato combo card test)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile antigen GDH Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile Toxin A Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest C. difficile Toxin B Positive Control</b></li> <li>-1x <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b></li> <li>-4x <b>Testing tube</b></li> <li>-4x <b>Disposable pipette</b></li> <li>-3x <b>Red cap reagent tube</b></li> <li>-1x <b>Double cap reagent tube</b></li> <li>-1x IFU: Instrucciones de uso (incluyendo 1x Quick guide, guía rápida de uso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guantes desechables (otros equipos de protección personal que se consideren necesarios).</li> <li>- Cronómetro.</li> <li>- Recipiente para recogida de muestra.</li> </ul>


Tabla A 2.1 Materiales necesarios para la realización del test.

## II. Procedimiento (muestras)


Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones. Previamente los tests y las muestras se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.

1. Agitar el **stool collection tube** (both types) para asegurar una buena dispersión.
2. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (formato combo card) de su envase antes de utilizarlo.
3. Tomar el **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cortar la punta del tapón (1) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra A (2), con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra B (3) y, con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra C (4), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
4. Tomar el **Lactoferrin stool collection tube**, abrir el tapón 2 (5) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra D (6), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
5. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.

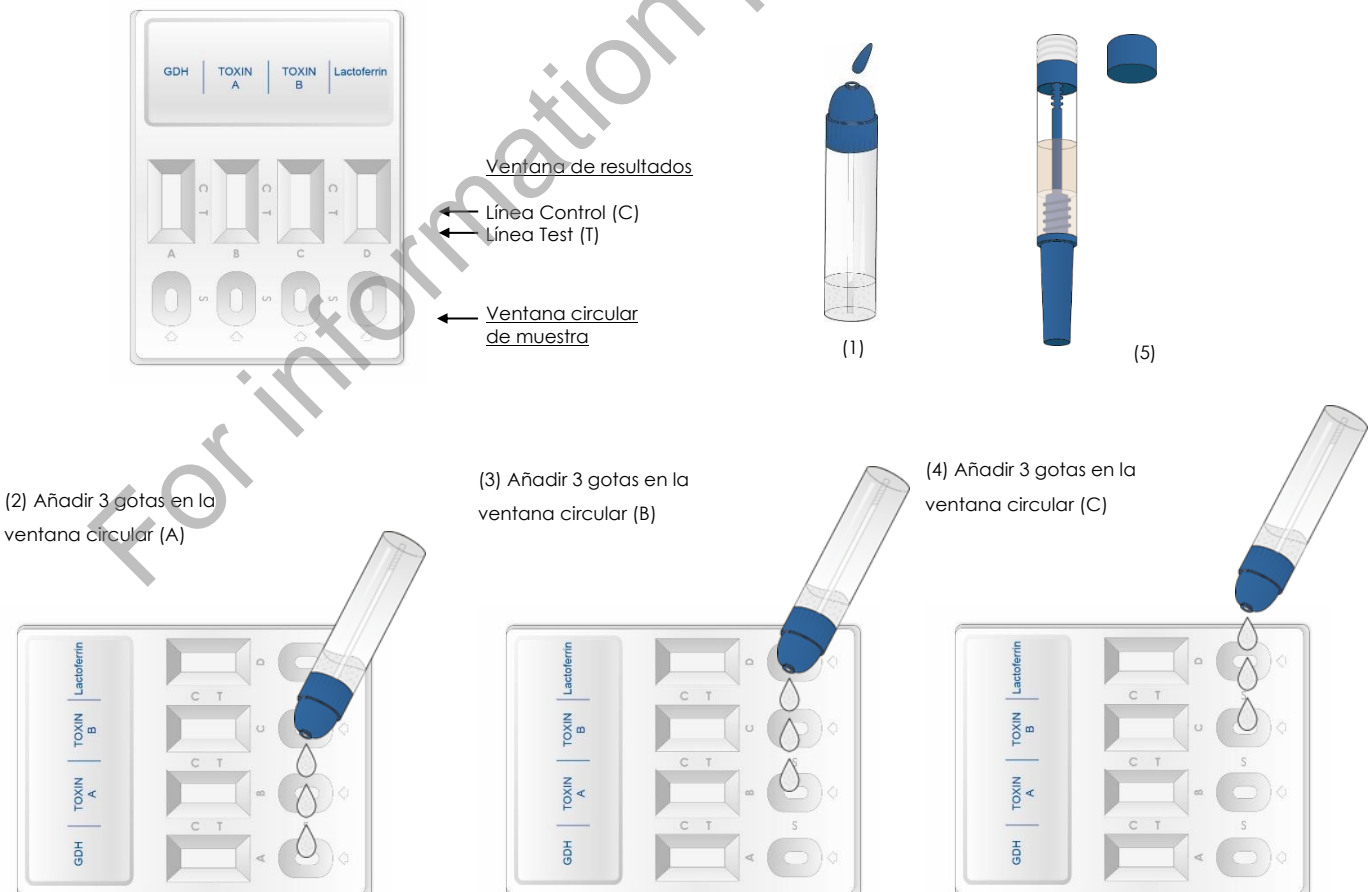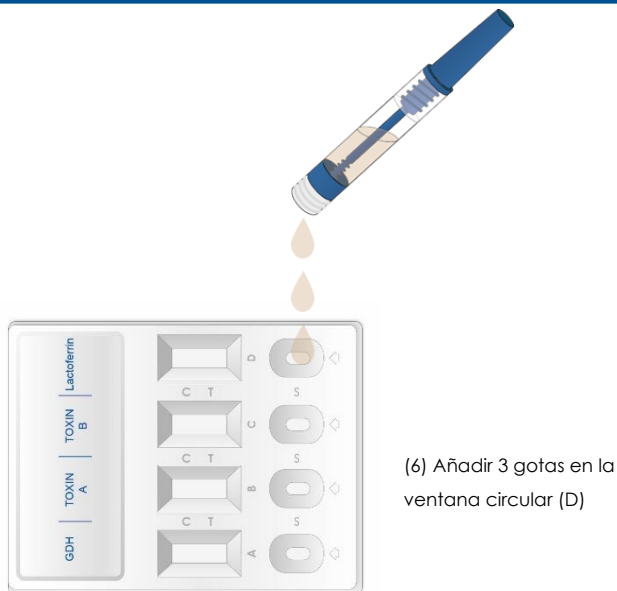Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas sólidas, agitar con el palito la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.





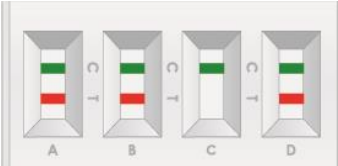

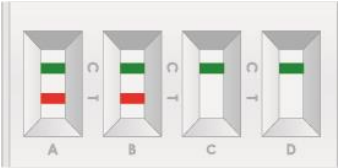
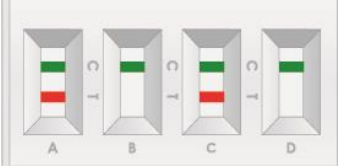


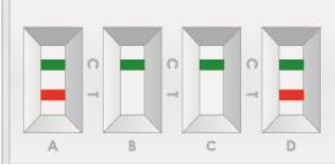

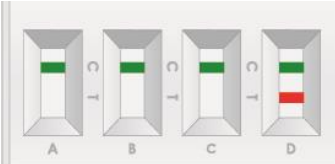
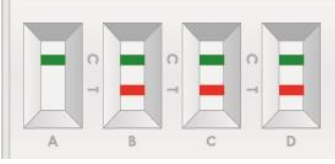
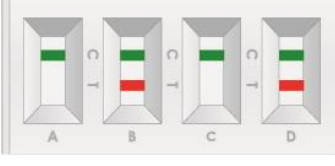
Esperar 10 minutos

### III. Interpretación de los resultados

(por favor, fíjese en el siguiente dibujo)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>No hay presencia de GDH, Toxina A, Toxina B ni de lactoferrina humana. No hay infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>Un resultado negativo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		
2.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
3.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						<p>intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
4.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		
5.	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
6.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina A. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
7.	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						laboratorio para confirmar los resultados.
8.	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
9.	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE		
10.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de lactoferrina humana. Posible inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
11.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A, Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
12.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						debe considerar positiva para Toxina A y B.
13.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
14.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		
15.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
16.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		
17.	<b>INVALIDO</b>				<p>Resultado inválido:</p> <p>resultado A, B, C o D, recomendamos repetir el ensayo utilizando la misma muestra con otra prueba.</p> <p>Cualquier resultado leído después de más de 10 minutos se considerará inválido.</p>	

Tabla A 2.2 Interpretación de los resultados de CerTest *C. difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

**Pese a que cualquier resultado detallado entre 11 y 16 no sea muy común. Existe la posibilidad de que un porcentaje muy bajo de muestras den negativo para GDH y positivo para toxinas.**

**NEGATIVO:** Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana de resultados del test, en la zona marcada con la letra C (línea de control).

**POSITIVO:** Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea ROJA en la zona marcada con la letra T (línea de test) en la ventana de resultados. El resultado se considerará positivo independientemente de la intensidad de la línea ROJA de test

**INVÁLIDO:** Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

#### OBSERVACIONES

La intensidad de la línea de color rojo en la línea de test (T) en la ventana de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

## IV. Control de Calidad

**CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) presenta cinco controles:

CONTROL INTERNO: línea de control

**Control interno:** El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde que aparece en la zona de la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control interno del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

CONTROL EXTERNO: HISOPOS CONTROL POSITIVO

**Control externo: CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control, CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control, CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control y CerTest Lactoferrin Positive Control** (hisopos control positivo).

#### A. Controles positivos externos

Se recomienda utilizar el mismo dispositivo para ambos controles positivos externos.

##### 1. **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**

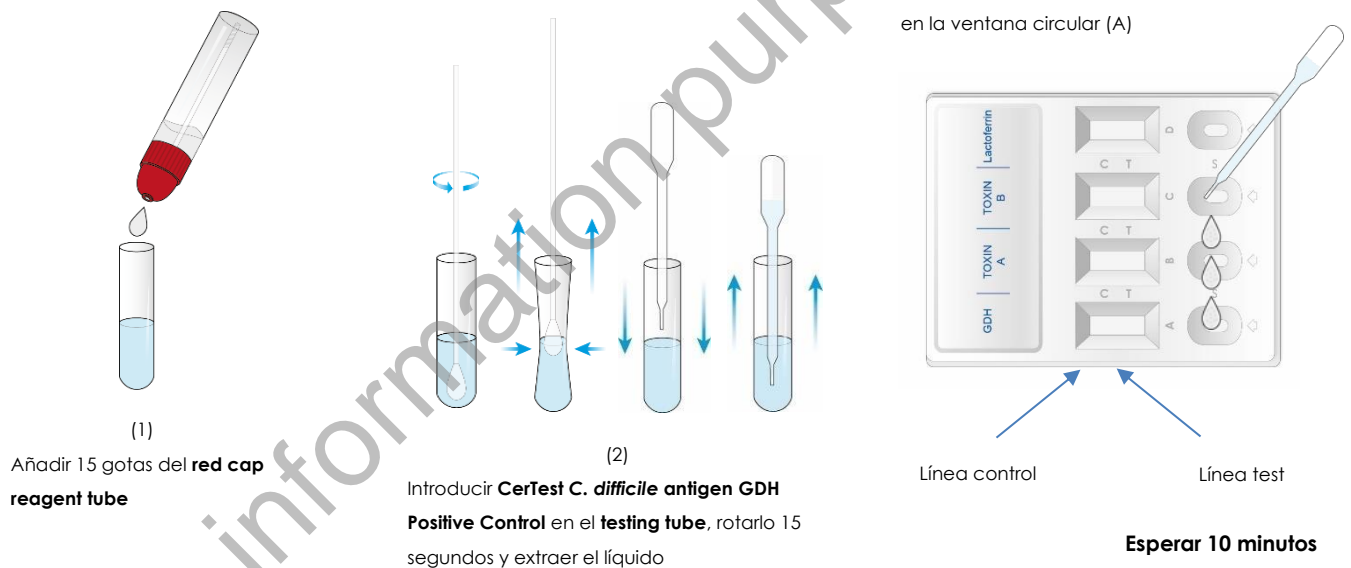
**CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira A). **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

##### 1.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

**Previamente los tests y CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.**

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) de **red cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra A (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



## 2. CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control

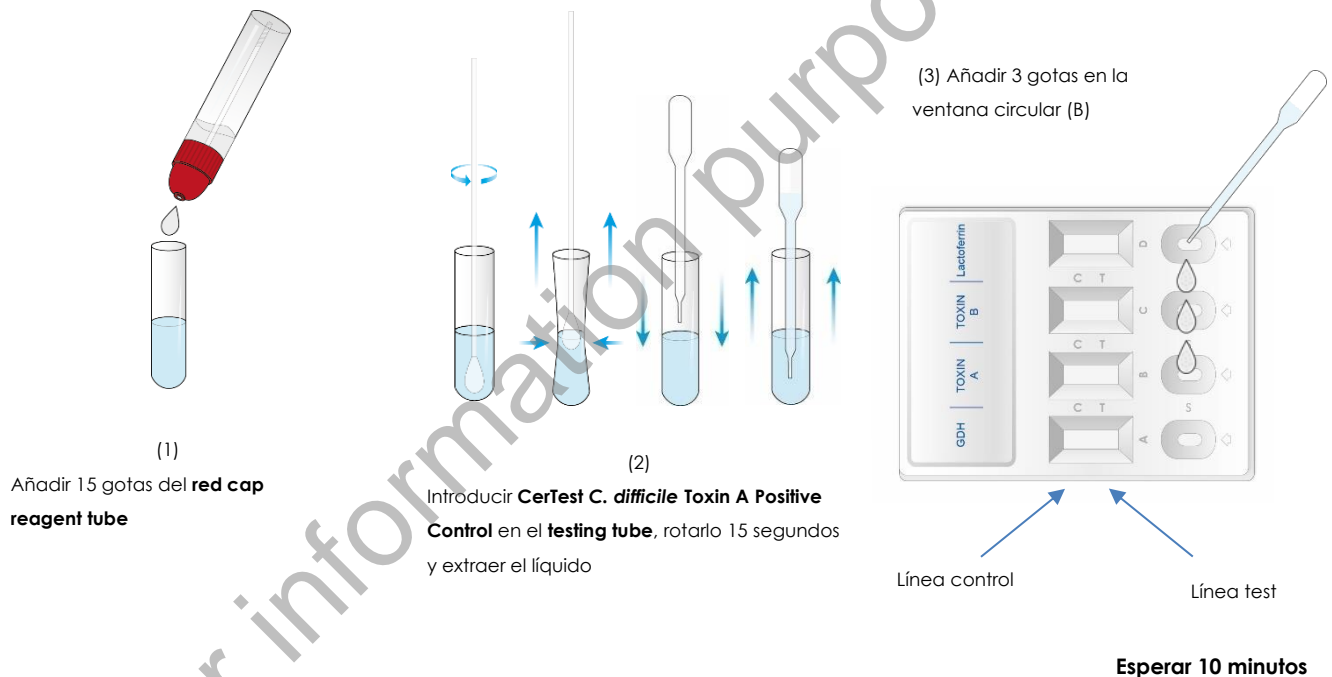
**CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira B). **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

### 2.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) del **red cap reagent tube** en el **testing tube**. e inmediatamente introducir **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** contra las paredes del **Testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra B (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



### 3. CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control

**CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira C). **CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

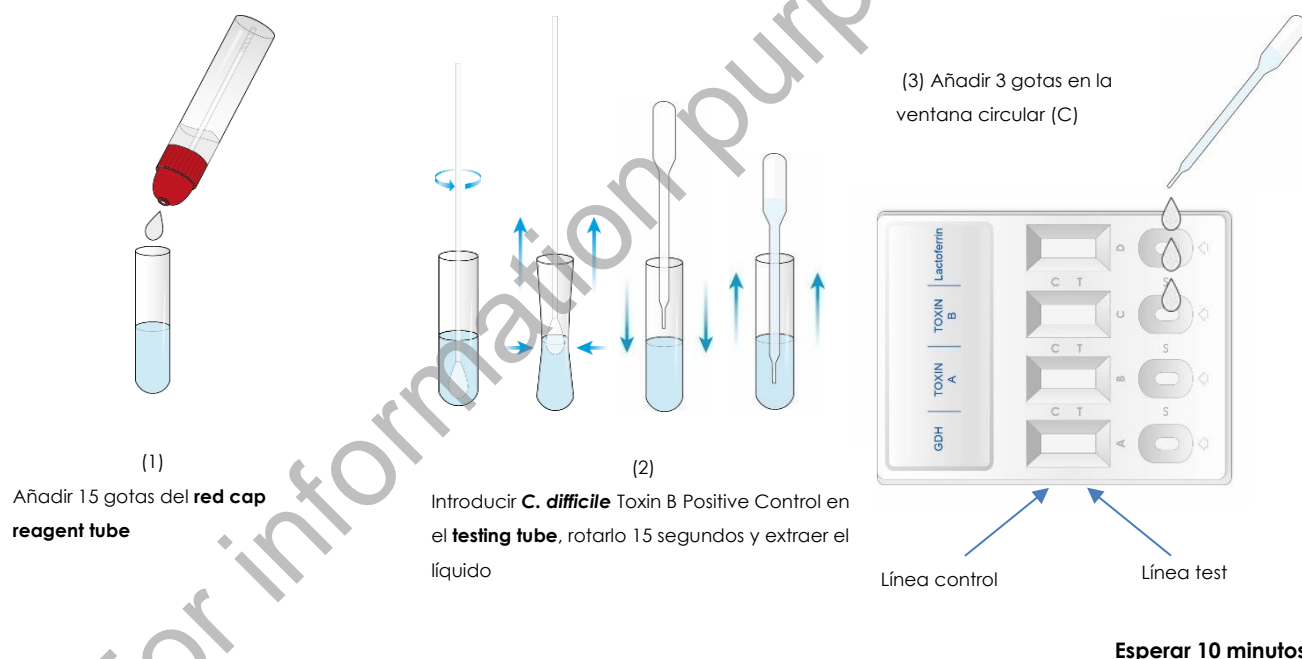
Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.



### 3.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) del **red cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra C (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



### 4. CerTest Lactoferrin Positive Control

**CerTest Lactoferrin Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira D). **CerTest Lactoferrin Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

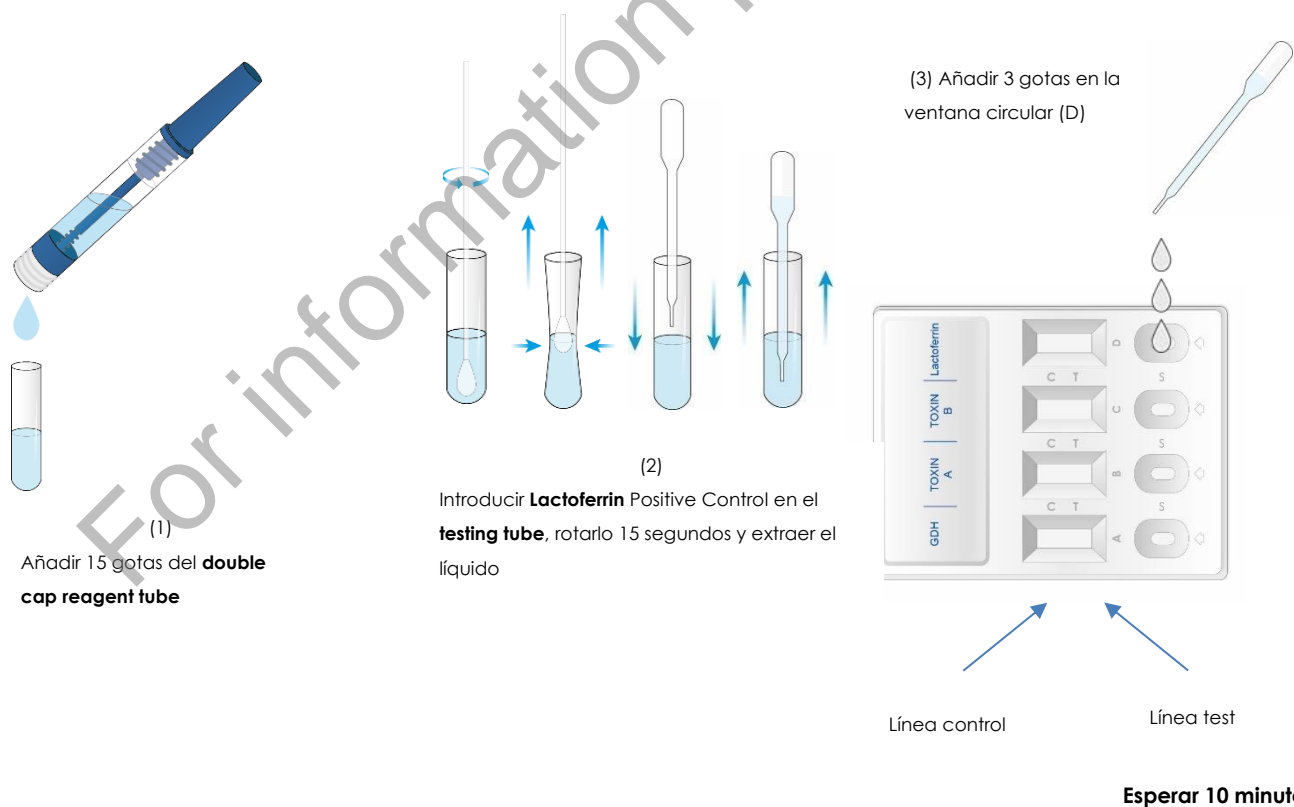


Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest Lactoferrin Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest Lactoferrin Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

#### 4.1. Procedimiento de uso de Control Positivo


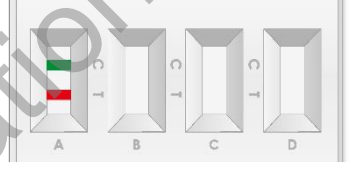
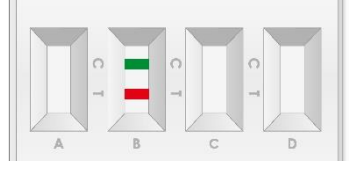
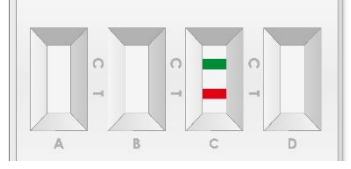
**Previamente los tests y CerTest Lactoferrin Positive Control se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.**

7. Tomar el **double cap reagent tube**, abrir el tapón 2.
8. Añadir 15 gotas (1) del **double cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
9. Mezclar la solución rotando **CerTest Lactoferrin Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest Lactoferrin Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
10. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
11. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra D (3).
12. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



Los controles positivos deberían usarse cada vez que se utilice un nuevo kit o según indiquen los controles establecidos por su laboratorio para los procedimientos de control de calidad.

### A.1 Interpretación del procedimiento del control positivo

CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control	Interpretación de los resultados	
<b>POSITIVO</b> (Un dispositivo para los tres controles positivos)					<p>Una línea <b>VERDE</b> aparece (línea de control (C)) en cada una de las tiras, en la ventana de resultados, debido a la presencia de antígenos en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b>, en la tira A, en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b>, en la tira B, en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b>, en la tira C, y en el <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b>, en la tira D.</p>
VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
<b>POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b> )					<p>Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados A durante el desarrollo del test debido a la presencia de GDH en <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b>.</p>
VERDE-ROJO	-	-	-		
<b>POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b> )					<p>Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados B durante el desarrollo del test debido a la presencia de Toxina A en <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b>.</p>
-	VERDE-ROJO	-	-		
<b>POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b> )					<p>Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados C durante el desarrollo del test debido a la presencia de Toxina B en <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b>.</p>
-	-	VERDE-ROJO	-		
<b>POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> )				<p>Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados D</p>	

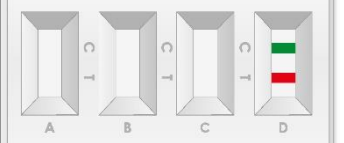
CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control		Interpretación de los resultados
-	-	-	VERDE-ROJO		durante el desarrollo del test debido a la presencia de lactoferrina en <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .
<b>6. INVÁLIDO</b>					Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA), o si sólo aparece la línea de control (C) (VERDE). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test y un nuevo <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control, CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control, CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control y CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .
Cualquier otro resultado				Resultado no válido ya sea A, B, C o D, recomendamos repetir el ensayo utilizando la misma muestra con otra prueba.	Si la situación se repitiera, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.  Cualquier resultado leído tras más de 10 minutos será considerado inválido.

Table A 2.3 Interpretación de los resultados de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

## ANEXO 3

## KIT 20 CARD C. *DIFFICILE* GDH+Toxin A+B+LACTOFERRIN. Referencia: LX862001VFCC

Anexo para la siguiente referencia:

PRODUCTO	REFERENCIA
<b>CerTest C. <i>difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> Combo Card (20 tests kit with stool vials + PC + NC)	LX862001VFCC

Tabla A 3. Referencia para kit 20 carcassas de CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin con control positivo y negativo.

### I. Materiales

MATERIALES SUMINISTRADOS	MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20x <b>CerTest C. <i>difficile</i> GDH+Toxin A+B+Lactoferrin</b> (formato combo card test)</li> <li>- 20x <b>GDH+Toxin A+B stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>- 20x <b>Lactoferrin stool collection tubes</b> (con diluyente)</li> <li>- 1x <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b></li> <li>- 1x <b>CerTest Negative Control</b></li> <li>- 6x <b>Testing tube</b></li> <li>- 6x <b>Disposable pipette</b></li> <li>- 4x <b>Red cap reagent tube</b></li> <li>- 2x <b>Double cap reagent tube</b></li> <li>- 1x IFU: Instrucciones de uso (incluyendo 1x Quick guide, guía rápida de uso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guantes desechables (otros equipos de protección personal que se consideren necesarios).</li> <li>- Cronómetro.</li> <li>- Recipiente para recogida de muestra.</li> </ul>


Tabla A 3.1 Materiales necesarios para la realización del test.

## II. Procedimiento (muestras)


Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones. Previamente los tests y las muestras se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.

1. Agitar el **stool collection tube** para asegurar una buena dispersión.
2. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (formato combo card test) de su envase antes de utilizarlo.
3. Tomar el **GDH+Toxin A+B stool collection tube**, cortar la punta del tapón (1) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra A (2), con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra B (3) y, con el mismo tubo, añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular con la letra C (4), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
4. Tomar el **Lactoferrin stool collection tube**, abrir el tapón 2 (5) y añadir 3 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra D (6), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
5. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.

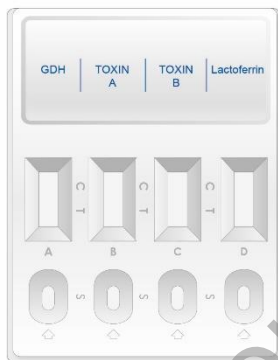
Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas sólidas, agitar con el palito la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.



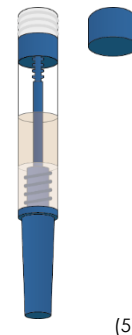
Ventana de resultados  
 ← Línea Control (C)  
 ← Línea Test (T)  
 ← Ventana circular de muestra



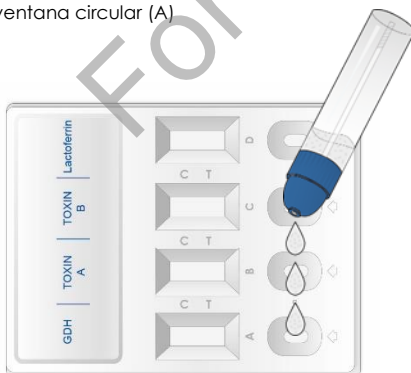(2) Añadir 3 gotas en la ventana circular (A)




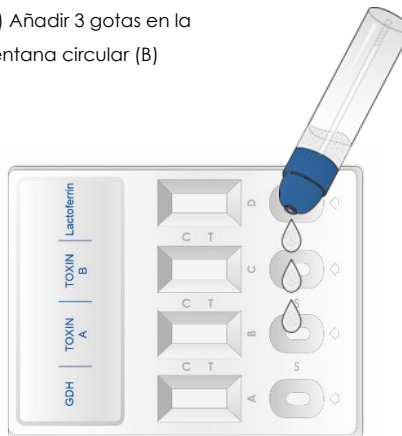(3) Añadir 3 gotas en la ventana circular (B)



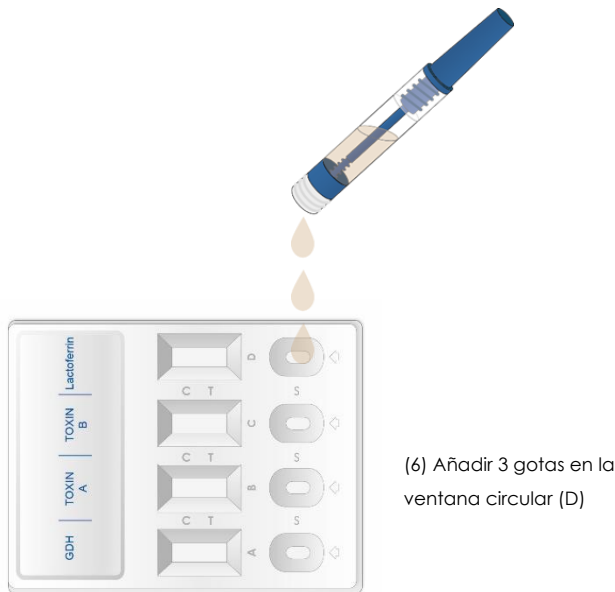(4) Añadir 3 gotas en la ventana circular (C)



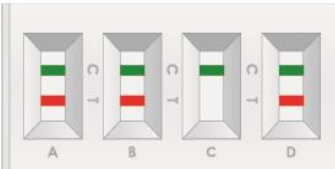
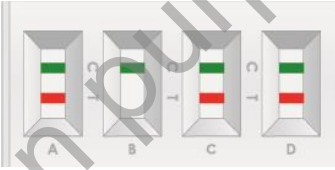
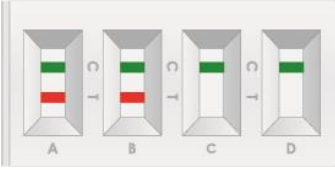
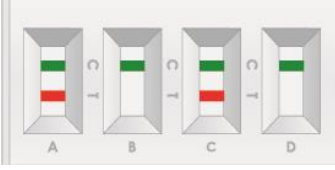


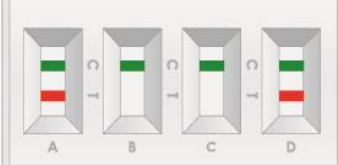

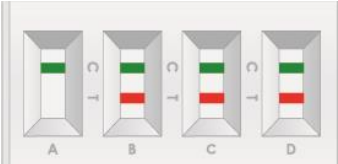
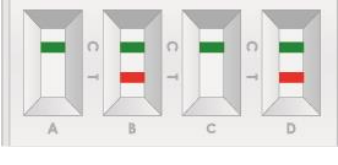
Esperar 10 minutos

### III. Interpretación de los resultados

(por favor, fíjese en el siguiente dibujo)

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
1.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>No hay presencia de GDH, Toxina A, Toxina B ni de lactoferrina humana. No hay infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>Un resultado negativo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		
2.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
3.	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A, y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						<p>intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
4.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina A y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		
5.	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH, de Toxina B y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
6.	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina A. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
7.	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH y de Toxina B. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		

	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						laboratorio para confirmar los resultados.
8.	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de GDH y de lactoferrina humana. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>, y existe inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
9.	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de GDH. Posible infección causada por <i>Clostridium difficile</i>.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE	VERDE		
10.	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de lactoferrina humana. Posible inflamación intestinal.</p> <p>La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerada como resultado positivo.</p> <p>Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas de laboratorio para confirmar los resultados.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
11.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A, Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO		
12.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE-ROJO		



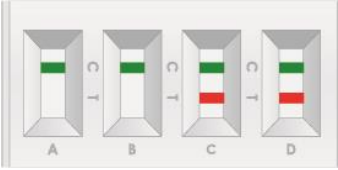
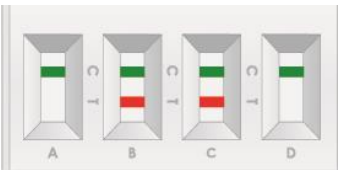
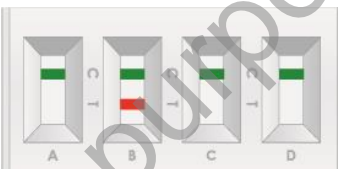
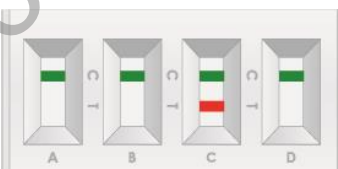
	GDH	Toxin A	Toxin B	Lactoferrin		Interpretation of the results
						debe considerar positiva para Toxina A y B.
13.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		<p>Hay presencia de Toxina B y de lactoferrina.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO		
14.	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A y de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE		
15.	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina A.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE	VERDE		
16.	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO		<p>Hay presencia de Toxina B.</p> <p>Si aparece este resultado se debe repetir el test utilizando una muestra fresca. Si los resultados son otra vez positivos para Toxina A y B y negativos para GDH, la muestra se debe considerar positiva para Toxina A y B.</p>
	VERDE	VERDE	VERDE-ROJO	VERDE		
17.	<b>INVALIDO</b>				<p>Resultado inválido:</p> <p>resultado A, B, C o D, recomendamos repetir el ensayo utilizando la misma muestra con otra prueba.</p> <p>Cualquier resultado leído después de más de 10 minutos se considerará inválido.</p>	

Tabla A 3.2 Interpretación de los resultados de CerTest *Clostridium difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin.

**Pese a que cualquier resultado detallado entre 11 y 16 no sea muy común. Existe la posibilidad de que un porcentaje muy bajo de muestras den negativo para GDH y positivo para toxinas.**

**NEGATIVO:** Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana de resultados del test, en la zona marcada con la letra C (línea de control).

**POSITIVO:** Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea ROJA en la zona marcada con la letra T (línea de test) en la ventana de resultados. El resultado se considerará positivo independientemente de la intensidad de la línea ROJA de test

**INVÁLIDO:** Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

#### OBSERVACIONES

La intensidad de la línea de color rojo en la línea de test (T) en la ventana de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

## IV. Control de Calidad

**CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) presenta seis controles:

CONTROL INTERNO: línea de control

**Control interno:** El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde que aparece en la zona de la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control interno del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

CONTROL EXTERNO: HISOPOS CONTROL POSITIVO E HISOPO CONTROL NEGATIVO

**Control positivo externo:** **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control, CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control, CerTest C. *difficile* Toxin B Positive Control y CerTest Lactoferrin Positive Control** (hisopos control positivo).

**Control negativo externo:** **CerTest Negative Control** (hisopo control negativo)

#### A. Controles positivos externos

Se recomienda utilizar el mismo dispositivo para ambos controles positivos externos.

##### 1. **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**

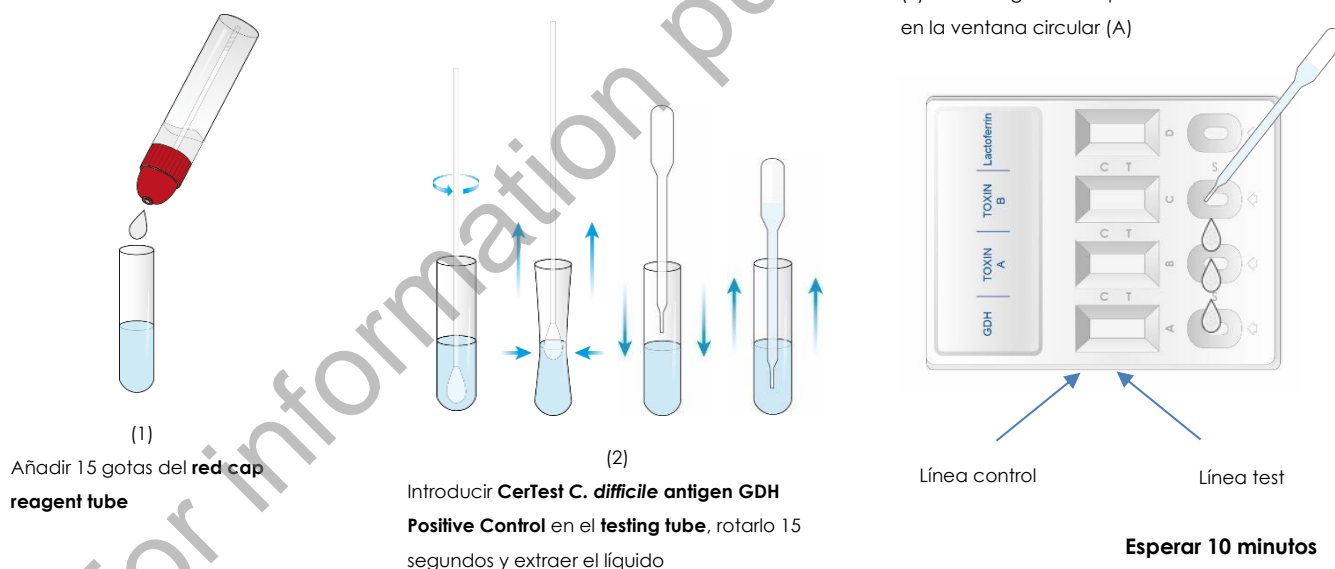
**CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira A). **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

### 1.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) de **red cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. *difficile* antigen GDH Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra A (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



### 2. CerTest C.*difficile* Toxin A Positive Control

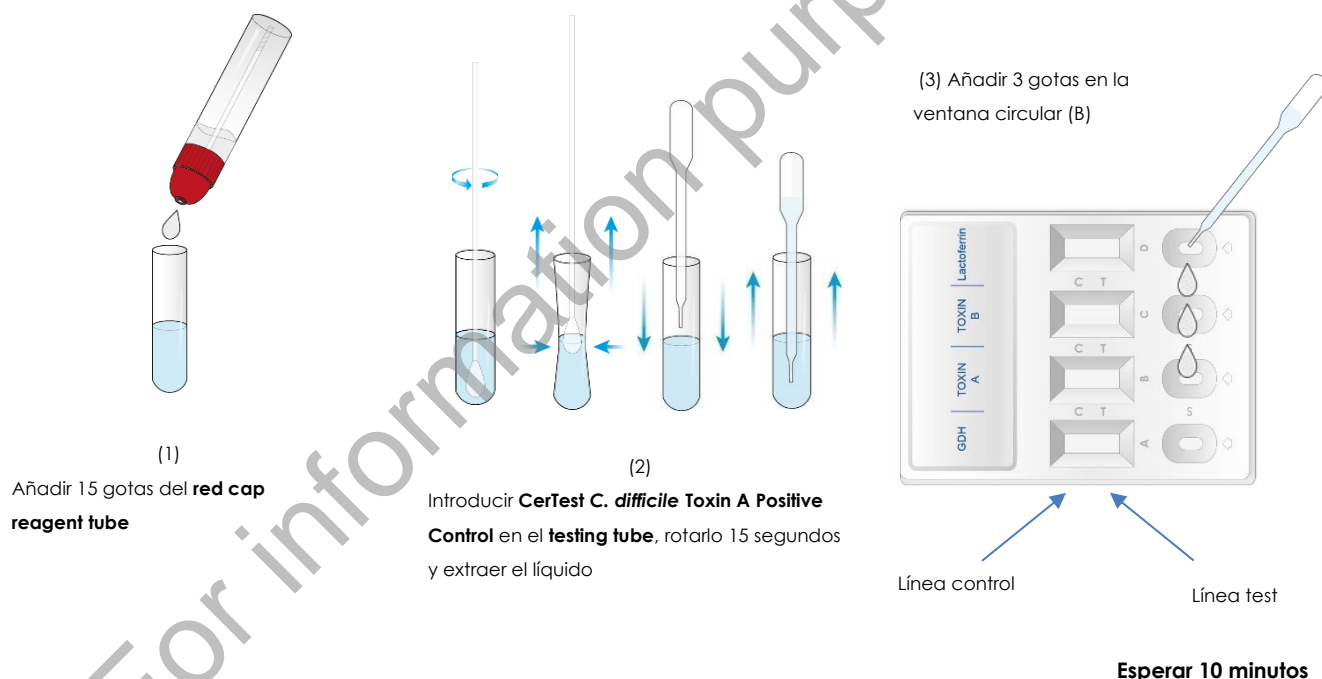
**CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira B). **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. *difficile* Toxin A Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

## 2.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) del **red cap reagent tube** en el **testing tube**. e inmediatamente introducir **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control** contra las paredes del **Testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. difficile Toxin A Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra B (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



### 3. CerTest C. difficile Toxin B Positive Control

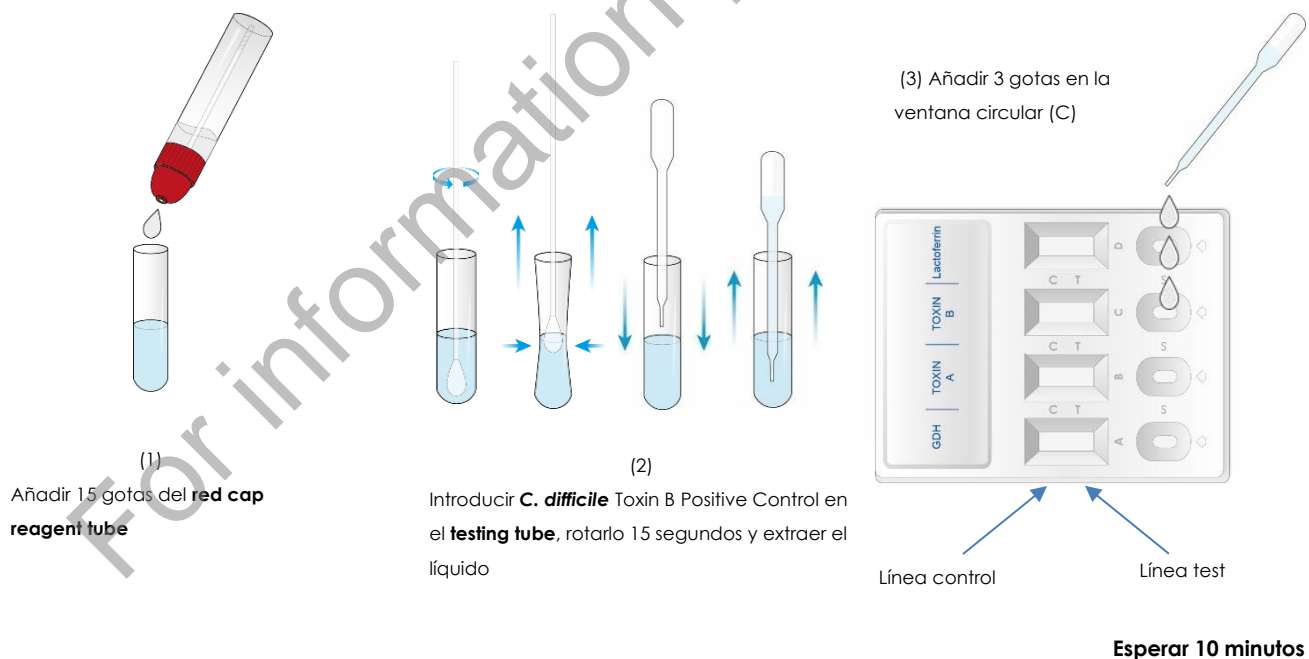
**CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira C). **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

### 3.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Tomar el **red cap reagent tube**, cortar la punta del tapón.
2. Añadir 15 gotas (1) del **red cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest C. difficile Toxin B Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra C (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



### 4. CerTest Lactoferrin Positive Control

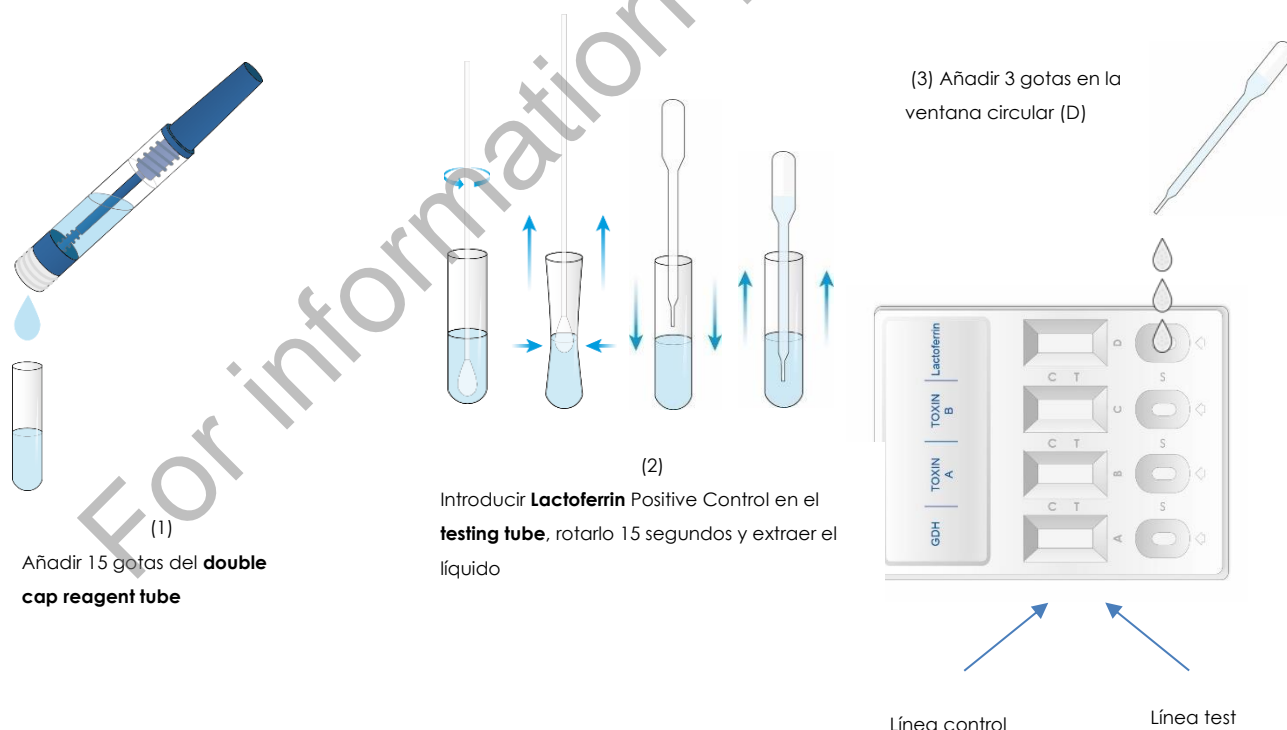
**CerTest Lactoferrin Positive Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira D). **CerTest Lactoferrin Positive Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado, **CerTest Lactoferrin Positive Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest Lactoferrin Positive Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

#### 4.1. Procedimiento de uso de Control Positivo

Previamente los tests y CerTest Lactoferrin Positive Control se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

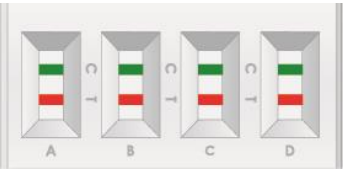

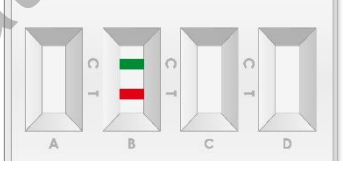
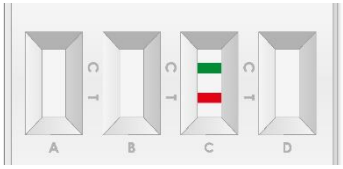
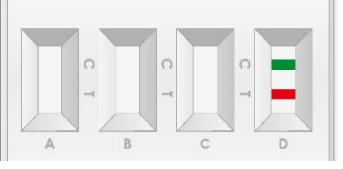
1. Tomar el **double cap reagent tube**, abrir el tapón 2.
2. Añadir 15 gotas (1) del **double cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
3. Mezclar la solución rotando **CerTest Lactoferrin Positive Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad de líquido de **CerTest Lactoferrin Positive Control**, presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira del vial (2). Desechar **CerTest Lactoferrin Positive Control**.
4. Sacar el **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
5. Usar una **disposable pipette** diferente para cada control. Dispensar 3 gotas del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra D (3).
6. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos. Cualquier resultado leído pasados los 10 minutos se considerará inválido.



**Esperar 10 minutos**

Los controles positivos deberían usarse cada vez que se utilice un nuevo kit o según indiquen los controles establecidos por su laboratorio para los procedimientos de control de calidad.

### A.1 Interpretación del procedimiento del control positivo

CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control	Interpretación de los resultados		
<b>1. POSITIVO</b> (Un dispositivo para los tres controles positivos)					Una línea <b>VERDE</b> aparece (línea de control (C)) en cada una de las tiras, en la ventana de resultados, debido a la presencia de antígenos en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b> , en la tira A, en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b> , en la tira B, en el <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b> , en la tira C, y en el <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> , en la tira D.	
VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	VERDE-ROJO	<b>2. POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b> )		Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados A durante el desarrollo del test debido a la presencia de GDH en <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control</b> .
VERDE-ROJO	-	-	-			
<b>3. POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b> )					Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados B durante el desarrollo del test debido a la presencia de Toxina A en <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control</b> .	
-	VERDE-ROJO	-	-			
<b>4. POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b> )					Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados C durante el desarrollo del test debido a la presencia de Toxina B en <b>CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control</b> .	
-	-	VERDE-ROJO	-			
<b>5. POSITIVO</b> (Un dispositivo para <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> )					Aparecerán una línea VERDE (línea de control (C)) y una línea ROJA (línea de test (T)) en la ventana de resultados D durante el desarrollo del test debido a la presencia de lactoferrina en <b>CerTest Lactoferrin Positive Control</b> .	
-	-	-	VERDE-ROJO			
<b>5. INVÁLIDO</b>						



CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control	CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control	CerTest Lactoferrin Positive Control		Interpretación de los resultados
Cualquier otro resultado				Resultado no válido ya sea A, B, C o D, recomendamos repetir el ensayo utilizando la misma muestra con otra prueba.	<p>Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA), o si sólo aparece la línea de control (C) (VERDE). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test y un nuevo <b>CerTest C. <i>difficile</i> antigen GDH Positive Control, CerTest C. <i>difficile</i> Toxin A Positive Control, CerTest C. <i>difficile</i> Toxin B Positive Control y CerTest Lactoferrin Positive Control.</b></p> <p>Si la situación se repitiera, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.</p> <p>Cualquier resultado leído tras más de 10 minutos será considerado inválido.</p>

Table A 3.3 Interpretación de los resultados

## B. Control negativo externo. CerTest Negative Control

**CerTest Negative Control** es un control de calidad externo para **CerTest C. *difficile* GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (Tira A, B, C y D). **CerTest Negative Control** se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado. **CerTest Negative Control** es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. **CerTest Negative Control** no debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

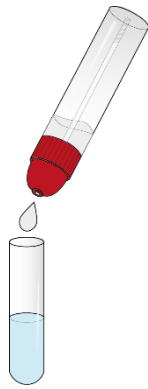
### B.1 Procedimiento de uso del Control Negativo

Previamente los tests y **CerTest Negative Control** se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

Para GDH, Toxina A y Toxina B:




1. Añadir 15 gotas (1) de diluyente del **red cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest Negative Control**.
2. Mezclar la solución rotando **CerTest Negative Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del **CerTest Negative Control** presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira. Desechar **CerTest Negative Control**.
3. Sacar **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
4. Usar una **disposable pipette** y un test diferente para cada control. Añadir 3 gotas a partir del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra A (3), 3 gotas a partir del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra B (4) y 3 gotas a partir del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra C (5).
5. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos.




(1)

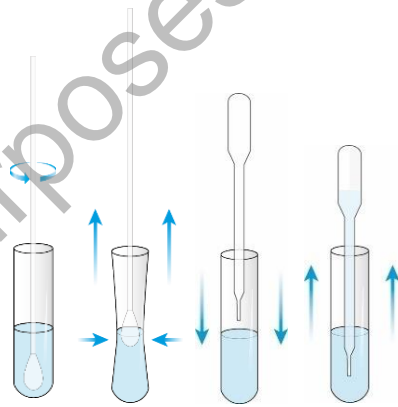Añadir 15 gotas de **red cap reagent tube**




(2)

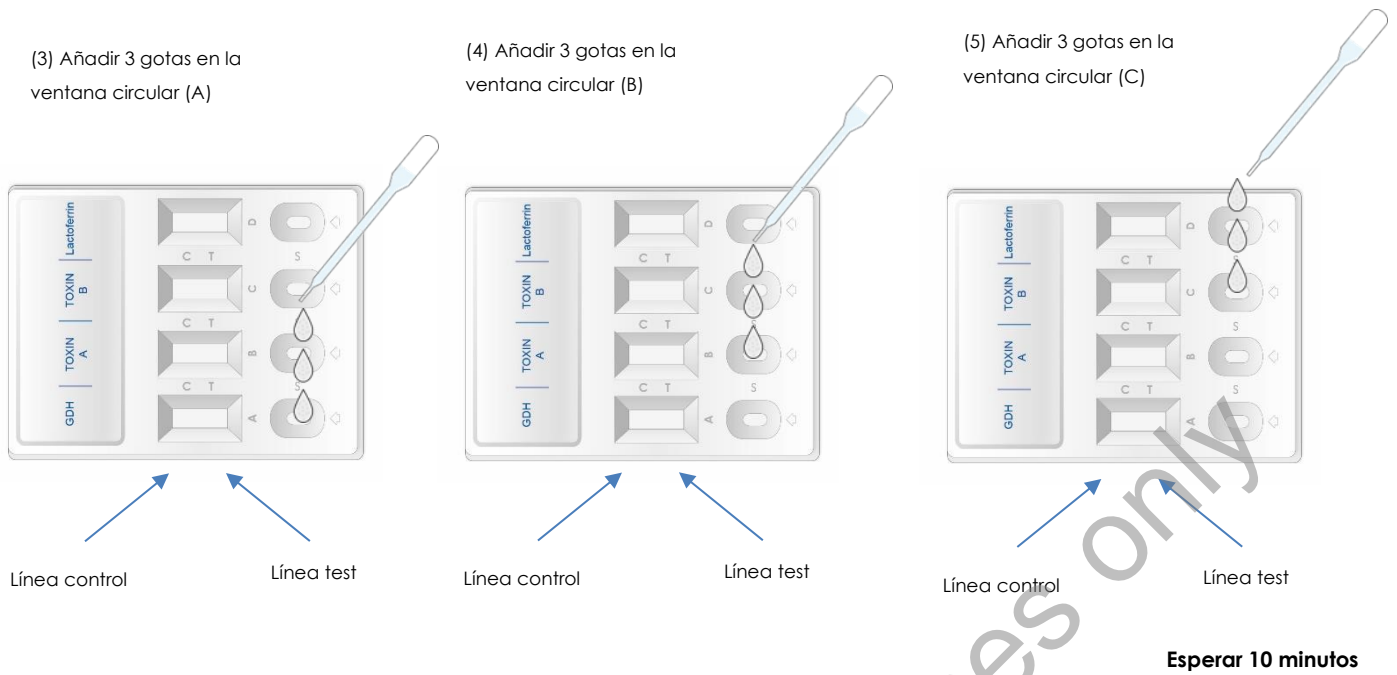Introducir **CerTest Negative Control** en el **testing tube**, rotarlo 15 segundos y extraer el líquido.




#### Para Lactoferrina:

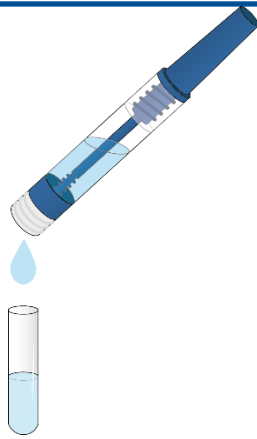1. Añadir 15 gotas (1) de diluyente del **double cap reagent tube** en el **testing tube** e inmediatamente introducir **CerTest Negative Control**.
2. Mezclar la solución rotando **CerTest Negative Control** contra las paredes del **testing tube** al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del **CerTest Negative Control** presionándolo contra las paredes del **testing tube** mientras se retira. Desechar **CerTest Negative Control**.
3. Sacar **CerTest C. difficile GDH+Toxin A+B+Lactoferrin** (combo card test) de su envase sellado antes de utilizarlo.
4. Usar una **disposable pipette** y un test diferente para cada control. Añadir 3 gotas a partir del **testing tube** en la ventana circular marcada con la letra D (3).
5. **Leer el resultado a los 10 minutos**. No leer el resultado superados los 10 minutos.



(1)

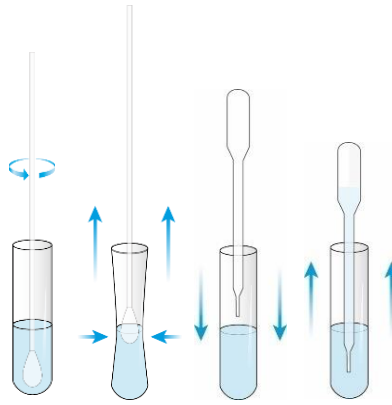
Add 15 drops of **double cap reagent tube**



(2)

Introducir **CerTest Negative Control** en el **testing tube**, rotarlo 15 segundos y extraer el líquido.

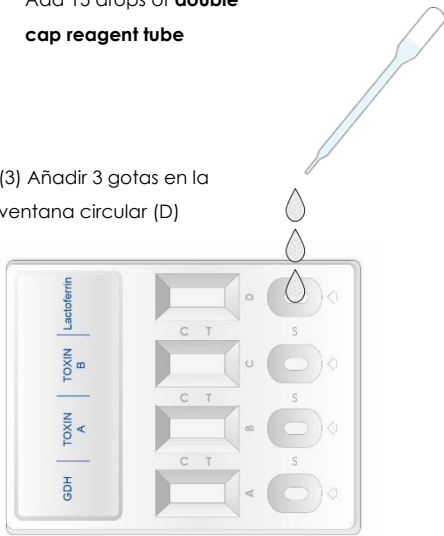(3) Añadir 3 gotas en la ventana circular (D)



Línea control

Línea test

**Esperar 10 minutos**

Los controles negativos deberían usarse cada vez que se utilice un nuevo kit o según indiquen los controles establecidos por su laboratorio para los procedimientos de control de calidad.

## B.1.1 Interpretación del procedimiento del control negativo

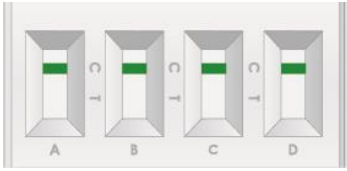













CerTest Negative Control			Interpretación de los resultados
1.	<b>RESULTADO VÁLIDO</b>		Solo aparecerá una línea VERDE (línea de control (C)) en la ventana de resultados durante el desarrollo del test
	VERDE (Sólo aparece la línea de Control)		
2.	<b>INVÁLIDO</b>	<p>Resultado no válido ya sea A, B, C o D recomendamos repetir el ensayo utilizando el mismo muestra con otra prueba.</p>	<p>Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA), o aparecen ambas líneas (línea ROJA de test y línea VERDE de control). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test y un nuevo <b>CerTest Negative Control</b>.</p> <p>Si la situación se repitiera, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.</p> <p>Cualquier resultado leído tras más de 10 minutos será considerado inválido.</p>
	Cualquier otro resultado		

Tabla A 3.4 Interpretación de los resultados de CerTest Negative Control.

## 11. Reference/Bibliografía

1. Vaishnavi C. **Clinical spectrum & pathogenesis of Clostridium difficile associated diseases.** Indian J Med Res. 2010;131(4):487–99.
2. Fitzsimmons. **Independent evaluation of a GDH enzyme immunoassay for C. difficile screening.** Biomed Sci. 2011;(October):698–700.
3. Ofori E, Ramai D, Dhawan M, Mustafa F, Gasperino J, Reddy M. **Community-acquired Clostridium difficile: epidemiology, ribotype, risk factors, hospital and intensive care unit outcomes, and current and emerging therapies.** J Hosp Infect. 2018;99(4):436–42.
4. Guh AY, Mu Y, Winston LG, Johnston H, Olson D, Farley MM, et al. **Trends in U.S. Burden of Clostridioides difficile Infection and Outcomes.** N Engl J Med. 2021;382(14):1320–30.
5. Wren MWD, Sivapalan M, Kinson R, Shetty NP. **An evaluation of tests for faecal toxin , glutamate dehydrogenase , lactoferrin and toxigenic culture in the diagnostic laboratory.** Br J Biomed Sci. 2009;66(1):1–5.
6. Angriman I, Scarpa M, D'Incà R, Basso D, Ruffolo C, Polese L, et al. **Enzymes in feces: Useful markers of chronic inflammatory bowel disease.** Clin Chim Acta. 2007;381(1):63–8.
7. Guerrant RL, Araujo V, Soares E, Kotloff K, Lima AAM, Cooper WH, et al. **Measurement of fecal lactoferrin as a marker of fecal leukocytes.** J Clin Microbiol. 1992;30(5):1238–42.
8. Services U. D of H and H. **Antibiotic resistance threats in the United States.** Centers Dis Control Prev. 2019;1–113.

## 12. Symbols for IVD components and reagents/Símbolos para reactivos y productos para diagnóstico in vitro

	In vitro diagnostic device / Producto para diagnóstico in vitro		Contains <n> test/ Contiene <n> test		Catalogue number/ Número de referencia		Keep dry/ Almacenar en lugar seco
	Consult instructions for use/ Consultar las instrucciones de uso		Batch code/ Número de lote		Use by (yyyy-mm: year and month)/ Fecha de caducidad (yyyy-mm: año y mes)		Temperature limitation/ Limitación de temperatura
	Only one use/ No reutilizar		Manufacture/ Fabricante	DIL	Sample diluent/ Diluyente de muestra		CE marking/ Marcado CE
	Positive Control/ Control positivo		Negative Control/ Control negativo				

Change Control/Control de Cambios		
Version/Versión	Changes/Cambios	Date/Fecha
00	Updated new IFU format and IFU codification / Adaptación nuevo formato de instrucción de uso y codificación	03/04/2023

Table A 4. Change control table/ Tabla de Control de Cambios.

For information purposes only

For information purposes only



## CerTest Rapid Test

**CerTest**  
BIOTEC



**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)

Tel. (+34) 976 520 354

Fax (+34) 976 106 268

[certest@certest.es](mailto:certest@certest.es) | [rapidtest@certest.es](mailto:rapidtest@certest.es)

[www.certest.es](http://www.certest.es)

*One step ahead*

For information purposes only

F-616 rev.00